

Autostol til børn med funktionsnedsættelser Carrot 3

Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen grundigt, før du bruger Carrot 3.



Når du har læst denne brugsanvisning, bedes du altid opbevare den i lommen på bagsiden af Carrot 3.



Kære kunde,

hjertelig tillykke med din Carrot 3!

For at dit barn fremover kører med i bilen på en helt sikker måde, beder vi dig på det kraftigste om at læse følgende brugsanvisning grundigt, før du tager sædet i brug – forhåbentlig til mange dejlige ture i personbilen eller i skolebussen.

Med de mange indstillingsmuligheder på Carrot 3 kan du tilpasse sædet, så dit barn sidder optimalt. Carrot 3 er designet til at kunne følge dit barns vækst i mange år. Har du brug for hjælp til de nødvendige indstillinger, står din forhandler gerne til rådighed.

Har du flere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores team på (06721) 906 0 eller via et videoopkald. Vi tager også meget gerne imod dine forslag til, hvordan vi kan gøre produktet endnu bedre – skriv til os på info@rehanorm.de.

God tur med jeres Carrot 3-autosikkerhedssæde,

Venlig
hilsen

Andrea Staus og RehaNorm-teamet

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed i henhold til artikel 19 og bilag IV i forordning (EU) 2017/745 (MDR) af 5. april 2017 om medicinsk udstyr (EU-overensstemmelseserklæring for medicinsk udstyr), at autosikkerhedssædet Carrot 3 opfylder de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2017/745 (MDR) af 5. april 2017 om medicinsk udstyr. Fremstillingen af Car-rot 3 sker under kontrol af et kvalitetsledelsessystem i henhold til EN ISO 9001 og under hensyntagen til kravene i forordning (EU) 2017/745 (MDR) af 5. april 2017 om medicinsk udstyr.

Vores produktmærkning findes på bagsiden af autosikkerhedssædet Carrot 3 under betrækket i højre side.

Producent:

Seeds Co. LTD,
Meshiro-cho 705-16,
Isahaya City,
854-0007 Nagasaki-præfekturet,
Japan

Producerende fabrik:

Marubishi Industry Co., Ltd.,
1251-3 Honjo, Komaki-shi, Aichi,
Japan

Eneste importør i Europa og autoriseret repræsentant for EU-markedet for medicinsk udstyr:

RehaNorm GmbH & Co. KG,
Am Ockenheimer Graben 50,
55411 Bingen
Tyskland
Telefon +49 67 21/90 60,
Telefax +49 67 21/90 66 6,
E-mail: info@rehanorm.de,
www.rehanorm.de



Indholdsfortegnelse

EU-overensstemmelseserklæring.....	3
Indholdsfortegnelse	4
Advarsler og sikkerhedsanvisninger	7
Godkendelse.....	7
Placering.....	7
Egnethed af køretøjet.....	7
Egnethed af køretøjssædet.....	8
Genbrug efter en ulykke	8
Genbrug efter første anvendelse	8
Betræk til Carrot 3	8
Køretøjer med airbags	8
Vejledning til brug af Carrot 3 i bilen	8
Bilens sikkerhedssele (trepunktssele).....	9
Sådan bruges Carrot 3	9
Hvornår Carrot 3 ikke må bruges	9
Vigtige forhold at være opmærksom på	9
Hældning af bilsædets ryglæn	10
Formål/indikation	11
Brugsrisici/kontraindikationer	11
Funktionsbeskrivelse	12
Montering i bilen.....	14
Standardmontering.....	14
Vandret fastgørelse af Carrot 3 på bilsædet	14
Lodret fastgørelse af Carrot 3 på bilsædet.....	14
Montering med LATCH	15
Montering i fly.....	17
Fastspænding af Carrot 3 i fly.....	17
Forberedelse af Carrot 3 før brug i fly	18
Montering af fremadvendt Carrot 3 i fly.....	19
Funktioner	20
Hovedområde.....	20
Justering af hovedstøtten frem eller tilbage.....	20

Justering af hovedpuden.....	20
Skulderområde.....	21
Justering af 5-punktsselen	21
Justering af længden på 5-punktsselen (positioneringssele)	21
Selepolstring.....	22
Skuldermodul	22
Brystområde.....	23
Justering af brystpuden.....	23
Åbning og lukning af 5-punktsselen.....	24
Ryglæn	24
Indstilling af ryglænets højde.....	24
Fyldpuder (50 mm/100 mm)	24
Sidekollisionspolstring	25
Sædeflade.....	26
Justering af sædedybde.....	26
Sædeforlængere (50 mm / 100 mm)	26
Polstring til benstøtte	26
Indstikbar sædeforlænger 50 mm	27
Justering af sædedybde.....	27
Fodstøtter	27
Terapibord/underarmsstøttepolstring	28
Trekantkile/underlægningskile	28
Anti-udstigningsvest	28
Polstring (basisudstyr).....	29
Hovedpolstring	29
Overkropsstøttepude.....	29
Sæde-balancepude.....	29
Sædepude.....	29
Sidekollisionspude	29
Yderligere valgfrit tilbehør.....	30
Anti-adduktions-/knæskillepude.....	30
Aftagelig inkontinensopsamler	30
Transportrem	31
Pelotter til kropsføring.....	31
Abduktionskile.....	31
Overkropsstøttepude.....	31

Lammepels til brystskjoldet	31
Skulderstropper til fempunktsele med stik,	31
Topunkts hofteselev som ekstra sele.....	31
Sikkerhedssele-lås.....	32
Overtræk til selelås.....	32
Inkontinens-overtræk	32
Sikring af dit barn.....	33
Pleje og vedligeholdelse.....	35
Aftagning af betrækket.....	35
Rengøring og desinfektion – rengøring af betræk og polstring	35
Vedligeholdelse	35
Produktets levetid og vedligeholdelse	35
Tekniske data.....	37
Vægte.....	37
Mål	37
Materiale	37
Garanti.....	38
Garantiperiode	38
Begrænsninger i garantien.....	38
Formular til garantikrav	38
Lægeerklæring.....	39

Advarsler og sikkerhedsanvisninger



Advarsel: Der kan opstå alvorlige – og i værste fald dødelige – skader, hvis følgende anvisninger ikke følges!

Godkendelse

Carrot 3 er testet og godkendt som universelt fastholdelsessystem i henhold til lovgivningen om medicinsk udstyr og er ikke omfattet af yderligere standarder. Carrot 3 er desuden testet med udgangspunkt i UN ECE R129/03 med Q3-dummy (lille sædekonefiguration til børn på 80–95 cm) og Q10-dummy (stor sædekonefiguration til børn på 95–150 cm). For børn, der på grund af den aktuelle sygdomstilstand og/eller en eksisterende funktionsnedsættelse ikke kan transporteres i en typegodkendt fastholdelsesanordning i henhold til § 22a, stk. 1, nr. 27 i den tyske færdselsgodkendelsesbekendtgørelse, kræves en lægeerklæring (se den vedlagte lægelige attest samt den tyske Forbundsministeriums for Transport "Tredje forordning om undtagelser fra færdselsretlige bestemmelser af 5. juni 1990")

Sædevarianten Carrot 3 er også godkendt til brug i fly. Dette gælder ikke for sædevarianten Carrot 3 XL.

Placering

- Placer Carrot 3 udelukkende i kørselsretningen. Vi anbefaler pladsen bag forsædepassageren.
- Vi anbefaler at bruge Carrot 3 i oprejst position.
- Brug ikke Carrot 3 på passagersædet foran, hvis det hindrer dig i at betjene gearskiftet eller håndbremsen, eller hvis barnet dér utilsigtet kan nå betjeningsknapper.
- Vær ved monteringen opmærksom på, at ingen del af Carrot 3 ved normal brug af bilen kan komme i klemme under et bevægeligt sæde eller i døren. En forkert fastgjort Carrot 3 kan medføre en høj risiko for dødsfald eller personskade.
- Ved bilsæder med justerbart ryglæn skal du altid sikre, at sædets justeringsmekanisme er låst korrekt. Ved en pludselig opbremsning kan et ryglæn, der ikke er låst, ikke give den nødvendige sikkerhed.

Vigtigt:

Hvis du monterer Carrot 3 på passagersædet foran, skal sædet skubbes så langt tilbage som muligt for at udelukke risikoen for skader fra airbaggen.

Køretøjets egnethed

Carrot 3 er egnet til brug i køretøjer, der er udstyret med trepunkts-sikkerhedsseler godkendt efter standarderne i ECE-regulativ nr. 16 eller andre tilsvarende standarder.

Egnethed af køretøjets sæde

Følgende køretøjssæder er ikke egnede til brug sammen med Carrot 3 :

- Autostole uden sikkerhedssele,
- Autostole, der er monteret sideværts eller bagudvendt,
- Autostole med en sædedybde på under 40 cm,
- Autostole med en tydelig krumning i sædet, som kan give en ustabil fastgørelse, 8
- Autostole med en 2-punktssele

Genbrug efter en ulykke

For at undgå skader på grund af skjulte skader må produktet ikke bruges efter en ulykke igen.

Genbrug efter første anvendelse

Ifølge producentens anvisninger er genbrug af autostolen efter brug af den patient, der er angivet i ordinationen, ikke tilladt.

Betræk til Carrot 3

Brug kun det medfølgende betræk, da det er en vigtig del af fastholdelsesevnen.

Køretøjer med airbags

Hvis dit køretøj er udstyret med airbags, skal du følge køretøjets brugsanvisning vedrørende montering af en autostol.

Vejledning til brug af Carrot 3 i bilen

- Beskyt dit barn ved brug af Carrot 3 i bilen ved høje udetemperaturer mod forbrændinger fra varmt metal (fx selelås) eller plastdele ved at sikre, at alle dele, som barnet kan komme i kontakt med, har en ufarlig temperatur. Dæk evt. Carrot 3 til, når bilen er parkeret i solen. Selve Carrot 3 tager ikke skade af høje eller lave temperaturer eller sollys.
- Efterlad ikke dit barn i Carrot 3 uden opsyn eller alene i bilen.
- Transportér altid barnet med Carrot 3 s 5-punktsele spændt samt bilens 3-punktsele.
- Autostolens seler skal sidde tæt til barnet og justeres før hver tur. Meget tykt tøj, fx jakker, reducerer sikkerheden og bør derfor ikke bæres i stolen.
- Selerne må ikke danne løkker og må ikke være snoet.
- Selerne må ikke presse hårdt mod barnets hud eller bringe kroppen i en unaturlig position.

- Sørg for, at de sorte fastgørelsesstropper på Carrot 3 sidder stramt fast på bilsædet.
- Kontrollér, at sikkerhedsselen klikker korrekt i lås.

Bilens sikkerhedssele (trepunktssele i bilen)

- Den vigtigste beskyttelse for personer i en bil ved en kollision er bilens trepunktssele – sikkerhedsselen. Brug kun seleføringsstropperne til at fastholde bilens sikkerhedssele.
- Brug aldrig Carrot 3 uden bilens trepunktssele: Korrekt montering kan øge et barns chance for at overleve betydeligt ved en trafikulykke.

Bæring af Carrot 3

Bær Carrot 3 ved at løfte den udefra med begge hænder. Brug aldrig 5-punkt-selen til at bære Carrot 3 . Det kan beskadige 5-punkt-selen samt låse- og fastgørelsesmekanismerne.

Hvornår du ikke bør bruge Carrot 3

- Brug ikke Carrot 3 , hvis du ikke kan fastgøre den korrekt som beskrevet i brugervejledningen.
- Brug ikke Carrot 3 , hvis den ikke sidder solidt fast efter montering.

Vigtige ting at være opmærksom på

- Sørg for, at barnet ikke rejser sig eller står oprejst i Carrot 3 .
- Bevar roen i en nødsituation – f.eks. ved en kollision. Tryk på knappen på selelåsen, og tag tungen ud af låsen. Tag derefter barnet ud af sædet. Brug kun seleføringspunkterne, præcis som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Brug ikke andre seler eller andre typer sæder end dem, der er beskrevet i brugsanvisningen.
- Forhøj kun Carrot 3 som angivet i brugsanvisningen, da den ellers ikke beskytter barnet korrekt i en kollision.
- Regelmæssige kontroller er nødvendige, når du kører på ujævne veje, samt før og efter en køretur.
- Fastspænd Carrot 3 med bilens sikkerhedssele, også når den ikke er i brug. Ved et trafikuheld kan et ikke-fastspændt autostolssystem skade bilens passagerer.
- Af hensyn til din egen sikkerhed anbefaler vi, at Carrot 3 ikke opbevares i kabinen, men i bagagerummet, når den ikke bruges. Sørg samtidig for, at der ikke lægges tunge genstande oven på Carrot 3 .
- Parkér bilen et sikkert sted, hvis du skal foretage justeringer af sædet. Dette omfatter også justering af ryglænet på bilsædet. At håndtere eller justere Carrot 3 under kørsel udgør en betydelig – og i værste fald livsfarlig – risiko for dig og dit barn.

- Carrot 3 må ikke bruges derhjemme på gulvet eller andre uegnede steder.
- Brug ikke Carrot 3 som legetøj til børn eller som stol til voksne.
- Lad ikke Carrot 3 stå i nærheden af opvarmede materialer. 10
- Kun ledsagere må betjene produktet.
- Sørg for, at alle brugere har forstået, hvordan Carrot 3 bruges korrekt i et køretøj.
- Foretag ingen ændringer af konstruktionen på Carrot 3. Ombygning af produktet, som ikke er udtrykkeligt beskrevet i denne brugsanvisning, sker på eget ansvar. Vi hæfter ikke for skader, der opstår som følge af en forkert ombygning. Forsøg derfor f.eks. aldrig at fjerne 5-punktsselen og de sorte fastgørelsesstropper på Carrot 3 . Fjern aldrig selelåsen eller låsetungerne på 5-punktsselen eller de sorte fastgørelsesstropper. Hvis de ikke monteres korrekt igen, kan Carrot 3 i visse tilfælde ikke fungere sikkert.

Bemærk:

Hvis du har spørgsmål til brugen eller til reparationsarbejde, bedes du kontakte din forhandler.

Hældning af køretøjets sæderyglæn



A dvarse!

- Før du læner ryglænet på det bilsæde, som Carrot 3 er fastgjort til, skal du løsne og slække bilsædets seler (fig. 1).
- Stram selerne igen efter tilbagelæning (fig. 2).
- Hvis ryglænet på det bilsæde, som Carrot 3 er fastgjort til, lænes uden at løsne selebåndene, kan der opstå kvælningsfare.
- Carrot 3 er testet ved en hældning på 30° fra lodret og bør ikke transporteres i et kørende køretøj, hvis denne hældningsvinkel overskrides.

Abb. 1


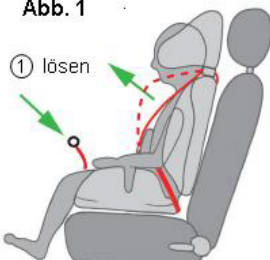


Abb. 2

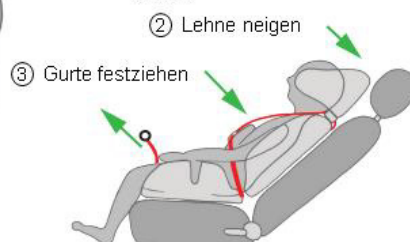

Formål/indikation

Carrot 3 er udviklet til transport af børn med funktionsnedsættelser og bl.a. følgende diagnoser i motorkøretøjer:

- infantil cerebral parese 11
- Hypotoni af ukendt årsag
- Muskeldystrofi
- meget forskellige syndromsygdomme


For vejledning om brug i fly, se ovenfor under punktet „Godkendelse“.

Der Carrot 3 giver ekstra støtte til at sidde sikkert. Den kan tilpasses individuelt og kendetegnes af sin sædskal og det integrerede pelottesystem. Systemet stabiliserer hovedkontrollen og sikrer en stabil siddestilling i bækkenområdet samt giver ekstra støtte/kontrol ved fødderne.


Anvendelsesrisici/kontraindikationer

Der er ingen kendte anvendelsesrisici/kontraindikationer.


Funktionsbeskrivelse

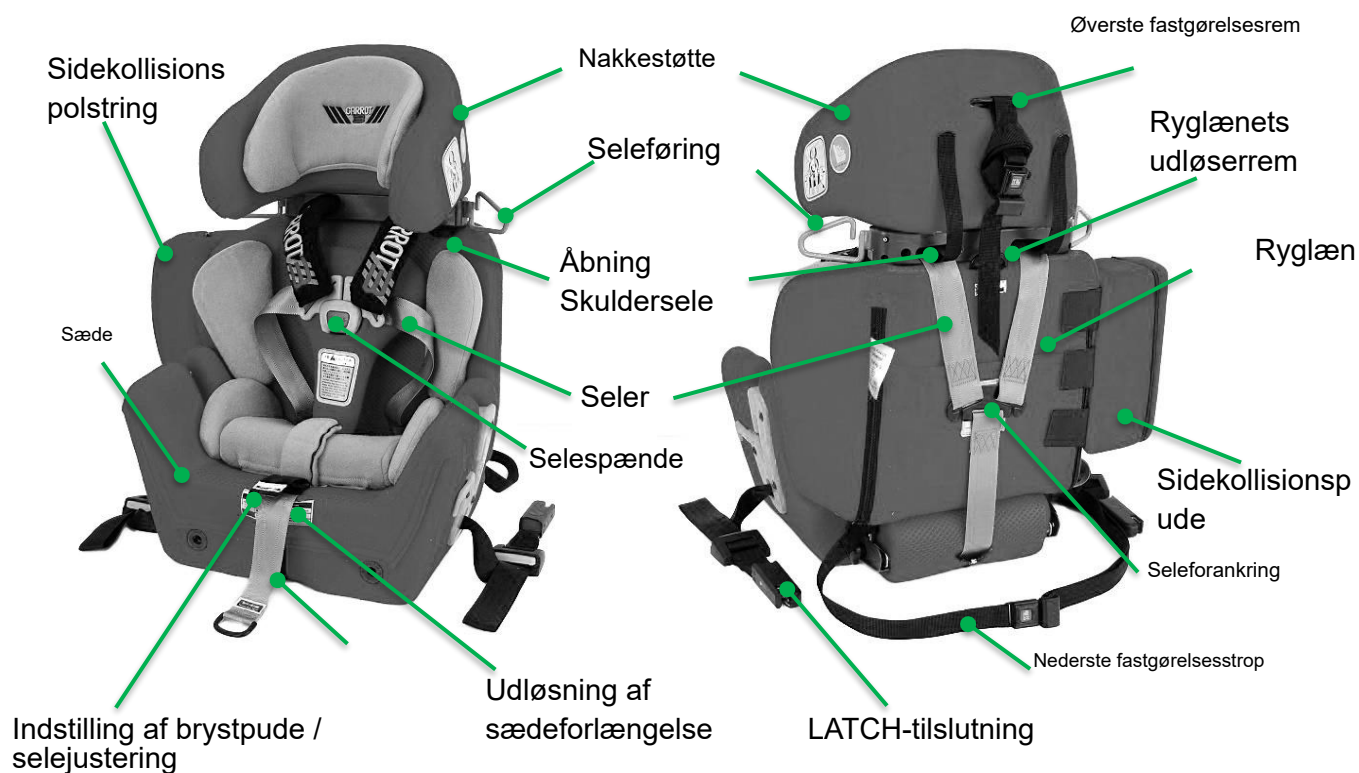


Sådan vokser Carrot 3 med barnet:

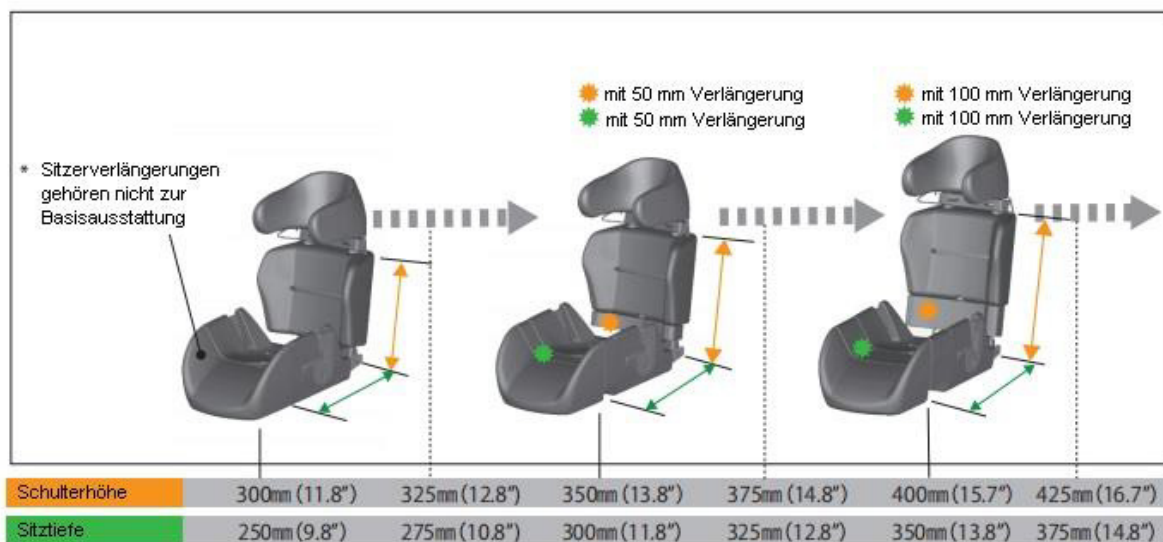

Funktionsbeskrivelse

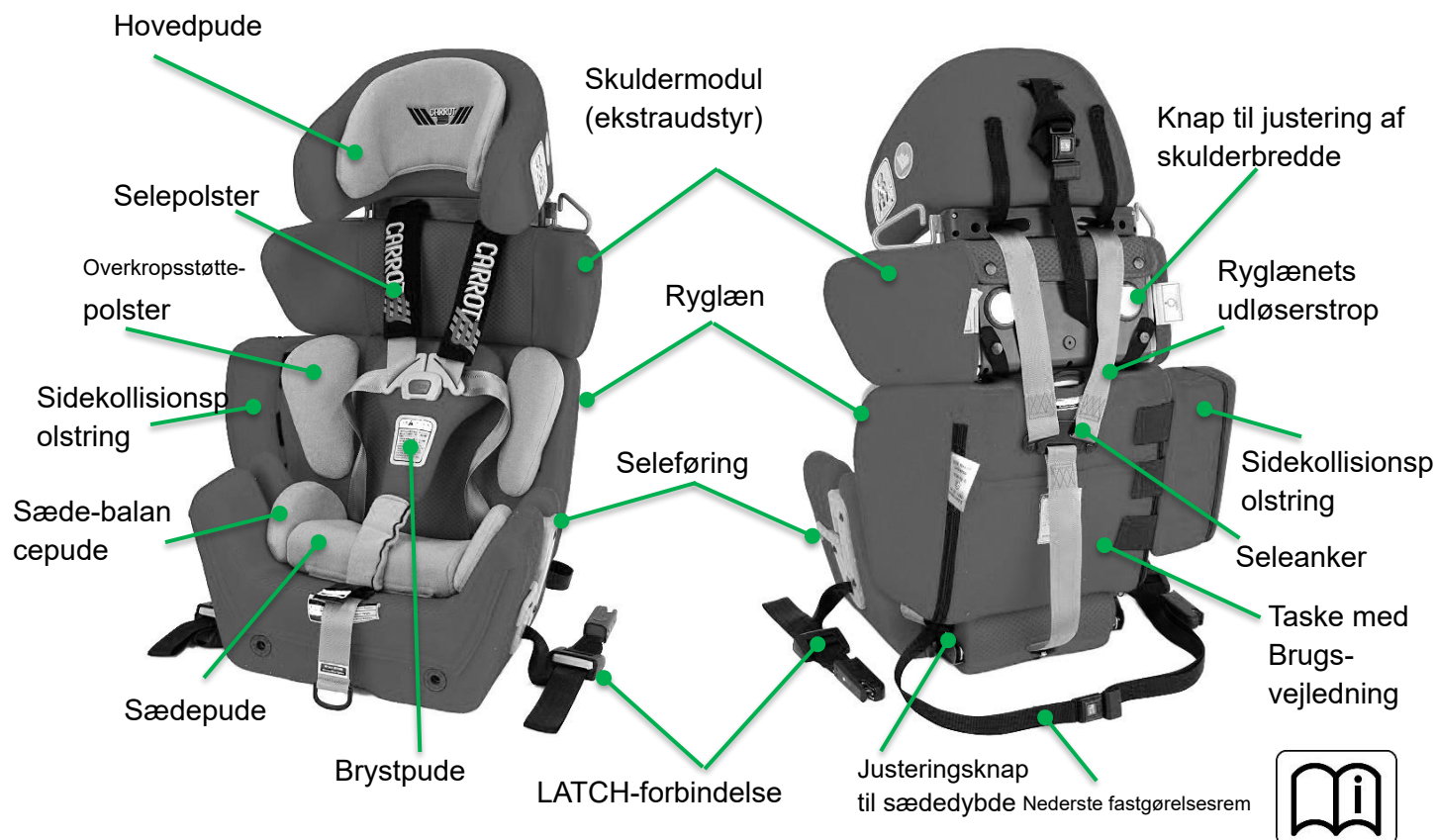

Sådan vokser Carrot 3 med barnet:

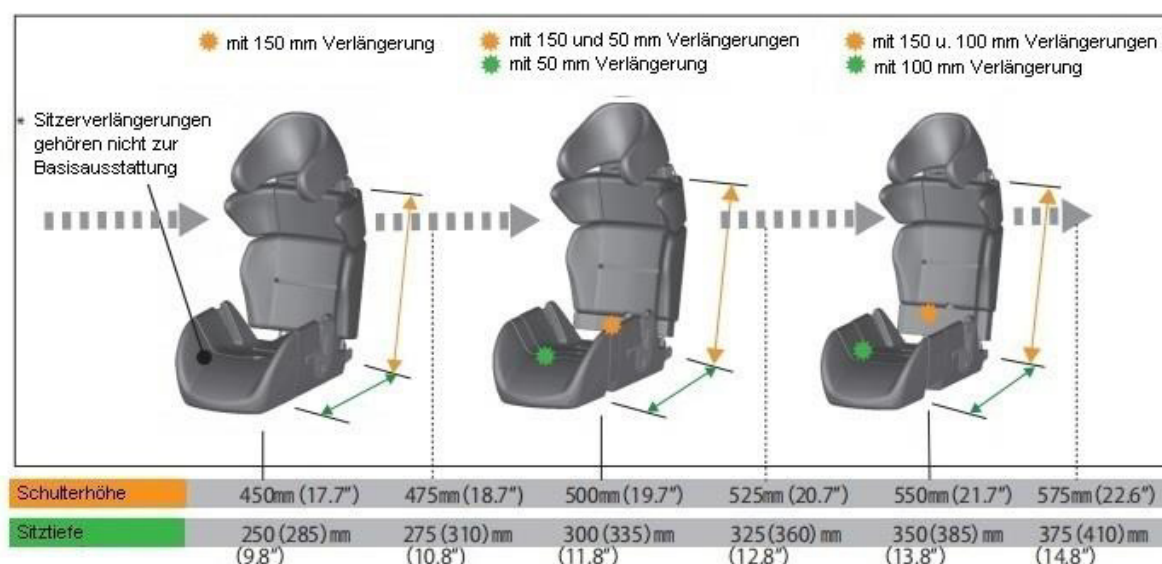

Montering i bilen

Standardmontering

Vandret fastgørelse af Carrot 3 på bilsædet

- Fastgør nakkestøtten på Carrot 3 med den øverste fastgørelsesrem til bilens nakkestøtte, som vist i fig. A. 14
- Fastgør de nederste fastgørelsesremme ved at føre dem rundt om den nederste del af bilens ryglæn, som vist i fig. A.
- Luk spænderne, og stram Carrot 3 ved at trække i begge fastgørelsesstropper samtidig. Carrot 3 skal sidde sikkert fast mod bilsædets ryglæn, som vist i figur A og B.

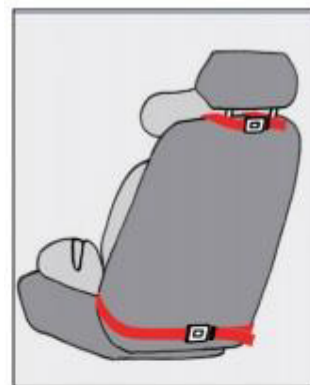


Abb. A

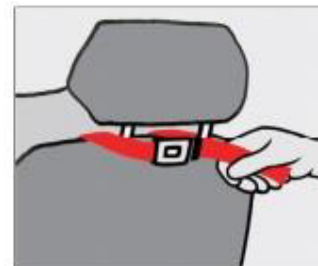


Abb. B

Vertikal fastgørelse af Carrot 3 på bilsædet

Hvis fastgørelsesstropperne er for korte ved den horisontale fastgørelse, kan de i stedet forbindes lodret med hinanden, som vist i figur C.

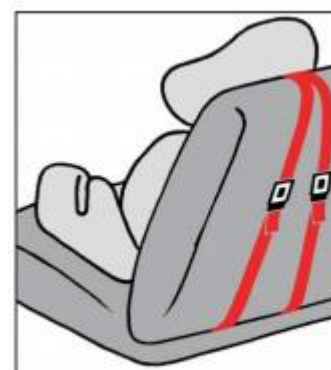


Abb. C

- Når barnet er placeret med fempunktsselen på Carrot 3 , trækker du bilens trepunktsele ud og klikker selepladen i selespændet.
- Før nu hoftedelen af trepunktsselen gennem begge seleføringer i sædeområdet (markeret med rødt), og stram den nederst så langt nede som muligt, så bækkenet holdes korrekt på plads.
- Før derefter skulderdelen af trepunktsselen på spændesiden gennem seleføringen i sædeområdet, og læg den på den anden side ind i seleføringen ved skulderområdet. 15
- Stram derefter trepunktsselen ved skulderområdet. Kontrollér samtidig, at barnets hals og ansigt ikke berøres af trepunktsselen.
- Sørg for, at bilens sikkerhedssele-lås sidder under seleføringen i sædeområdet. Kun på den måde sikres korrekt kraftoverførsel til seleføringen.
- Hvis bilens sikkerhedssele-lås ligger over seleføringen, bedes du kontakte din forhandler.

Hvis bilens sikkerhedssele er for kort, skal du bruge en anden siddeplads i bilen.

Hvis du har problemer med monteringen, bedes du kontakte din fagforhandler. Han vil kunne hjælpe dig.

Som tilbehør kan du enten bruge ISO-Base til at forbinde Carrot 3 med bilens ISOFIX-beslag, eller ISO-Turn drejeskive, som også klikkes ind i bilens ISOFIX-forankring og desuden har en drejefunktion.

LATCH-montering

Carrot 3 anbefales til brug i et køretøj med LATCH-forankringer (ISOFIX-forankring). Kontrollér, at dit køretøj er udstyret med LATCH-forankringer.

Nederste LATCH-montering:

- Tryk på og hold den første LATCH-justeringsknap nede, og træk LATCH-remmen helt ud. Gentag fremgangsmåden for den resterende LATCH-tilslutning (Abb. A).
- Placér Carrot 3 på bilsædet i kørselsretningen.
- Fastgør en LATCH-forbinder til den tilsvarende LATCH-forankring i bilen (Abb. B).
 - a. Et tydeligt klik bekræfter, at den er fastgjort.
 - b. Sørg for, at LATCH-remmen ikke er snoet.
- Fastgør på samme måde den resterende LATCH-forbindelsesdel til bilens tilsvarende LATCH-forankring.



Fig. A



Fig. B

- a. Et tydeligt klik bekræfter igen, at fastgørelsen er på plads.
- b. Sørg for, at LATCH-remmen ikke er snoet.
- Skub Carrot 3 ind på bilsædet, og stram samtidig LATCH-stropperne (fig. C).

BEMÆRK:

Hvis du ikke hører et tydeligt klik, når LATCH-forbindelsen sættes til, kan LATCH-stroppen være snoet, eller der kan sidde snavs i LATCH-forbindelsen. Ret begge dele, før du fortsætter monteringen.

Vigtigt:

Sørg for, at LATCH-stroppen ikke foldes ind i LATCH-justeringsanordningen, når den strammes.



Fig. C

Montering af den øverste fastgørelsesrem

Montering ved hjælp af fastgørelsesremmene, som er monteret på barnesædets nakkestøtte.

- Fastgør nakkestøtten til bilens nakkestøtte med nakkestøttens fastgørelsesrem (fig. D).
- Sørg for, at alle forbindelser sidder helt fast, og at barnesædet er sikkert monteret.



Fig. D

Hvis bilens sikkerhedssele er for kort, skal du bruge et andet sæde i bilen. Hvis du har problemer med monteringen, bedes du kontakte din forhandler. De kan hjælpe dig.

Som tilbehør kan du bruge ISO-Turn drejepladen til at forbinde Carrot 3 med bilens ISOFIX-system. Den klikkes også i bilens ISOFIX-beslag og har desuden en drejefunktion.

Montering i fly

De fleste flyselskaber tillader brug af en autostol, hvis den er godkendt til brug i fly og kan monteres korrekt i flysædet.

Kontakt dit flyselskab på forhånd om reglerne for sikker transport af dit barn og om pasformen (sædebredden er 18 tommer).

- FAA anbefaler, at et barn med en vægt på op til
- 18,1 kg (40 lbs) bruger en certificeret autostol med sele ved
- rejser med fly.
- Placér autostolen ved et vinduessæde for at
- undgå at blokere midtergangen.
- Hvis flyets hofteselev er for kort, så bed en kabinemedarbejder om en seleforlænger.
- Denne barnesikring er FAA-certificeret



Bemærk:

Du kan se, om din Carrot 3 er godkendt til brug i fly, ved at den har den viste påsyede mærkat.




Sikring af Carrot 3 i fly

Federal Aviation Administration (FAA) anbefaler, at dit barn under flyrejser sidder i en egnet og sikker autostol, der passer til barnets vægt og højde. Turbulens kan opstå uden eller med meget kort varsel. Ved turbulens er det sikreste sted for barnet i en korrekt monteret autostol – ikke på en voksens skød og heller ikke på flysædet kun med flyets sikkerhedssele. Med en autostol kommer barnet mest sikkert frem.

FAA's anbefaling vedrørende børns vægt: *

- ved en vægt på 9 til 18 kg (20 til 40 lbs), brug en fremadvendt autostol,
- ved mere end 18 kg anvendes flyets sikkerhedssele.

* Bemærk, at disse FAA-anbefalinger kan afvige fra anbefalingerne for brug af autostolen i bil.

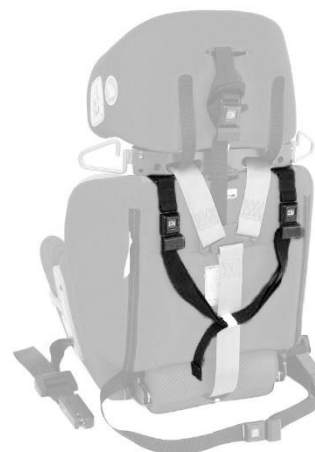

URL zum Video
Befestigung des
Carrot 3 im Flug-
zeug

Forberedelse af Carrot 3 før brug i fly

Hvis De bruger Carrot 3 i et fly, skal De anvende den tilhørende fastgørelsesrem. Remmen er lang nok til at fastgøre Carrot 3 til flysædet.

Med dette system kan du fastgøre, løsne og stramme remmen på begge sider af sædet, så Carrot 3 kan placeres på ethvert flysæde.

Monter fastgørelsesremmen før du går ombord på flyet. Se også vores instruktionsvideo (QR-kode).

Sættet med fastgørelsesrem består af tre dele: to spænder og en midterrem. Der kræves ikke værktøj til monteringen (fig. A)

- Løsn først remspændet. (Fig. B)
- Hold derefter de sorte knapper nede, og fjern nakkestøtten. (Fig. C & D)
- Sæt spænde-delene på stængerne. Der er ingen venstre eller højre side, men sørg for, at PRESS-markeringen (rød) altid vender opad. (Fig. E)
- Sæt nakkestøtten på skulderdelen igen. (Fig. F)
- Sørg for, at den sidder sikkert fast, ved at du kan høre et tydeligt klik og mærke, at den går ilås (Fig. G).
- Nu kan du fastgøre, løsne og stramme midterremmen fra begge sider. (Fig. H)



Abb. A



Abb. B



Abb. C



Abb. D



Abb. E



Abb. F



Abb. G



Abb. H

Hvis du har brug for hjælp, kontakt venligst din forhandler.

Montering af fremadvendt Carrot 3 i fly

Vigtigt: Før montering af Carrot 3 skal du sikre dig, at flysædet står helt oprejst.

- Placér Carrot 3 fremadvendt på flysædet.
- Sørg for, at bagsiden af barnestolen ligger tæt og stabilt op ad flysædets ryglæn.
- Fastgør fastgørelsesremmen rundt om bagsiden af flysædet, og stram den til.
- Sæt barnet i Carrot 3 og spænd selen på Carrot 3.
- Før derefter flyets sikkerhedssele gennem de nederste seleføringer (fig. B) og hen over barnet.
- Stram herefter flyets sikkerhedssele, og kontrollér, at spænderne på flysædets sele er lukket korrekt.
- Den sidekollisionspude kan afmonteres ved brug i fly.

Tjek igen: Prøv at bevæge Carrot 3 i alle retninger. Hvis du kan bevæge barnestolen mere end 2,5 cm (1 in.) fra side til side eller frem og tilbage, skal du stramme fastgørelsesremmen, indtil Carrot 3 sidder helt fast.

Fastgørelsesrem

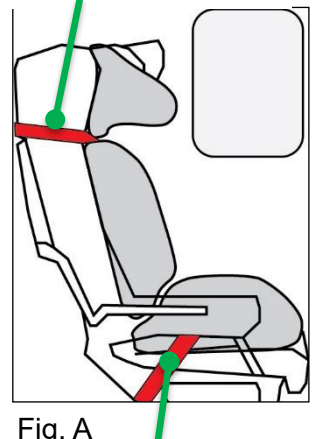


Fig. A

Sikkerhedssele
Fly

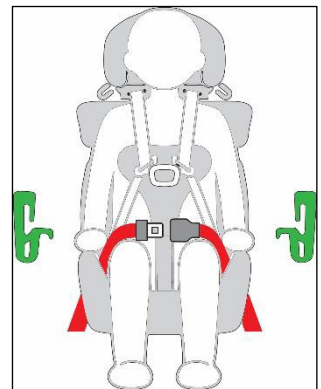


Fig. B

Funktioner

Hovedområde

Justering af nakkestøtte frem eller tilbage

Nakkestøtten kan justeres 15 mm frem eller tilbage, så den kan tilpasses individuelt til brugerens hovedform og dermed giver bedre beskyttelse (figur A)

Vigtigt: Justering af nakkestøttens position frem eller tilbage kræver specialværktøj. Kontakt om nødvendigt din forhandler. (figurer B og C)



Abb. A



Abb. B

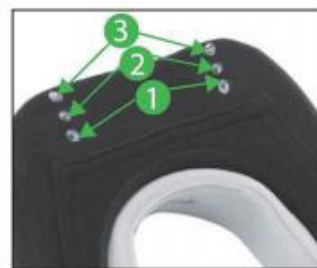


Abb. C

Justering af hovedpuden

Hovedpuden sidder fast på hovedstøtten med en velcrolukning og kan nemt flyttes til den position, der passer bedst til barnet.



Skulderområde



Justering af 5-punktssele

5-punktselen bruges til at placere dit barn korrekt i Carrot 3. Den er ikke en sikkerhedssele. Det er lovpligtigt at bruge bilens sikkerhedssele (3-punktssele) under kørsel i trafikken.

- For at stramme 5-punkt-selen skal du blot
- trække i justeringen af skulderremmene under brystpuden (A).
- For at løsne 5-punkt-selen trykker du på den røde knap, holder den nede og trækker skulderremmene fremad (B).

Bemærk:

Træk ikke i de grå selepuder på 5-punkt-selen, da de er fastgjort på ryggen. Stram eller løs kun 5-punkt-selen ved at tage fat i selve selen.

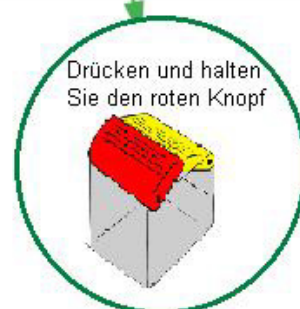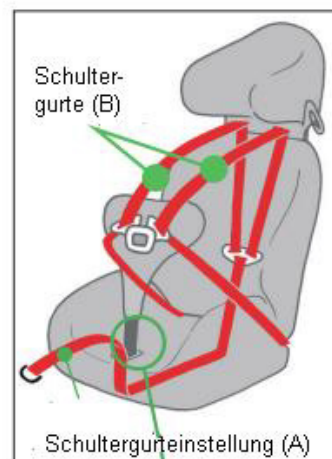

Justering af længden på 5-punkt-selen (positioneringssele)

- Drej den sorte knap på begge sider af Carrot 3 mod uret, og tag den af (fig. A).
- Adskil Carrot 3 sædet fra rygdelen.
- Træk remmen af sædestangen.
- Monter remmen igen ved hjælp af den nederste løkke.
- Inden remmen sættes på igen, foldes rem-løkken indad, så fastgørelsesområdet ikke dækkes af remmen (fig. B).
- Sæt knapperne på igen. Sørg for samling for, at røret på rygdelen ligger mellem sædestangen og den grå plastafdækning (fig. C).



Abb. A



Abb. B



Abb. C

Bemærk:

Højden på 5-punkt-selens skulderstropper ændrer sig i takt med højden på nakkestøtten. 5-punkt-selens bryststropper skal føres i barnets skulderhøjde eller højere.

Selepuder

Ved at justere, hvordan velcrobåndene fastgøres på bagsiden af nakkestøtten, kan du placere selepuderne i den ønskede position.



Skuldermodul

(Ekstraudstyr (valgfrit))

Justering af skulderbredden

- Skulderbredden kan justeres sideværts med op til 100 mm: 50 mm mod højre og 50 mm mod venstre (5 positioner/ trin á 10 mm). Det gøres med den gule knap på bagsiden af skulderstykket.
- Tryk på den gule knap, og hold den nede, mens du trækker skulderdelen, (se figur A) udad eller skubber den indad, så det passer bedst og mest sikkert til barnets krop.



Vigtigt:

Hvis dit barn er stort nok til at bruge skuldermodulet, kan det være, at du får brug for en længere 5-punktssele. Kontakt derfor din forhandler.

Montering af skulderbeskyttelsesvinger

- Tag skulderselen af selen (fig. A).
- Fjern seleføringen og komfortpuderne fra nakkestøtten (fig. B).
- Hold udløserknapperne på nakkestøtten inde, og tag nakkestøtten af (fig. C & D).
- Fjern to (2) skruer i højre og venstre side (fig. E).
- Før nakkestøttens stænger ind i skulderbeskyttelsesvingen, og tryk dem sammen (fig. F).
- Justér hullerne i stængerne, sæt de to (2) skruer i, og spænd dem godt (fig. G).
- Monter enheden med nakkestøtte/skulderbeskyttelsesvinger i ryglænsenheden. Træk skulderselen og komfortpuderne igennem igen, og fastgør dem igen på selen (fig. H).



Abb. A



Abb. B

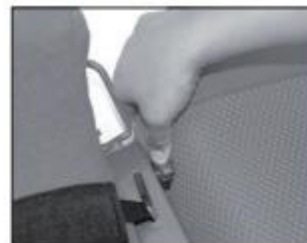


Abb. C



Abb. D

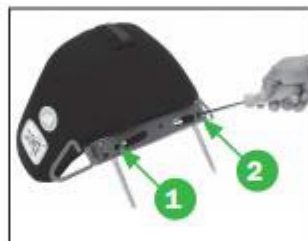


Abb. E



Abb. F



Abb. G



Abb. H



URL zum Video
Installation der Schulter-
schutzflügel


Kontakt din forhandler, hvis du har brug for hjælp til installationen.

Brystområde



Advarsel: Den øverste kant af brystpuden skal sidde lavere end området ved barnets hals. Hvis brystpuden er monteret for højt, er der risiko for, at den kommer for tæt på halsen.

Hvis brystpuden ikke passer: Ud over standardbrystpuden findes der en version, der er 55 mm smallere og 30 mm kortere, til meget små børn.

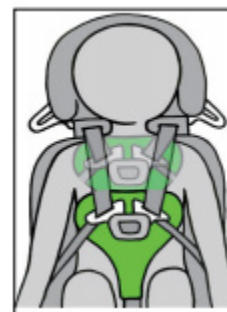

Justering af brystpuden

Tryk på den gule knap foran på sædefluden, og hold den nede for at indstille brystpuden til den ønskede højde (fig. A).

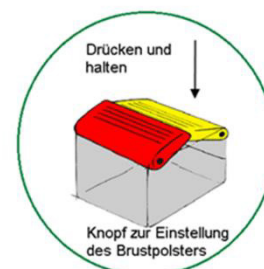


Abb. A

Åbning og lukning af 5-punkt-selen

- Hold selespændet med den ene hånd. Brug den anden hånd til at føre den første seletunge ind i selespændet (fig. B).
- Skub tungen helt i, og lyt efter det tydelige klik, når tungerne låser fast. Først da er selens sikkerhed sikret. 24
- For at åbne spændet skal du tage fat i selespændet og trykke på den røde knap. Begge tunger frigøres, som vist i figur C. (fig. C)



Abb. B



Abb. C


Forsøg aldrig at fjerne 5-punkt-selen og de sorte fastgørelsesstropper på autostolen.

Ryglæn

VIGTIGT:

Højden på 5-punkt-selens skulderstropper ændrer sig i takt med ryglænets højde.

5-punkt-selens skulderstropper skal føres i barnets skulderhøjde eller højere, dvs. de må ikke komme ud af ryglænet under skulderhøjde.

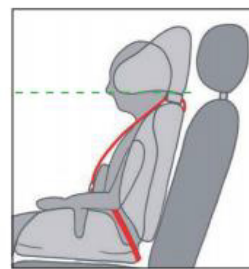

Indstilling af ryglænets højde

- For at låse ryglænet op trækkes i ringen midt på ryglænets bagside.
- Mens du trækker i ringen, løftes ryglænet op eller trykkes ned – alt efter behov.



Udfyldningspuder (50 mm/100 mm)

(Ekstraudstyr)

Udfyldningspuderne (50 mm/100 mm) udfylder den åbning, der opstår ved ryggen, når ryglænet trækkes ud. (Fig. A).

Montering af udfyldningspuder

- Træk i D-ringen ved ryglænets øverste kant,
- Løft ryglænet, indtil metalstængerne er frilagt,
- Skub udfyldningspuden med plastbeslag ind på de nu synlige metalstænger,
- Tryk ryglænet ned ved at trække i D-ringen, indtil åbningen lukker sig igen.




Abb. A

Sidekollisionspude

Den sidekollisionspude giver en særligt effektiv beskyttelse ved sidekollision, da den optager kræfterne bedst muligt – især omkring hoved- og skulderområdet. Den fastgøres på ydersiden af ryglænet på dørsiden med velcrolukninger og kan derfor nemt tages af.



Ved brug i et fly kan sidekollisionspolstringen tages af.

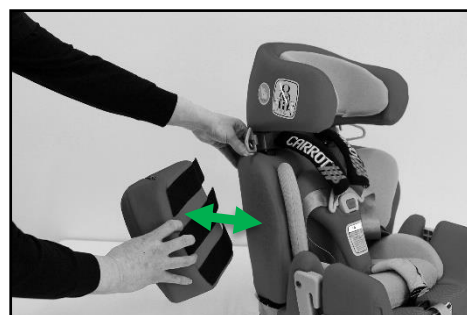


Når du monterer denne polstring, skal den fastgøres med lynlåsen vendt bagud, som vist på billedet.



Sædeflade

Ideelt set bør sædefladen være en smule kortere end afstanden fra bækkenet til knæhasen. Sædefladens forkant bør højst nå frem til knæhasen, når barnets bækken er placeret så langt tilbage som muligt.

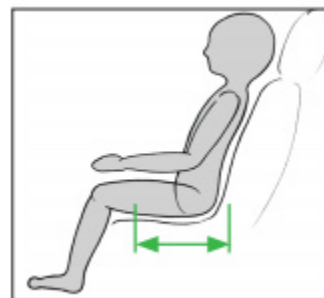

Justering af sædedybde

For at låse op trækkes ringen på forsiden af sædet. Samtidig trækkes sædeforlængeren frem eller skubbes tilbage.



Sædeforlængere (50 mm / 100 mm)

(Valgfrit tilbehør)

Sædeforlængere på 50 eller 100 mm bruges til at lukke den afstand, der kan opstå, når man justerer en af følgende tre dele: benstøttepude, 50 mm indstiksforlænger, fodplade.



Benstøttepulster


(Valgfrit tilbehør)

Her kan benene ligge strakt, og også underbenene hviler på polsteret.




Indsættelig sædeforlænger 50 mm

Bruges ved normal siddestilling til at øge sædedybden.

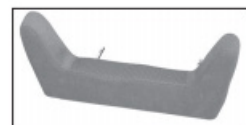

Justering af sædedybde

Sædedybden kan derudover justeres op til 35 mm ved at montere ryggen længere fremme eller længere tilbage. Spørg gerne din forhandler til råds.

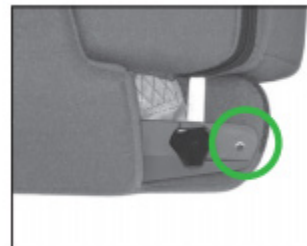

Fodstøtter

(Valgfrit tilbehør)

Fodstøtterne fås i tre størrelser.



Underbenslængde

kort: 25-31 cm

mellem: 30-41 cm

lang: 35-46 cm



De er hver især udstyret med velcrobånd til at fastgøre underben og fødder.

- Skub de to metalstænger ind i de runde åbninger på sædet.
- Åbn låsen ved at holde D-ringen i skridtområdet trukket.
- Skub fodstøtterne helt ind til sædet.

Fastgør barnets fødder:

- Åbn fastgørelsesremmen, læg den over underbenene og luk velcroen.
- Åbn fastgørelsesremmene på fodpladerne.
- Placér fødderne på fodpladerne i den ønskede position, læg fastgørelsesremmene over vristen og luk velcroen.

Når skruerne under røret er løsnet, kan højden på fodstøtten justeres. Skruerne skal derefter spændes fast igen.

Terapibord/underarmsstøttepude

(Valgfrit tilbehør)

Terapibordet bruges til at give barnets overekstremiteter et højere niveau af sikkerhed.



Trekantkile/underlagskile

(Valgfrit tilbehør)

Trekantkilen bruges til at hæve sædets forkant og dermed give barnet en sikker og mere stabil siddeposition.



Anti-udstigningsvest

(Valgfrit tilbehør)

Åndbar og reducerer pladsen under armhulen, så barnets arme ikke kan smutte ud mellem skulderstropperne.

- Tag remmen af fordelerpladen.
- Træk remmen ud af remføringen og skulderpuden.
- Placér vesten med remstropperne opad (foran).
- Når vesten tages på, vender remstropperne ind mod kroppen.
- Før hver rem gennem hver side af vestens remstropper.
- Før remmen gennem skulderpuderne.
- Før derefter remmen gennem de sorte ringe øverst på vesten.
- Sørg for, at remmene ikke er snoet før ringene.
- Før remmen gennem remslidserne.
- Fastgør remmen på remåget.



URL zum Video
Anti-Escape-
Weste

Polstring (basisudstyr)

Følgende polstring medfølger som basisudstyr. Polstring og puder fastgøres nemt de relevante steder på sædet med velcro:

Hovedpude

Med denne pude kan hovedets position justeres optimalt.

Overkropsstøttepuder

Disse puder kan forbedre balancen i overkroppen og kan derfor bruges i overkropsområdet.

Sædebalancepude


Disse puder kan bruges til at forbedre balancen i sædeområdet.

Sædepude

Med denne pude kan siddestillingen gøres mere komfortabel, og den kan også forhindre, at barnets bækken glider fremad. Den kan desuden bruges til at reducere sædedybden, hvis den placeres bagpå (i bækkenhøjde) og fastgøres.

Sidekollisionspude

Den sidekollisionspude giver en særligt god beskyttelse ved sammenstød.

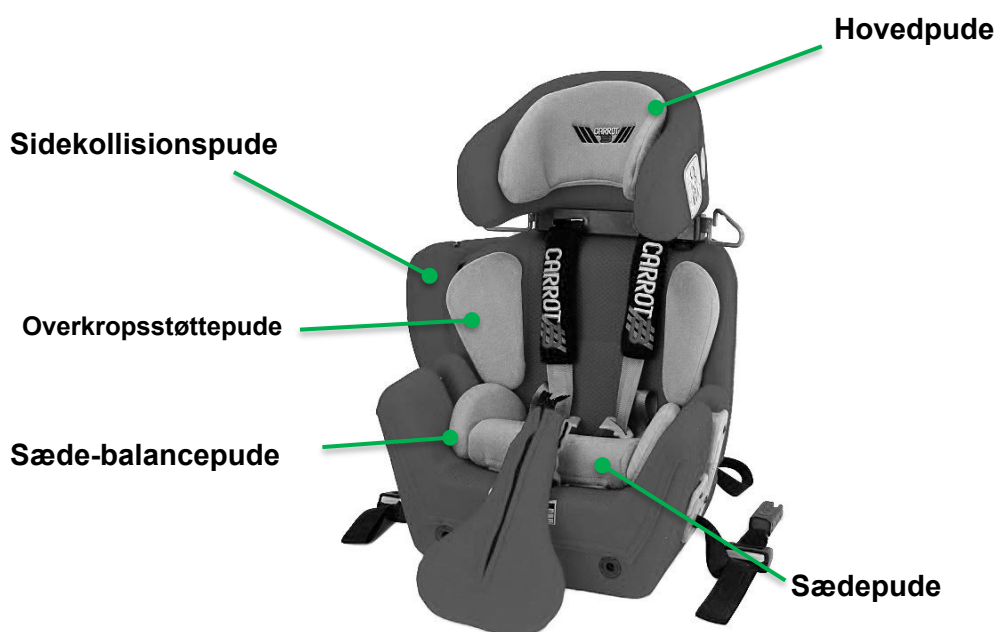

Yderligere valgfrit tilbehør

Anti-adduktions-/knæskillepude

Vandtæt og åndbar – hjælper med at holde snavs og fugt ude og bevarer komforten

- Løsn remmen.
- Åbn velcrolukningen, og vikl den rundt om brystremmen for at fastgøre den.
- Anti-adduktions-/knæskillepuden kan monteres enten forlæns eller baglæns.



Ansicht rückwärtige Anbringung



URL zum Video
Anti-Adduktions-/
Knietrainer-Pad

Aftagelig inkontinensopsamler

Vandtæt og åndbar – hjælper med at holde snavs og fugt ude og bevarer komforten

- Løsn stroppen, og læg den til side.
- Træk brystpuderne foran sædet ned.
- Placer indlægget med sidekanterne opad.
- Sørg for, at hvert hjørne sidder godt til.
- Skub indlæggets sidekanter ind mellem ryglænet og sædet.
- Rejs brystpuderne op, og fastgør kanterne rundt om dem.
- Før forkanten af indlægget og sædet sammen.
- Fastgør derefter de forreste velcrostropper til sædet.
- Fastgør derefter de bagerste velcrostropper til ryglænet.



URL zum Video
Abnehmbarer
Inkontinenz-
empfänger

Transportrem

For nemmere transport af autostolen Carrot 3.

- Skub løkken ind på den røde metalbælteføring ved skulderen.
- Løsn bæltespændet på remmen.
- Hægt remmen gennem den røde hofteføring ved sædefladen, og luk derefter spændet igen.
- Stram remmen efter genmontering, så sæde og ryg bringes tæt sammen.
- Opbevar altid transportremmen i baglommen sammen med Carrot-3-brugervejledningen, når den ikke er i brug.



URL til videoen:
Transportrem til
nemmere at bære

Kropsføringspelotter

I specialtilpasning kan der efter behov monteres kropsstøttepelotter, som kan justeres i højden (23-29 cm) og i bredden (brystbredde 16-24 cm), for at give ekstra sidestøtte. Dette udføres fra fabrikken.

Abduktionskile

I specialtilpasning kan der indbygges en abduktionskile. Dette udføres fra fabrikken.

Kropsstøttepolster

Efter mål

Lammeuld til brystskjoldet

fastgøres med velcro på indersiden

Skulderremme til fempunktssele med klikspænde,

forlænget udgave

Topunkts-hoftebælte som ekstra sele

Sikkerhedssele-spænde

Til børn, der åbner selen under kørslen. Nødvendigt tryk for at åbne selen ca. 8 kg (i stedet for 4,5 kg)

Dæksel til selelås

Et dæksel til selelåsen til børn, som under kørsel kan åbne både den standardselelås og også selelåsen, der kræver et tryk på 8 kg, må kun anvendes med lægeerklæring. I så fald skal den tilhørende selekniv til nødsituationer medbringes.

Inkontinens-overtræk

- Inkontinens-overtræk til sæde og ryg, i Dartex, med velcro
- Inkontinens-overtræk til skuldermodulet, i Dartex, med velcro
- Inkontinens-overtræk til brystpuden, i Dartex
- Inkontinens-overtræk til sædeforlængelserne, i Dartex, med velcro
- Inkontinens-overtræk til fyldpuderne, i Dartex, med velcro
- Inkontinens-overtræk til nakkestøtten, i Dartex, med velcro
- Inkontinens-overtræk til benstøttepuden, i Dartex, med velcro
- Flere moduler til inkontinens-overtræk fås på forespørgsel

Sikring af dit barn

Når Carrot 3 er monteret i dit køretøj, og alle justeringer er foretaget, skal du følge disse anvisninger for at sikre dit barns sikkerhed:

- Løsn 5-punkt-selen ved at trykke på den gule knap foran på sædet, og træk skulderstropperne frem. (Fig. A)
- Åbn selelåsen ved at trykke på knappen i midten og lade de to låsetunger glide udad. (Fig. B)
- Placer selerne til venstre og højre langs siden af Carrot 3. (Fig. C)
- Sæt barnet i sædet. (Fig. D)
- Før 5-punkt-selens stropper hen over barnet, og luk selelåsen. Du kan høre, at forbindelsen er korrekt, når det klikker, idet hver af de to låsetunger går i indgreb. (Fig. E)
- Træk forsigtigt i hofteselen, som skal ligge lavt og tæt på barnet. (Fig. F)
- Træk langsomt i justeringsremmen fremad, så 5-punkt-selen strammes omkring barnet. (Fig. F)
- Sørg for, at stropperne (5-punkt-seler) ikke er snoede, så barnet holdes sikkert.
- Når barnet er placeret og fastspændt med fempunkt-selen på Carrot 3, trækkes bilens trepunkt-sele ud, og låsetungen sættes i selelåsen. Også her kan du høre, at forbindelsen er korrekt, når det klikker, idet bilens trepunkt-sele går i indgreb i bilens lås.
- Før nu hoftedelen af trepunkt-selen gennem begge seleføringer ved sædeområdet (markeret med rødt), og stram den nederst så langt nede som muligt, så bækkenet holdes korrekt. Før derefter skulderdelen af trepunkt-selen på låsesiden gennem seleføringen ved sædeområdet, og læg den på den anden side ind i seleføringen ved skulderområdet. Stram herefter selen ved skulderområdet. (Fig. G)
- Når Carrot 3 er fastgjort på sædet med trepunkt-selen, skal du sikre dig, at selen ikke generer barnets hals eller ansigt. Sørg for, at bilens selelås ligger under seleføringen ved sædeområdet. Kun på den måde sikres korrekt kraftoverførsel til seleføringen.



Abb. A



Abb. B



Abb. C



Abb. D



Abb. E



Abb. F



Abb. G

Hvis bilens selelås sidder over selerføringen på Carrot 3, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har placeret Carrot 3 og barnet korrekt, skal du kontakte din forhandler.




ADVARSEL

Det er dit ansvar at bruge bilens 3-punktssele.

5-punkt-selen på Carrot 3 er ikke en sikkerhedsgodkendt fastholdelsesanordning, men en positioneringshjælp til dit barn. Det er lovpligtigt at bruge bilens 3-punkt-sele i trafikken.

Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader – i værste fald dødelige. Selerføringen til 3-punkt-selen fremgår af grafikken nedenfor eller på selve Carrot 3 .

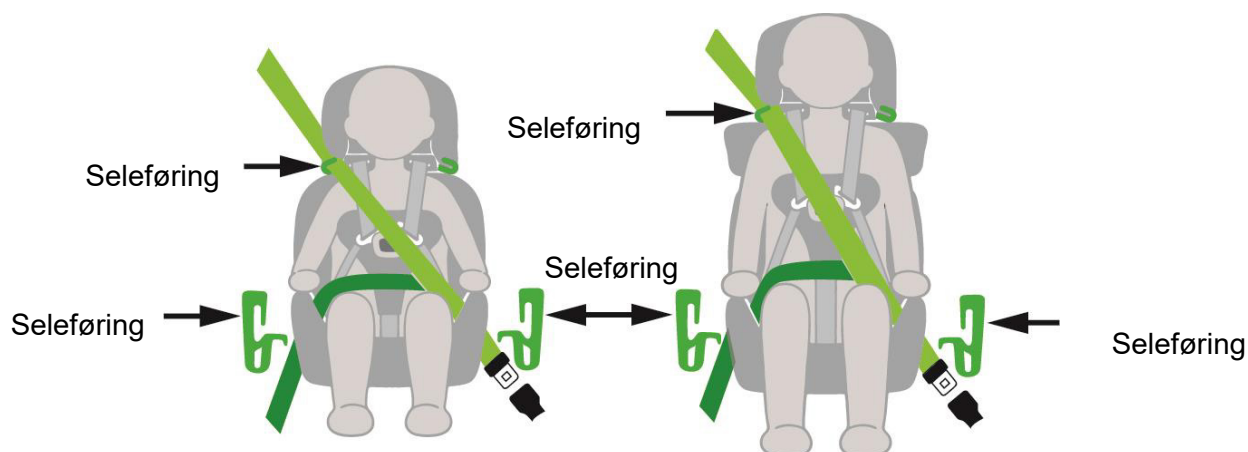

Pleje og vedligeholdelse

Aftagning af betrækket

Forsøg venligst ikke at afmontere eller udskifte betrækket, 5-punkt-selen eller dele heraf. Kontakt din forhandler, hvis betræk eller sele skal tages af eller fornyes. Ved forkert samling kan sædet ikke yde den nødvendige sikkerhed.

Rengøring og desinfektion Rengøring af betræk og polstring

- Til rengøring af betrækket bruges en svamp, vand på højst 30 °C og en mild sæbe. Tør efter med et håndklæde.
- De grå polstringer kan vaskes i hånden i koldt vand med mild sæbe. 35
- Læg dem fladt ned i vandet for at undgå, at de krymper.
- Brug ikke vaskemaskine, tørretumbler eller strygejern.
- Renlighed er vigtig, men vask kan skade stoffet.
- Hvis betrækket er beskadiget, bør det udskiftes. Betræk bør udskiftes med jævne mellemrum.
- Hvis kropsvæsker er trængt ind i betrækket, desinficér området grundigt med et almindeligt husholdningsdesinfektionsmiddel (f.eks. Sagrotan eller tilsvarende).

Vedligeholdelse

Foretag venligst en daglig visuel kontrol, og gennemgå regelmæssigt produktet for revner, brud, manglende dele og funktionsfejl. Kontakt venligst straks den forhandlende faghandel, hvis der opstår en defekt eller funktionsfejl.

Brug kun producentens originalt tilbehør og originale reservedele, da brug af andre dele kan kompromittere brugerens sikkerhed og medføre, at garantien bortfalder. Ved bestilling af reservedele bedes De kontakte den forhandlende faghandel og oplyse sædeenhedens serienummer. Nødvendige reservedele og tilbehør må kun monteres af uddannet personale.

Produktlevetid og service

Konstruktionen og fremstillingsmetoden for hovedrammen i barnesædet Carrot 3 giver en produktlevetid på 10 år fra produktionsdatoen. For at sikre brugerens sikkerhed på lang sigt og opretholde den lovpligtige garanti for hele sædet med de mange tilbehørsdele, der kan tilpasses, kræves service hos faghandel mindst én gang om året. Især dele som polstring og betræk, selespændet på brystpolstringen og andre dele, der udsættes for snavs og trykmærker, skal ved beskadigelse udskiftes i overensstemmelse hermed. Udført service skal dokumenteres fuldt ud i den vedlagte serviceplan.

Med disse regelmæssige, fagligt udførte eftersyn kan sædets brugstid forlænges ud over den normale produktlevetid, forudsat at der ikke konstateres sikkerhedsrelevante fejl. Det forudsætter en fuldstændig servicehistorik, der dokumenterer korrekt vedligeholdelse.

Vigtigt: Uden dokumenteret, regelmæssig vedligeholdelse må sædet ikke anvendes efter 10 år fra fremstillingsdatoen – også selv om der ikke er synlige skader.

Med hensyn til den angivne produktlevetid henviser vi endnu en gang til reglerne på side 8 i denne brugsanvisning om genanvendelse efter en ulykke og/eller efter første ibrugtagning.

Vær desuden opmærksom på oplysningerne om fremstillingsdato på sædets typeskilt. Vores produktmærkning sidder på bagsiden af autosikkerhedssædet Carrot 3 under betrækket i højre side.

Vedligeholdelseskrav

Kontrollér venligst din autostol for:

- Skader på stel, monterede dele og tilbehør (f.eks. revner, brud, korrosion, bøjede eller manglende dele)
- Skader på polstring og betræk
- Skader på selerne (f.eks. klemmebeslag, spænder, syninger)
- At alle samlinger er faste (f.eks. løse eller manglende skruer)
- At alle indstillinger fungerer (f.eks. skruer, udløsergreb, ryglæn, nakkestøtte, sidestøtter, fodstøtte, føringer ved benene)
- At sikkerhedselementerne fungerer (f.eks. ISOFIX-beslag)
- Tilstand af selelåsen: Snavs fra mad eller drikke kan påvirke funktionen. Hvis det karakteristiske „klik“ ikke længere kan høres, skal selelåsen udskiftes.
- At typeskiltet er læseligt

Tip: Kontakt straks din forhandler, hvis du opdager fejl eller mangler.

Vedligeholdelsesplan

Producentens vedligeholdelseskrav er udført:


Dato	Faghandel	Navn	Underskrift



Bemærk: Konstaterede mangler eller skader skal udbedres af faghandlen eller producenten, før sædet anvendes videre.

Tekniske data

Vægt	
Produktvægt:	fra ca. 8 kg (Vægten kan ændre sig ved tilvalg af ekstraudstyr)
Brugervægt:	10–49 kg
Brugerhøjde:	op til 160 cm
Mål	
Samlet bredde med sidekollisionspolstring:	fra 490 mm
Samlet bredde uden sidekollisionspolstring:	fra 420 mm
Samlet bredde med skuldermodul	460 – 560 mm
Samlet højde:	fra 550 mm
Samlet dybde:	fra 520 mm
Indvendig sædedybde:	250 mm eller 285 mm
Indvendig sædebredde:	260 mm
Sædevinkel:	åben
Forlængeligt ryglæn:	520-ca. 620 mm (med skuldermodul 670-770 mm)
Materiale	
Polstring:	PU-skum
Betræk:	lamineret trikotstof

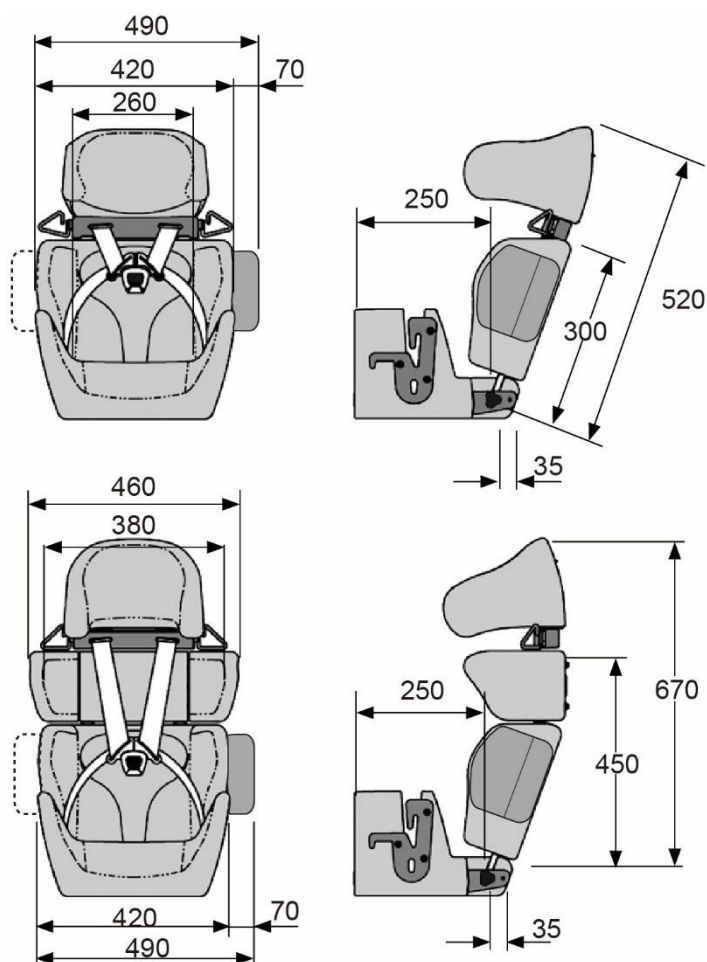

Garanti

Garantiperiode

Garantien for dette produkt gælder i 24 måneder fra købsdatoen. Gem venligst salgskvitteringen med dato.

For at gøre brug af garantien bedes du kontakte din forhandler, som vil iværksætte de nødvendige næste skridt for dig.

Begrænsninger i garantien

Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes forsømmelse eller forkert håndtering, herunder hvis denne brugsanvisning ikke er blevet fulgt.

Brug af betræk, der ikke hører til Carrot 3, samt indlæg, legetøj og tilbehør er ikke omfattet. Brug heraf kan medføre, at Carrot 3 ikke lever op til sikkerhedskravene i ECE-regel nr. 16, eller at den ved en ulykke ikke opfører sig som konstruktivt tilsigtet. Dette vil automatisk medføre bortfald af garantien.

Formular til garantikrav

Produktets modelnummer:	Carrot 3
Efternavn, fornavn:	
Vejnavn og husnummer:	
By:	
Postnummer:	
Telefonnummer:	
E-mail:	
Købsdato:	
Forhandler:	

Lægeerklæring

Lægeerklæring

Erklæring i henhold til den tredje bekendtgørelse* om undtagelser fra færdselsretlige bestemmelser af 05.06.1990 (BGBl. I s. 999)

Efternavn: _____ Fornavn: _____ født den: _____

Vej: _____ Bopæl _____

på grund af det foreliggende sygdomsbillede og/eller den eksisterende funktionsnedsættelse ikke kan transporteres i en typegodkendt fastholdelsesanordning i henhold til § 22a, stk. 1, nr. 27, i køretøjsregistreringsbekendtgørelsen (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung). Ved transport i motorkøretøjer er det nødvendigt med et biltransport-sæde udstyret og tilpasset funktionsnedsættelsen/sygdommen.

Dato _____

Lægens stempel og underskrift _____

Tredje forordning om undtagelser fra færdselsretlige bestemmelser af 5. juni 1990 (BGBl. I s. 999), ændret ved artikel 1 i forordningen af 22. december 1992 (BGBl. I s. 2480).

Indledende bestemmelse

I medfør af § 6, stk. 1, nr. 3, litra b, sammenholdt med stk. 3, i færdselsloven i den konsoliderede udgave offentliggjort i Bundesgesetzblatt del III, systematiknummer 9231-1, nr. 3 senest ændret ved lov af 6. april 1980 (BGBl. I s. 413), stk. 3 indsat ved § 70, stk. 1, nr. 3, i lov af 15. marts 1974 (BGBl. I s. 721) og ændret i henhold til artikel 22, nr. 3, i forordning af 26. november 1986 (BGBl. I s. 2089), fastsætter forbundsministeren for transport efter høring af de kompetente øverste delstatsmyndigheder:

§ 1

Som fravigelse af § 22a, stk. 1, nr. 27, i køretøjsregistreringsbekendtgørelsen (StVZO) behøver særlige fastholdelsesanordninger til børn med handicap i motorkøretøjer ikke at være udført i en officielt typegodkendt udformning, hvis

1. konstruktionen svarer til det aktuelle tekniske niveau,
2. fastholdelsesanordningen er vedlagt en monterings- og brugsanvisning, hvor de motorkøretøjer og køretøjstyper er angivet, som den må anvendes til.

§ 2

Som fravigelse af § 21, stk. 1a, i færdselsreglerne (StVO) må børn med handicap medtages i motorkøretøjer, når der anvendes en særlig fastholdelsesanordning som nævnt i § 1, og når det i en lægeerklæring udstedt i det pågældende barns navn bekræftes, at der i stedet for en typegodkendt fastholdelsesanordning efter § 22a, stk. 1, nr. 27, i køretøjsregistreringsbekendtgørelsen (StVZO) kun kan anvendes en særlig fastholdelsesanordning. Lægeerklæringen må ikke være mere end 4 år gammel. Den skal medbringes og på forlangende udleveres til kontrol til de kompetente personer.

§ 3

Denne bekendtgørelse gælder i medfør af § 14 i den Tredje Overgangslov i forbindelse med artikel 3 i loven om ændring af færdselsloven af 28. december 1982 (BGBl. I s. 2090) også i delstaten Berlin.

§ 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen.

Distributør

Birdhouse

Peder Skrams Vej 1

5220 Odense SØ

Danmark

Tlf. 60139399

support@birdhouse.dk

birdhouse.dk