



CityCaddy brugsanvisning

LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT INDEN
BRUG, OG GEM DEN TIL SENERE BRUG





Kære bruger,

Tak, fordi du har valgt CityCaddy. Din faste følgesvend i hverdagen – som indkøbsvogn, trolley og ganghjælp. Også på rejser støtter den en god kropsholdning og bidrager til en bedre livskvalitet.

For at du får mest muligt ud af dine gåture med CityCaddy, anbefaler vi, at du læser brugsanvisningen grundigt igennem, før du tager den i brug.

For at lære CityCaddy at kende anbefales det, at du øver dig i at bruge den i et velkendt og risikofrit miljø.

CityCaddy – Teknisk beskrivelse

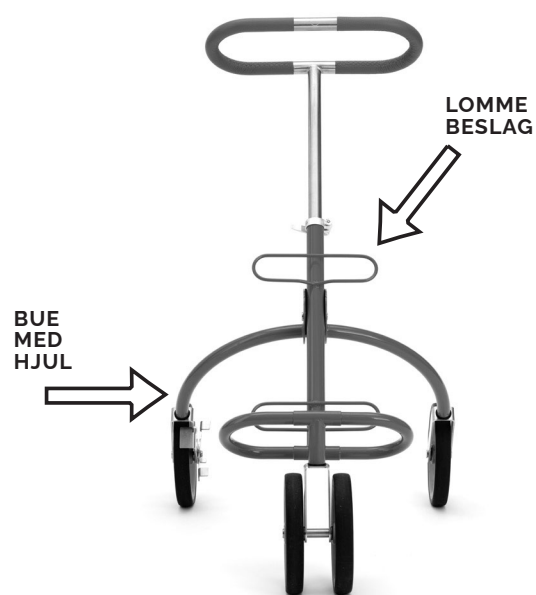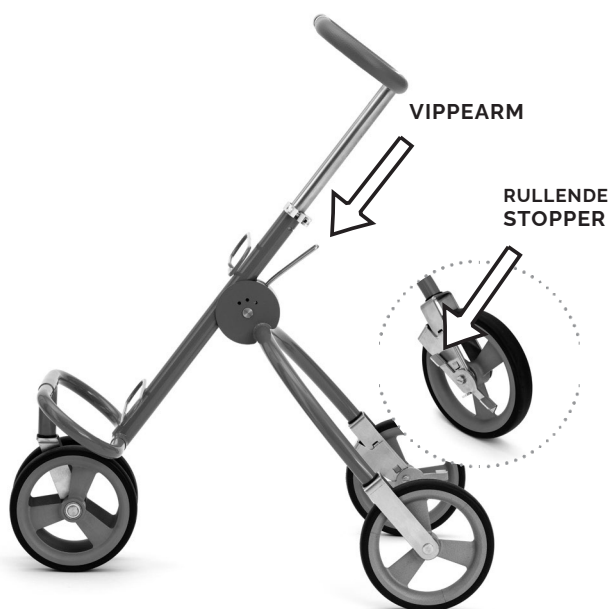

Ibrugtagning



1. Tag CityCaddy'en ud af kassen ved at holde i midterstangen..



2. Hold CityCaddy'en med begge hænder foran kroppen, ...




3. så du kan nå vippeløfteren med den ene hånd.

2. KLAP OP OG SÆT I STOPPOSITION




1Tryk kort én gang på vippearmen, så bøjlen med baghjulene flyttes væk fra midterstangen og over i gå- position.

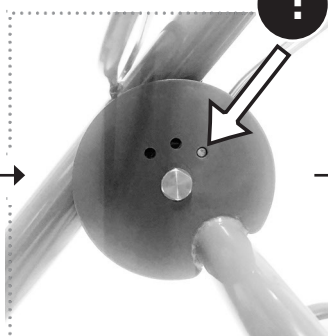


2Se, hvordan du genkender den korrekte position til at skubbe fremad.



3Din CityCaddy er nu klar til brug.

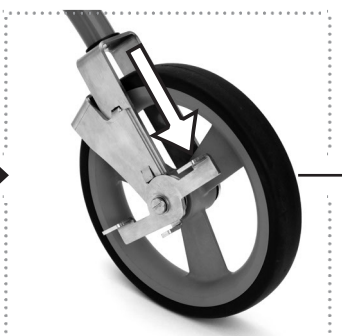


4For at forhindre, at CityCaddy'en triller væk, tryk på rullestopperen med foden ...

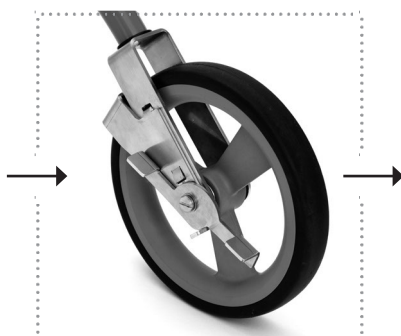


5. til bremseposition.


3. JUSTÉR HÅNDTAGETS HØJDE

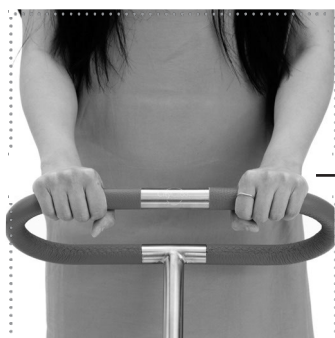


1 For at justere styrets højde, så det passer til din komfort ...

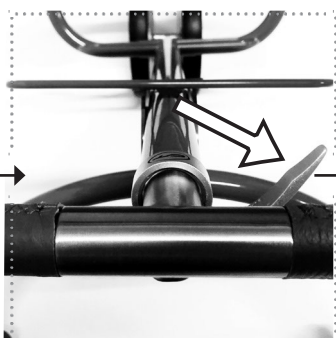


2 Løs venligst quick release-låsen ...

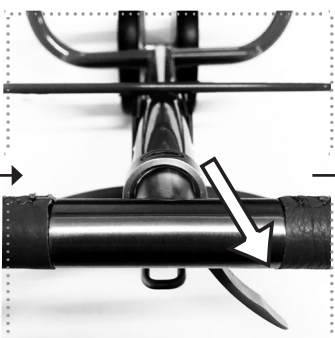


3 Ved at føre den vandret mod højre.

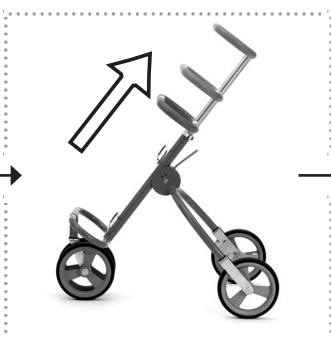

4 Træk styret op, indtil det er cirka én håndsbredde under navlen.

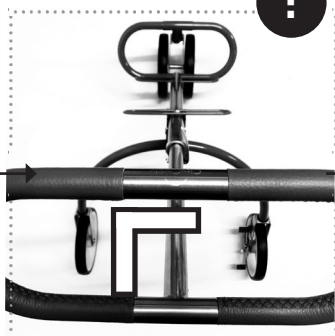

5 Justér styret præcist i en ret vinkel på hjulene.

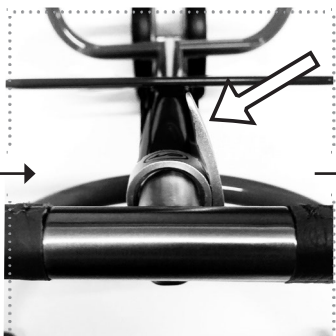

6 Lås quick release ved at trykke den fast ned.




KONTROLLÉR, OM QUICK RELEASE SIDDER STRAMT NOK, VED AT LÆNE DIG FAST IND I STYRET.

Den ideelle højde på styret er, når det er cirka en håndsbredde under din navle


Fortsettelse af klargøringen

4. MONTER TASKEN

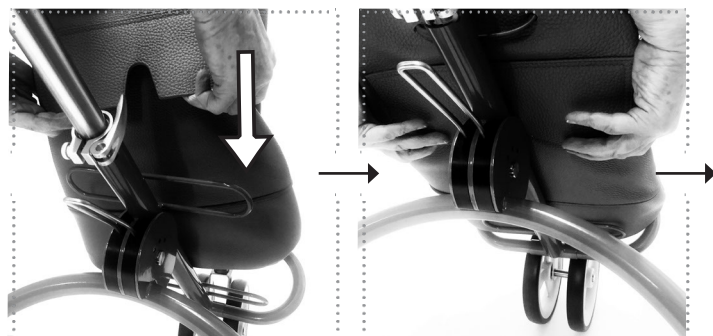

1. Fastgør nu din CityCaddy-taske ved at bruge bagklappen...
2. og før den hen over taskens håndtag på CityCaddy.

5. FRIGØR RULLESTOPPEREN

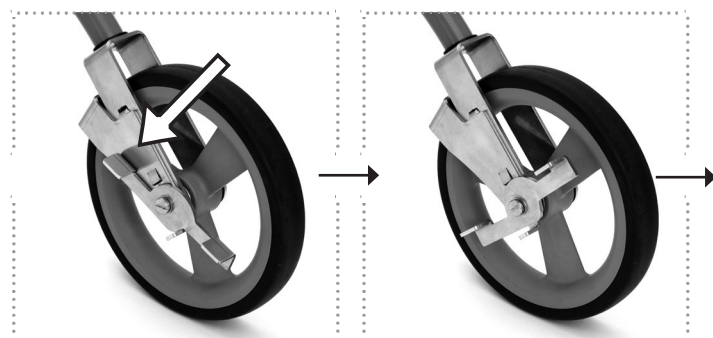

1. Inden du kører:
Træd på rullestopperen med din fod ...
2. til kørestillingen.

6. SÆT I GANG




1. Nu er din CityCaddy klar til den første tur. **Voilà, så er det gjort! Nyd turen.**



I brug



1. SKUBBEPOSITION

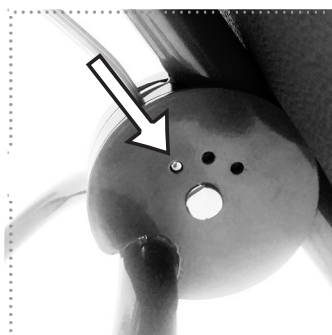

Sådan genkender du den korrekte position til at skubbe CityCaddy fremad.




Sådan kan du altid komme i glideposition: Tryk kort på vippearmen, så hjulkassen bevæges væk fra indstigningsbøjlen og over i kørestilling.

På www.citycaddy.de findes en kort videovejledning, der viser skub og træk.



2. TRÆK

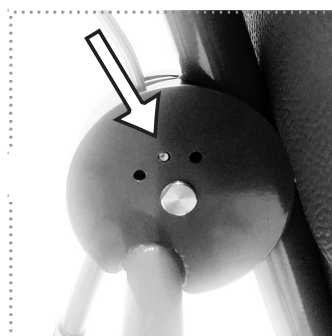

1. Sådan kan du se, at CityCaddy står i den korrekte trækposition.



Sådan skifter du fra skubbe- til trækposition: Tryk kort på vippearmen, så hjulkassen kan bevæge sig hen mod indstigningsbøjlen, indtil CityCaddy står stabilt igen (du hører et "klik").



3. STÅENDE (TRÆKPOSITION + AKTIVERET RULLESTOP)



1. Sådan genkender du rullestopets stopposition.




2. Sådan genkender du kørepositionen (trykket helt i bund).


Fortsættelse af brug




4. TRANSPORT ELLER OPBEVARING

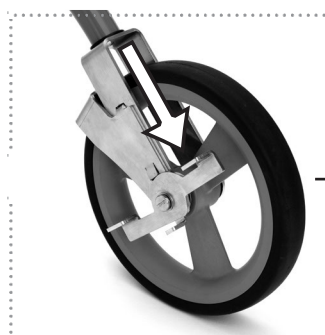


1. For at forhindre, at CityCaddy ruller væk, tryk på rullestopperen med foden.

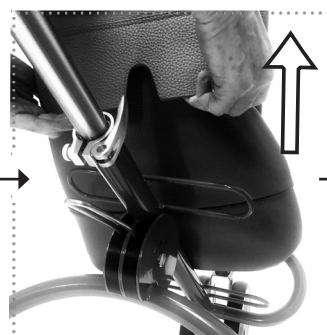


Æjern nu tasken, og læg den til side.

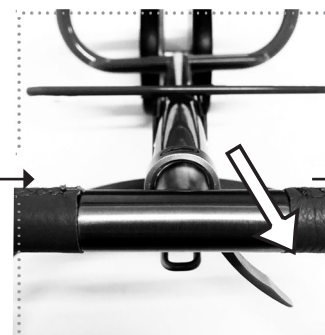


3. Løs hurtigtidløseren.

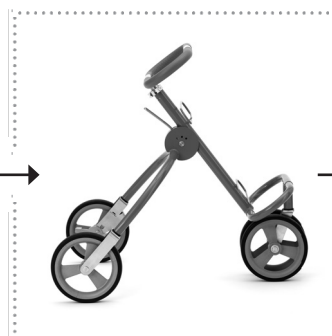


4. Tryk styret ned.

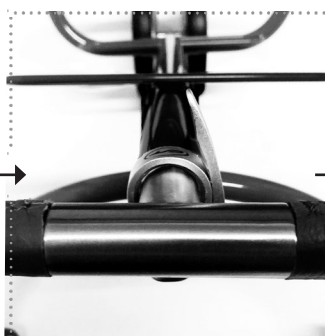

5. Ret håndtaget op igen, og luk hurtigtidløseren helt fast.

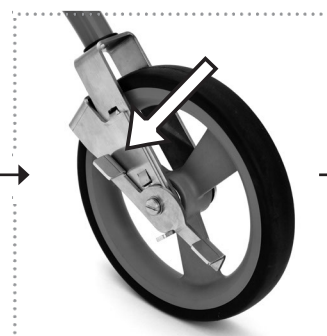


6. Frigør rullestopperen.

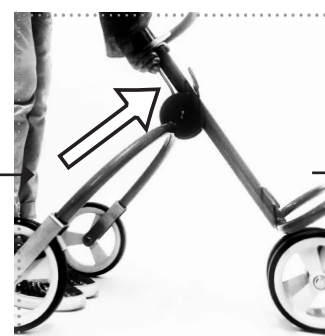


7. Tryk kort på vippearmen for at føre hjulkassen helt ind mod indstigningsbøjlen (der høres et "klik").



8. Nu står for- og baghjul på linje.

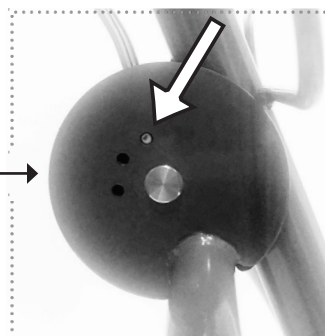


9. Sådan ser du, at positionen er korrekt.

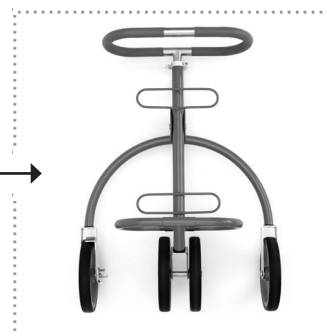

10. Nu er CityCaddy klar til transport (f.eks. i et bagagerum eller et skab).

Sikkerhedsanvisninger

KANTSTEN

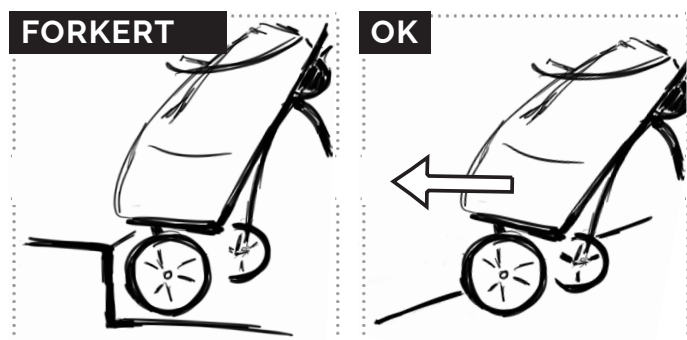

Når du går fra fortov til vej, skal du altid bruge en sænket overgang – ikke en høj kantsten!

NIVEAUFORSKELLE

Niveau-forskelle bør altid tages i en ret vinkel. Ved stort højdefald skal du bruge trækkepositionen (se side 6).

TRAPPER



For at komme op eller ned ad trapper med CityCaddy skal du indstille trækkepositionen (se side 6) og gå lige ind mod trinene, både ved op- og nedstigning.

BEMÆRK VED BRUG



HJULBREMSE

Brug rullestopperen, når du holder pause – f.eks. hvis du læner dig op ad håndtaget eller kører med bus.



HURTIGLÅS

Hurtigudløseren skal altid være lukket helt fast, når CityCaddy bruges.



STABILT FODFÆSTE

For at stå sikkert skal alle hjul på CityCaddy have kontakt med underlaget.




MINDSTE POSITION

Bemærk: I sammenklappet tilstand kan CityCaddy ikke stå af sig selv!

DESUDEN VIGTIGT:

- ! Pak tasken korrekt ved at placere de tunge ting nederst.
- ! Vær opmærksom på, at tung last øger risikoen for at vælte.
- ! CityCaddy er et livsstilsprodukt, **ikke et medicinsk hjælpemiddel**.
- ! Brug af CityCaddy anbefales ikke ved alvorlige sanse- eller balanceforstyrrelser.

ADVARSEL: På skrånende underlag kan rullehastigheden være højere end din egen ganghastighed, og den øges yderligere, når CityCaddy er læsset.
Fare for at falde!

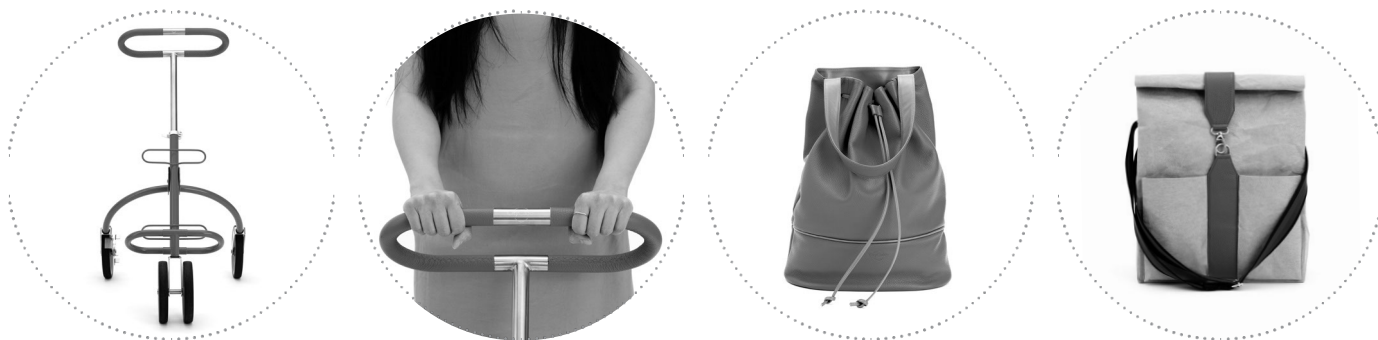

CITYCADDY RAMME OG STYR

- Hvis CityCaddy-rammen eller hjulene er beskidte, rengøres de med vand og et mildt rengøringsmiddel på en klud. Tør derefter grundigt af med en blød klud.
- Hvis du bliver overrasket af en regnbyge med CityCaddy, skal læderet på styret have lov til at tørre langsomt, efter at du om nødvendigt har tørret det af med en blød klud.

CITYCADDY-TASKER

LÆDERTASKER, F.EKS. CC.PARIS

- Støv CityCaddy-taskerne af med en blød, tør klud.
- Hvis du bliver overrasket af en regnbyge med CityCaddy, skal læderet på styret have lov til at tørre langsomt, efter at du om nødvendigt har tørret det af med en blød klud.

TASKE I VASKBART PAPIR MED LÆDERKANT, FX CC.MILANO

- Aftør tasken med en blød, tør klud.
- Pletter kan fjernes med vand, et mildt rengøringsmiddel og en klud – rengør med blide bevægelser.

Teknisk beskrivelse / materialer / mål



CITYCADDY-RAMME

- CityCaddy-materiale: rustfrit stål / lakeret stål
- CityCaddy-håndtag: rustfrit stål med læderbeklædning, håndsyt
- Hjul: diameter 19 cm med kuglelejer
- Vægt: ca. 6,5 kg
- Mål i brug: dybde 60 cm / bredde 54 cm / højde 100 cm
- Mål sammenklappet: dybde 30 cm / bredde 54 cm / højde 80 cm
- Bæreevne: maks. 100 kg

CITYCADDY-TASKER

CC.PARIS. STOR BUCKET BAG, KOSKINDSLÆDER

- Kromgarvet, anilinfarvet læder fra europæiske kilder
- For i lædertasken: Dinamica® MIKO mikrofiberstof
- Taskens mål: ca. højde 46 cm / bredde 35 cm / dybde 17 cm
- Bæreevne: ca. 15 kg

CC.MILANO. ROLLIN' BAG, VASKBART PAPIR / KOSKIND / WEBBING

- Papirplast-blandingen består af mere end 60% cellulose. De øvrige ingredienser er farvepigmenter og latex. Cellulosen stammer fra træer i bæredygtigt forvaltede skove i Nordeuropa.
- Den er 100% vegansk.
- Materialet indeholder ikke pentachlorphenol, PVC eller BPA og er hverken skadeligt for miljøet eller helbredet.
- Taskens mål: ca. højde 46 cm / bredde 35 cm / dybde 17 cm
- Bæreevne: ca. 15 kg

Taskerne er fremstillet af naturlige materialer. Derfor kan der forekomme små farvevariationer.

Garanti

Garantien følger den lovpligtige periode på 24 måneder fra købsdatoen.



Garantien dækker fejl ved produktet, som kan dokumenteres at skyldes materiale- eller produktionsfejl. Skader som følge af almindeligt slid, forsæt, uagtsom eller forkert betjening eller anvendelse er ikke omfattet af garantien.

Garantien bortfalder også, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler.

CityCaddy er bæredygtig, stabil, robust, nem at reparere og kan genanvendes.

Sliddele som styr og hjul kan udskiftes.

Bortskaffelse

Produktet er primært fremstillet af stål og suppleres af mindre plastdele. Kun hjulene består af blandede materialer.

Hvis du er i tvivl om, hvordan det genanvendelige materiale skal håndteres, så kontakt din kommune, da forskellige kommuner/genbrugsordninger benytter forskellige metoder til sortering og genanvendelse.

Kontakt CityCaddy

CityCaddy UG har begrænset hæftelse
Stresemannstraße 90
22769 Hamburg
Tyskland

Telefon: +49 (0)17632485338
Email: info@citycaddy.de
www.citycaddy.de

Handelsregister: HRB 158213
Registerret: Amtsgericht Hamburg

Distributør



Birdhouse
Peder Skrams Vej 1
5220 DK-Odense SØ.
Phone: +45 60139399

support@birdhouse.dk
www.birdhouse.dk



WWW.CITYCADDY.DE