

Autostol til børn med funktionsnedsættelser Carrot 3 XL

Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen grundigt, før du tager Carrot 3 XL i brug.

CARROT 3 XL



Når du har læst den, bedes du altid opbevare denne brugsanvisning i lommen på bagsiden af Carrot 3 XL.



Instruktionsvideo- URL



Udgave 11/2025

Kære kunde,

hjerteligt tillykke med din Carrot 3 XL!

Carrot 3 XL sædet er en udvidelse af standard-sædet Carrot 3 til personer, der er vokset så meget, at de ikke længere passer i den almindelige Carrot 3 eller andre autostole. Spørg altid din læge for at være sikker på, at dette sæde er egnet til dit barn. Læs venligst alle anvisninger i denne manual, før du tager sædet i brug. Få også rådgivning hos din forhandler.

Carrot 3 XL vil kunne tilpasses dit barns vækst i mange år. Din forhandler kan også hjælpe dig med de nødvendige indstillinger.

Har du flere spørgsmål, står vores team altid klar til at hjælpe dig på (06721) 906 0 eller via et videoopkald. Vi tager meget gerne imod dine forslag til, hvordan vi kan forbedre produktet – skriv til os på info@rehanorm.de.

God tur med jeres Carrot 3 XL-autosikkerhedssæde,

Med venlig
hilsen

Andrea Staus og RehaNorm-teamet

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed i henhold til artikel 19 og bilag IV i forordning (EU) 2017/745 (MDR) af 5. april 2017 om medicinsk udstyr (EU-overensstemmelseserklæring for medicinsk udstyr), at autosikkerhedssædet Carrot 3 XL opfylder de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2017/745 (MDR) af 5. april 2017 om medicinsk udstyr. Fremstillingen af Carrot 3 XL sker under kontrol af et kvalitetsledelsessystem i henhold til EN ISO 9001 under hensyntagen til bestemmelserne i forordning (EU) 2017/745 (MDR) af 5. april 2017 om medicinsk udstyr.

Vores produktmærkning findes på bagsiden af autosikkerhedssædet Carrot 3 XL under betrækket i højre side.

Producent:

Seeds Co. LTD,
Meshiro-cho 705-16,
Isahaya City,
854-0007 Nagasaki-præfekturet,
Japan

Producerende fabrik:

Marubishi Industry Co., Ltd,
1251-3 Honjo, Komaki-shi, Aichi,
Japan

Enesteimportør i Europa og autoriseret repræsentant for EU-markedet for medicinsk udstyr:

RehaNorm GmbH & Co. KG,
Am Ockenheimer Graben 50,
55411 Bingen
Tyskland
Telefon +49 67 21/90 60,
Telefax +49 67 21/90 66 6,
E-mail: info@rehanorm.de,
www.rehanorm.de

**Distributør****Birdhouse**

Peder Skrams Vej 1
5220 DK-Odense SØ.
Phone: +45 60139399

support@birdhouse.dk
www.birdhouse.dk

Indholdsfortegnelse

EU-overensstemmelseserklæring.....	3
Indholdsfortegnelse	4
Advarsler og sikkerhedsanvisninger	6
Godkendelse.....	6
Placering.....	6
Køretøjets egnethed.....	6
Egnethed af køretøjssædet.....	7
Genbrug efter en ulykke	7
Genbrug efter første ibrugtagning	7
Betræk til Carrot 3 XL.....	7
Køretøjer med airbags	7
Vejledning til brug af Carrot 3 XL i bilen.....	7
Bilens sikkerhedssele (trepunktssele).....	8
Sådan bærer du Carrot 3	8
Hvornår du ikke bør bruge Carrot 3	8
Vigtige ting at være opmærksom på	8
Hældning af ryglænet på bilsædet	9
Formål/indikation	10
Anvendelsesrisici/kontraindikationer	10
Funktionsbeskrivelse	11
Montering i køretøjet.....	12
Standardmontering.....	12
Vandret fastgørelse af Carrot 3 XL på bilsædet.....	12
Lodret fastgørelse af Carrot 3 XL på bilsædet	12
Funktioner	13
Hovedområde.....	13
Justering af nakkestøtten frem eller tilbage.....	13
Justering af hovedpuden.....	13
Skulderområde.....	13
Skuldermodul	13
Polstring til sele	14
Rygområde	14
Indstilling af ryglænets højde.....	14

4-punktssele	15
Sædeområde	15
Justering af sædedybde.....	15
Sikring af dit barn.....	16
Sådan forkorter du skulderstropperne:	16
ADVARSEL	17
Tilbehør	20
Terapibord/underarmsstøttepude XL.....	20
Trekantkile/underlagskile	20
Fyldpude (100 mm)	20
3D-kropspude med velcro	20
Skridtrem.....	21
Yderligere valgfrit tilbehør.....	22
Anti-udstigningsrem	22
Rumpstøttepolster.....	22
Sikkerhedsselelås.....	22
Cover til selelås.....	22
Inkontinens-overtræk	22
Tekniske data.....	22
Vægte.....	22
Mål	22
Materiale	22
Pleje og vedligeholdelse.....	23
Aftagning af betrækket.....	23
Rengøring og desinfektion – rengøring af betræk og polstring	23
Kliklyd fra bæltespændet	24
Gurte og remme.....	24
Vedligeholdelse	24
Produktets levetid og vedligeholdelse	24
Garanti.....	26
Garantiperiode	26
Begrænsninger i garantien.....	26
Formular til garantikrav	26
Lægeerklæring.....	27

Advarsler og sikkerhedsanvisninger



følgende advarsel: alvorlige og endda dødelige skader kan forekomme, hvis anvisningerne ikke følges !

Godkendelse

Carrot 3 XL sædet er en udvidelse af standardsædet Carrot 3 til personer, der er blevet så høje, at de ikke længere passer i det almindelige Carrot 3 eller andre autostole. Det anbefales at bruge Carrot 3 XL til brugere på ca. 40–75 kg og en højde på 140–180 cm. Sædet er testet med succes i en crashtest med en 75 kg testdukke.

Lovgivningen i Tyskland og i mange andre lande tillader transport af børn på over 40 kg og op til ca. 75 kg. Der skal dog indhentes en lægeordination. (For Tyskland henvises der til lægeerklæringen i bilaget samt den „Tredje forordning om undtagelser fra færdselsretlige bestemmelser af 5. juni 1990“ fra det tyske forbundsministerium for transport).

Carrot 3 XL er ikke godkendt til brug i fly.

Placering

- Placer Carrot 3 XL udelukkende i kørselsretningen. Vi anbefaler pladsen bag forsædepassageren.
- Vi anbefaler at bruge Carrot 3 XL i oprejst position.
- Brug ikke Carrot 3 XL på forsædepassagersædet, hvis den hindrer betjening af gearskifte eller håndbremse, eller hvis barnet derfra utilsigtet kan nå betjeningsknapper.
- Vær ved montering opmærksom på, at ingen del af Carrot 3 XL ved normal brug af bilen kan komme i klemme under et bevægeligt sæde eller i døren. En forkert monteret Carrot 3 XL kan medføre betydelig risiko for dødsfald eller personskade.
- På bilsæder med justerbart ryglæn skal De altid sikre, at sædets justeringsmekanisme er låst korrekt. Ved en pludselig opbremsning kan et ryglæn, der ikke er låst, ikke yde den nødvendige sikkerhed.

Vigtigt:

Hvis De monterer Carrot 3 XL på forsædepassagersædet foran, skal sædet skubbes så langt tilbage som muligt for at udelukke risiko for skader fra airbaggen.

Køretøjets egnethed

Carrot 3 XL er egnet til brug i køretøjer, der er udstyret med trepunkts-sikkerhedsseler godkendt efter standarderne i ECE-regulativ nr. 16 eller andre tilsvarende standarder.

Egnethed af køretøjets sæde

Følgende køretøjssæder er ikke egnede til brug sammen med Carrot 3 XL :

- Autostole uden sikkerhedssele,
- Autostole, der er monteret sideværts eller bagudvendt,
- Autostole, der er mindre end 40 cm dybe,
- Autostole med en tydelig krumning i sædet, som kan gøre fastgørelsen ustabil, 7
- Autostole med en topunktssesele

Genbrug efter en ulykke

For at undgå skader fra skjulte defekter må produktet ikke bruges efter en ulykke igen.

Genbrug efter første brug

Ifølge producentens anvisninger er det ikke tilladt at genbruge autosikkerhedssædet efter brug af den patient, der er angivet i ordinationen.

Betræk til Carrot 3 XL

Brug kun det medfølgende betræk, da det er en vigtig del af fastholdelsesevnen.

Køretøjer med airbags

Hvis dit køretøj er udstyret med airbags, skal du følge køretøjets brugsanvisning vedrørende montering af en autostol.

Vejledning til brug af Carrot 3 XL i køretøjet

- Beskyt dit barn, når Carrot 3 XL bruges i køretøjet ved høje udendørstemperaturer, mod forbrændinger fra varmt metal (fx selelås) eller plastdele ved at sikre, at alle dele, som barnet kan komme i kontakt med, har en ufarlig temperatur. Dæk evt. Carrot 3 XL til, når bilen parkeres i solen. Selve Carrot 3 XL tager ikke skade af høje eller lave temperaturer eller af sollys.
- Efterlad ikke barnet i Carrot 3 XL uden opsyn eller alene i bilen.
- Transportér altid barnet med Carrot 3 XL s 4-punktssesele fastspændt og med køretøjets 3-punktssesele.
- Autostolens seler skal sidde tæt til barnet og justeres ved hver brug. Meget tykt tøj, fx jakker, reducerer sikkerheden og bør derfor ikke bæres i stolen.
- Selerne må ikke danne løkker og må ikke være snoede.
- Selerne må ikke presse hårdt mod barnets hud eller bringe kroppen i en unaturlig position.

- Sørg for, at de sorte fastgørelsesremme på Carrot 3 XL sidder stramt fast på bilens sæde.
- Kontrollér, at sikkerhedsselen klikker korrekt i lås.

Bilens sikkerhedssele (bilens trepunktsele)

- Den vigtigste beskyttelse for passagerer i en bil ved en kollision er bilens trepunktsele – bilens sikkerhedssele. Brug kun seleføringsstropperne til at fastholde bilens sikkerhedssele.
- Brug aldrig Carrot 3 XL uden bilens trepunktsele: Korrekt montering kan øge et barns chance for at overleve en trafikulykke markant.

Bæring af Carrot 3

Bær Carrot 3 XL ved at løfte den udefra med begge hænder. Brug aldrig H-selen til at bære Carrot 3 XL . Det kan beskadige 4-punkt-selen samt låsemekanismerne.

Hvornår du ikke bør bruge Carrot 3

- Brug ikke Carrot 3 XL , hvis du ikke kan fastgøre den korrekt som beskrevet i brugsanvisningen.
- Brug ikke Carrot 3 XL , hvis den ikke sidder fast efter montering.

Yderligere vigtige oplysninger

- Sørg for, at barnet ikke rejser sig op eller står oprejst i Carrot 3 XL .
- Gå ikke i panik i en nødsituation – f.eks. ved en kollision. Tryk på knappen på selelåsen, og tag tungen ud af låsen. Tag derefter barnet ud af sædet. Brug seleføringspunkterne udelukkende, som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Brug ikke andre seler eller andre sædetyper end dem, der er beskrevet i brugsanvisningen.
- Hæv kun Carrot 3 XL som angivet i brugsanvisningen, da sædet ellers ikke beskytter barnet tilstrækkeligt i en kollision.
- Regelmæssige kontroltjek er nødvendige ved kørsel på ujævne veje samt før og efter en tur.
- Fastspænd Carrot 3 XL med bilens sikkerhedssele, også når det ikke er i brug. Ved et trafikuheld kan et ikke-fastspændt autostol skade bilens passagerer.
- Af hensyn til din egen sikkerhed anbefaler vi, at Carrot 3 XL opbevares i bagagerummet – ikke i kabinen – når det ikke bruges. Sørg samtidig for, at der ikke lægges tunge genstande oven på Carrot 3 XL .
- Parkér bilen et sikkert sted, hvis du foretager justeringer af sædet. Dette omfatter også justering af ryglænet på bilsædet. At håndtere eller justere Carrot 3 XL under kørslen udgør en betydelig – og i nogle tilfælde livsfarlig – risiko for dig og dit barn.

- Carrot 3 XL må ikke bruges derhjemme på gulvet eller andre uegnede steder.
- Brug ikke Carrot 3 XL som legetøj til børn eller som stol til voksne.
- Lad ikke Carrot 3 XL stå i nærheden af opvarmede materialer. 9
- Kun ledsagere bør betjene produktet.
- Sørg for, at alle brugere har forstået, hvordan Carrot 3 XL bruges korrekt i et køretøj.
- Foretag ingen ændringer i konstruktionen af Carrot 3 XL. Enhver ombygning af produktet, som ikke udtrykkeligt er beskrevet i denne brugsanvisning, sker på eget ansvar. Vi hæfter ikke for skader, der opstår som følge af en forkert ombygning. Forsøg derfor f.eks. aldrig at fjerne 4-punkt-selen og de sorte fastgørelsesstropper på Carrot 3 XL . Fjern aldrig selespændet eller låsetungerne på H-selen eller de sorte fastgørelsesstropper. Hvis de ikke monteres korrekt igen, kan Carrot 3 XL i visse tilfælde ikke fungere sikkert.

Bemærk:

Hvis du har spørgsmål til brugen eller til reparationer, bedes du kontakte din forhandler.



Advarsel!

Autostolen må kun anvendes fremadvendt.

Hældning af bilsædets ryglæn



Advarsel!

- Før du læner ryglænet på det køretøjssæde, som Carrot 3 XL er fastgjort til, skal du løsne og give stropperne i 4-punktselen lidt slack (fig. 1). - Stram stropperne igen, når ryglænet er lagt tilbage (fig. 2).
- Hvis ryglænet på det køretøjssæde, som Carrot 3 XL er fastgjort til, lænes tilbage uden først at løsne stropperne, kan det medføre risiko for kvælning.

Fig. 1 løsne


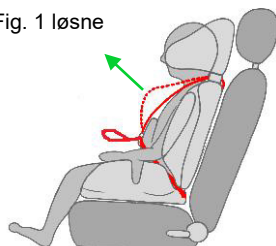


Fig. 2 stramme

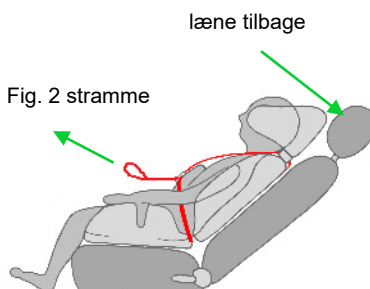

Formål/indikation

Carrot 3 XL er udviklet til transport af børn med funktionsnedsættelser og bl.a. følgende sygdomsbilleder i motorkøretøjer:


- infantil cerebral parese 10
- Hypotoni af uklar årsag
- Muskeldystrofi
- vidt forskellige syndromsygdomme

Carrot 3 XL giver ekstra støtte til en sikker siddestilling. Den kan tilpasses individuelt og kendetegnes af sin sædeskål og det integrerede pelottesystem. Systemet hjælper med at stabilisere hovedkontrollen og giver en stabil siddestilling i bækkenområdet samt ekstra støtte/kontrol ved fødderne.

Anvendelsesrisici/kontraindikationer

Der er ikke kendskab til nogen anvendelsesrisici/kontraindikationer.

Funktionsbeskrivelse

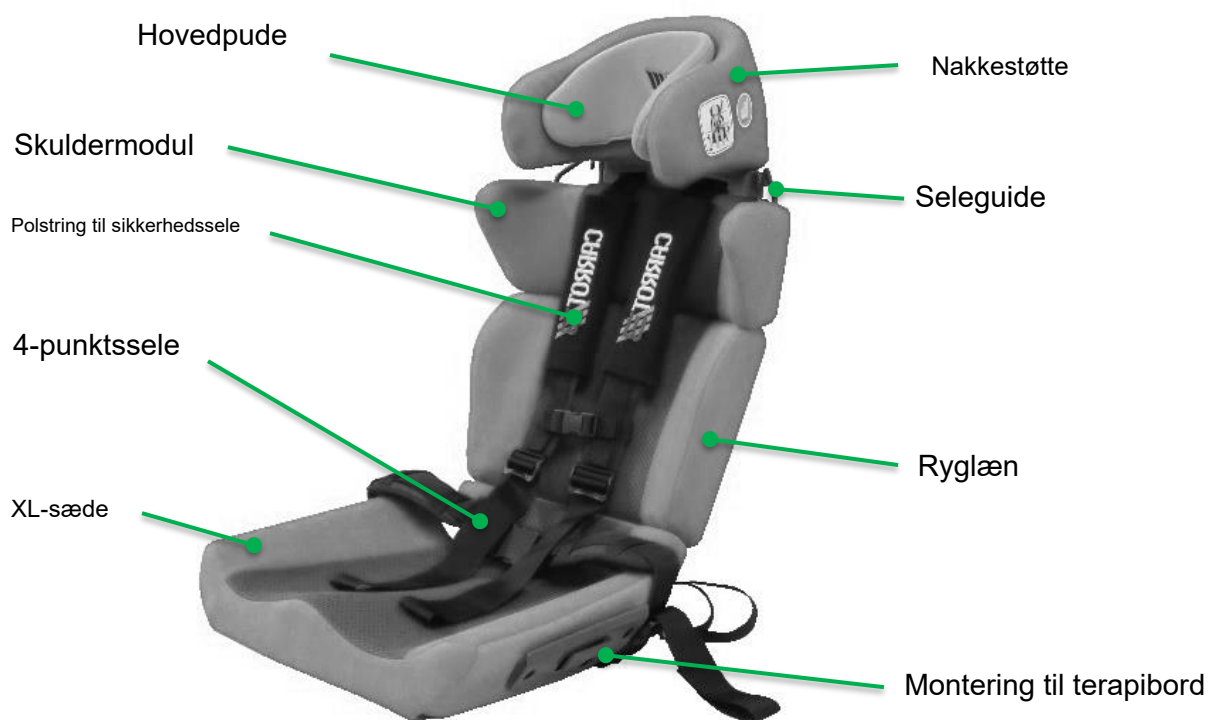

Montering i bilen

Standardmontering

Vandret fastgørelse af Carrot 3 XL på bilsædet

- Fastgør nakkestøtten på Carrot 3 XL med den øverste fastgørelsesstrop til bilens nakkestøtte, som vist i fig. A.
- Fastgør de nederste fastgørelsesstroppe ved at føre dem rundt om den nederste del af bilens sæderyg, som vist i fig. A. 12
- Luk spændelåsene, og stram Carrot 3 XL ved at trække i begge fastgørelsesstroppe samtidig. Carrot 3 XL skal sidde solidt fast mod bilsædets ryglæn, som vist i figur A og B.

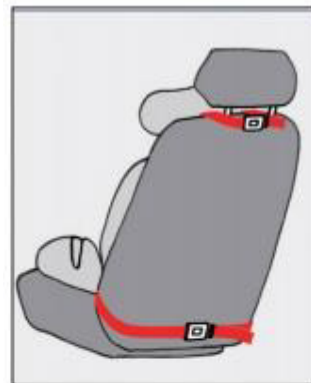


Abb. A

Vigtigt:

Hvis du monterer Carrot 3 XL på forsædet i passagersiden, skal sædet skubbes så langt tilbage som muligt for at undgå risiko for skader fra airbaggen.

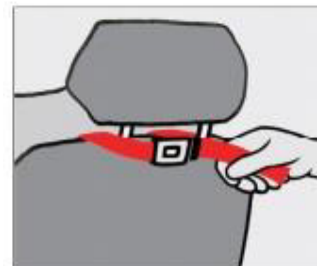


Abb. B

Lodret fastgørelse af Carrot 3 XL til bilsædet

Hvis fastgørelsesstroppe er for korte ved vandret montering, kan de i stedet forbindes lodret med hinanden, som vist i figur C.

Hvis du har problemer med monteringen, bedes du kontakte din forhandler. De kan hjælpe dig.

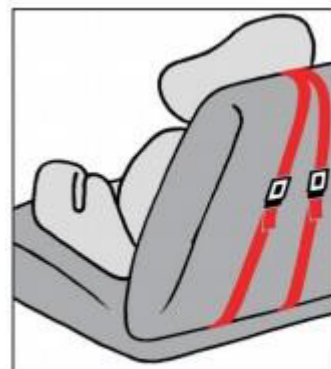


Abb. C

Funktioner

Hovedområde

Justering af nakkestøtten frem eller tilbage

Nakkestøtten kan justeres 15 mm frem eller tilbage, så den kan tilpasses brugerens hovedform og dermed giver bedre beskyttelse (figur A)

Vigtigt: Justering af nakkestøttens position frem eller tilbage kræver specialværktøj. Kontakt om nødvendigt din forhandler. (Figur B og C)



Abb. A



Abb. B

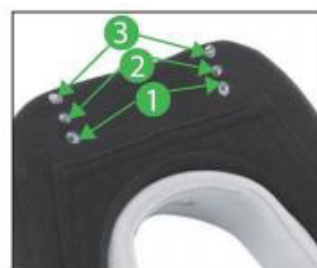


Abb. C

Justering af hovedpuden

Hovedpuden sidder fast på nakkestøtten med en velcroforbindelse og kan nemt flyttes til den position, der passer bedst til barnet.



Skulderområde

Skuldermodul

(Valgfrit tilbehør)

Justering af skulderbredden

- Skulderbredden kan justeres ud til siderne med op til 100 mm – 50 mm til højre og 50 mm til venstre (5 positioner/ trin á 10 mm). Dette gøres med den gule knap på bagsiden af skulderstykket.



- Tryk på den gule knap, og hold den nede, mens du trækker skulderdelen (se figur A) udad eller trykker den indad – alt efter hvad der er mest sikkert og behageligt for barnets krop.

Vigtigt:

Hvis dit barn er stort nok til at bruge skuldermodulet, kan det være, at du har brug for en længere 4-punktssele. Kontakt derfor din forhandler.

Selepolstring

Du kan placere komfortpuderne, som du ønsker, ved at flytte velcrolukningen på bagsiden af nakkestøtten.

BEMÆRK: Træk ikke i komfortpuden, der sidder fast på selen, da den er fastgjort på bagsiden. Træk og løs kun i selen.




Ryglæn

VIGTIGT:

Højden på skulderstropperne på 4-punkt-selen ændrer sig i takt med ryglænets højde.

Skulderstropperne på 4-punktsselen skal føres i barnets skulderhøjde eller højere – de må altså ikke komme ud af ryglænet under skulderen.

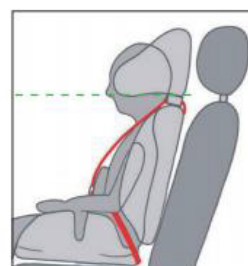

Indstilling af ryglænets højde

- For at låse ryglænet op trækker du i ringen på bagsiden af ryglænet i midten.
- Mens du trækker i ringen, løfter du ryglænet op eller presser det ned – alt efter behov.



4-punktssele

Fastgørelse / åbning af selelåsen

- Hold sele-spændet med den ene hånd. Med den anden 15
- hånd føres låsetungen ind i selelåsen (fig. A)

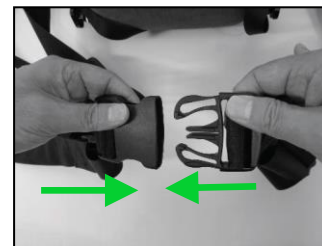


Fig. A

- Hold selelåsen med den ene hånd. Tryk låsetungerne ind, og træk dem ud af spændet (fig. B).


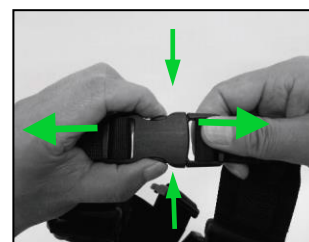


Fig. B

Sædeområde

VIGTIGT:

Ideelt set bør sædefladen være en smule kortere end afstanden fra bækken til knæhasen. Sædefladens forreste kant bør højst være placeret lige foran knæhasen, når barnets bækken er skubbet så langt tilbage som muligt.

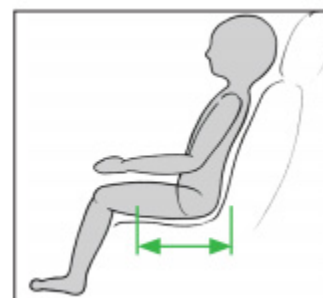


Justering af sædedybde

Den fabriksindstillede sædedybde er 420 mm. Sædedybden kan reduceres med 40 mm til 380 mm ved at flytte eller montere ryglænet længere fremme. Dette gøres ved at skifte skruehul, så sædedybdejusteringsknappen fastgøres i den forreste position.

VIGTIGT:

Kontakt venligst din forhandler for rådgivning om montering og justering af denne del.

Justeringsknap til sædedybde

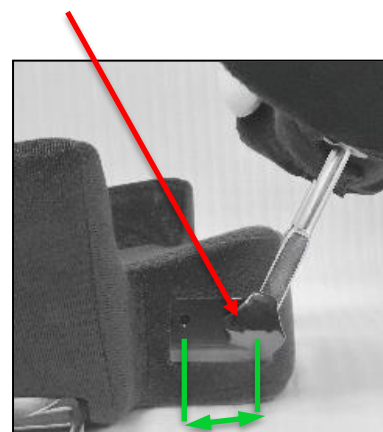

Sikring af dit barn

Når Carrot 3 XL er monteret i dit køretøj, og alle indstillinger er tilpasset, skal du følge disse anvisninger for at sikre dit barn:







- Løsn selen, og åbn spændelåsene (øverst og nederst). Læg selerne ud til siden af sædet, og sæt barnet i sædet (fig. A).
- Placer selerne omkring barnet, og kontrollér, at de ikke er snoet og/eller har knuder. Korrekt fastgørelse bekræftes af et tydeligt klik, når spændelåsen sættes i (fig. B).
- Luk først den nederste spændelås. Træk forsigtigt i selen ud til siden for at stramme hofteselen (fig. C).

BEMÆRK: Barnets hofter skal placeres så langt ned som muligt for at sikre stabil og sikker støtte.

- Luk derefter den øverste spændelås i brysthøjde. Korrekt fastgørelse bekræftes af et tydeligt klik, når spændelåsen sættes i (fig. D).
- Træk forsigtigt selerne nedad for at stramme ved skuldrene (fig. E).

Sådan forkorter du skulderstropperne:

Hvis stropperne er for lange og ikke fastholder patienten tilstrækkeligt i sædet, kan du forkorte dem ved at justere metalgaflens position (fig. F og G). Ved at forkorte stropperne med ca. 10 cm kan også patienter med en forholdsvis smal kropsbygning, som tidligere ikke sad fast nok, spændes sikkert fast.

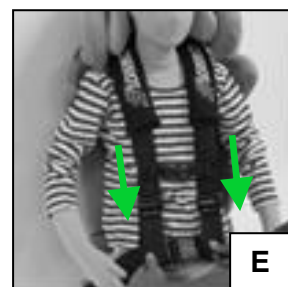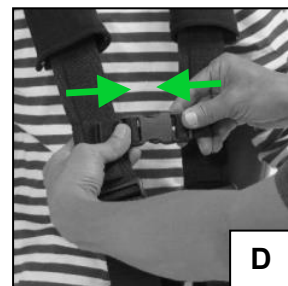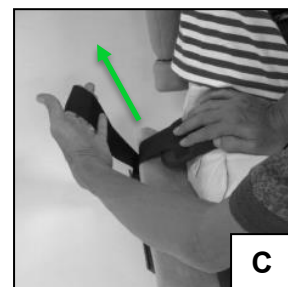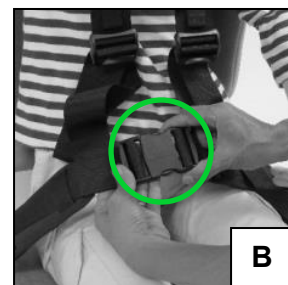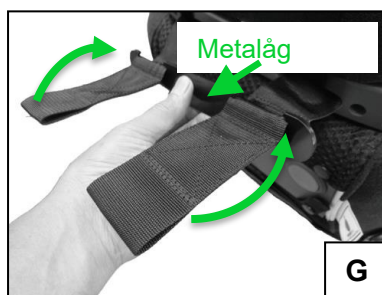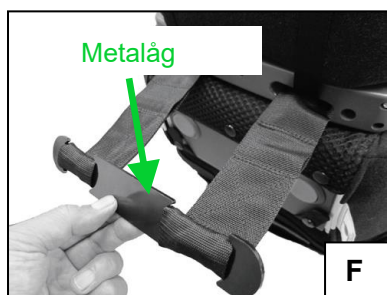



Instruktionsvideo- URL

ADVARSEL

For at undgå, at barnet bliver klemt eller får remmene til at stramme om kroppen, skal du altid mærke efter med hænderne, at selerne er spændt passende til (fig. H).



- Sørg for, at 4-punkt-selen ikke er snoet, og at barnet er korrekt fastspændt.
- Kontrollér, at bilens 3-punkts sikkerhedssele ikke er snoet eller løs, og at den føres korrekt gennem den røde seleføring (fig. I og J).
- Sørg for, at bilens 3-punkts sikkerhedssele er placeret, så den ikke generer barnets ansigt og/eller hals.
- Det er lovpligtigt at bruge bilens 3-punkts sikkerhedssele samtidig til at fastgøre både autostolen og barnet.
- Kontrollér før hver køretur, at bilens 3-punkts sikkerhedssele sidder stramt hen over autostolen, og at barnet sidder sikkert.

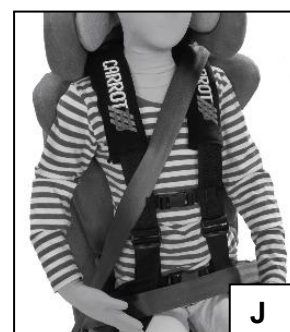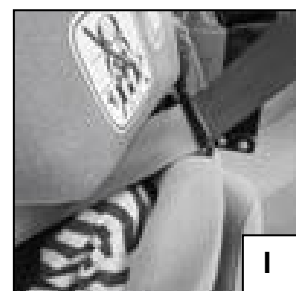

VIGTIGT:

- Sørg for, at den H-formede sele (4-punktssele) på XL-sædet er placeret, så hofteselen holder barnets hofter så lavt som muligt.
- Hvis du er i tvivl om den korrekte placering af dit barn og autostolen, så tøv ikke med at kontakte din lokale forhandler for hjælp og en løsning.
- Kontrollér igen, at 4-punktselen ikke er snoet, og at barnet er korrekt fastspændt.



ADVARSEL!

Det er Deres pligt at bruge bilens 3-punktssele.

Carrot 3 XL's 4-punktssele er ikke en sikkerhedssele til fastholdelse, men et positioneringshjælpemiddel til Deres barn. Det er lovpligtigt at bruge bilens 3-punktssele under kørsel i trafikken.

Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader – i værste fald med dødelig udgang.

Gurtføringen til 3-punktselen kan ses på illustrationen nedenfor eller direkte på selve sædet.



VIGTIGT:

- Træk altid i selen, når personen er spændt fast, for at sikre, at spænderne klikker helt og sikkert i låsen.
- Parkér altid bilen et sikkert sted, før du foretager justeringer af barnesikringssystemet – også når du vil ændre hældningen på autostolen. At justere eller håndtere barnesikringssystemet under kørsel kan medføre ALVORLIGE SKADER for dig og dit barn.
- Under kørsel skal barnesikringssystemet bruges i oprejst position. En tilbagelænet position kan betyde, at systemet ikke fungerer efter hensigten i tilfælde af en ulykke.



Advarsel!

- Inden du læner ryglænet på det bilsæde, som Carrot 3 XL er fastgjort til, skal du frigøre og løsne 4-punkt-selens stropper (fig. 1).
- Stram stropperne igen, når du har lænet sædet tilbage (fig. 2).
- Hvis du læner ryglænet på det bilsæde, som Carrot 3 XL er fastgjort til, uden at løsne stropperne, kan der opstå risiko for kvælning.

Fig. 1 løsne


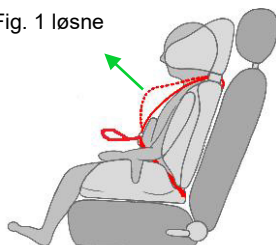


Fig. 2 stramme

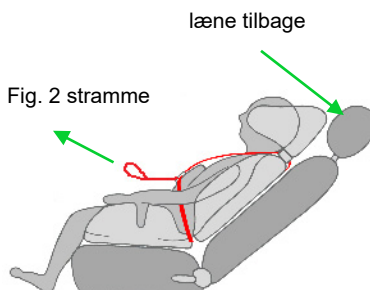

Tilbehør

Terapibord/underarmsstøttepude XL

(Valgfrit tilbehør)

Terapibordet bruges til at give dit barns overekstremiteter et højere niveau af sikkerhed.



Trekantkile/underlagskile

(Valgfrit tilbehør)


Trekantkilen bruges til at hæve sædets forkant og dermed give barnet en sikker og merestabil siddeposition.



Fyldpude (100 mm)

(Valgfrit tilbehør)

Fyldpuden (100 mm) udfylder den opståede åbning ved ryggen, når ryglænet trækkes ud. (Fig. A).

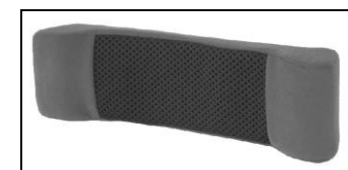

Montering af fyldpuden

- Træk i D-ringen ved ryglænets øverste kant,
- Løft ryglænet, indtil metalstængerne er frie,
- Skub fyldpuden med plastbeslaget ind over de nu synlige metalstængerne,
- Tryk ryglænet ned igen ved at trække i D-ringen, indtil mellemrummet lukker sig.

3D-torso-pude med velcro

(Valgfrit tilbehør)

Der er tale om en ergonomisk, tredimensionelt formet pude, der giver bedre positionering af barnets overkrop.



Skridtrem

(Valgfrit tilbehør)

VIGTIGT: Dette tilbehør passer kun til den nyeste version af XL-sædet, som har en slids samt huller i den midterste del af sædet og stoffet.

- Løsn sædebetrækket delvist ved at åbne velcrolukningen og lynlåsen i bunden åbnen.
- Find de to nederste huller i puden.
- For at føre remmen gennem hullerne er det nemmest at folde den, så den bliver smallere.
- Før remmene gennem den øverste del og gennem de to nederste huller i bundpuden, og træk dem ud på undersiden.
- Skub skridtremmen ind i slidsen øverst på betrækket, og sørg for, at spænde på skridtremmen vender fremad.
- Vend sædet på hovedet igen for at stramme velcrolukningerne.
- Kontrollér, at det sidder godt fast.
- Monter sædebetrækket igen ved at lukke lynlåse og velcrolukninger.



Instruktionsvideo -URL



Yderligere valgfrit tilbehør

Anti-udstigningssele

Støttepude til overkrop

Efter mål

Sikkerhedsselelås

(specialfremstillet)

Overtræk til selelås

(specialfremstillet)


Et overtræk til selelåsen til børn, der under kørslen kan åbne den standardselelås og også selelåsen med et tryk på 8 kg, er kun tilladt med lægelig attest. I så fald skal den tilhørende selekniv til nødsituationer medbringes.

Inkontinensovertræk

- Inkontinensovertræk til sæde og ryg, i Dartex, med velcro
- Inkontinensovertræk til nakkestøtte, i Dartex, med velcro
- Inkontinensovertræk til skuldermodul, i Dartex, med velcro
- Inkontinensovertræk til fyldpuder, i Dartex, med velcro
- Flere moduler til inkontinensovertræk fås på forespørgsel

Tekniske data

Vægt	
Produktvægt:	fra ca. 10,5 kg (Vægten kan ændre sig med ekstra tilbehør)
Brugervægt:	36 – 75 kg
Brugerhøjde:	145 cm til 180 cm
Mål	
Samlet bredde:	510 mm - 560 mm
Sædedybde:	420 (380) mm
Sædebredde:	510 mm
Forlængeligt ryglæn:	745 mm - 870 mm
Materiale	
Polstring:	PU-skum
Betræk:	lamineret trikotstof

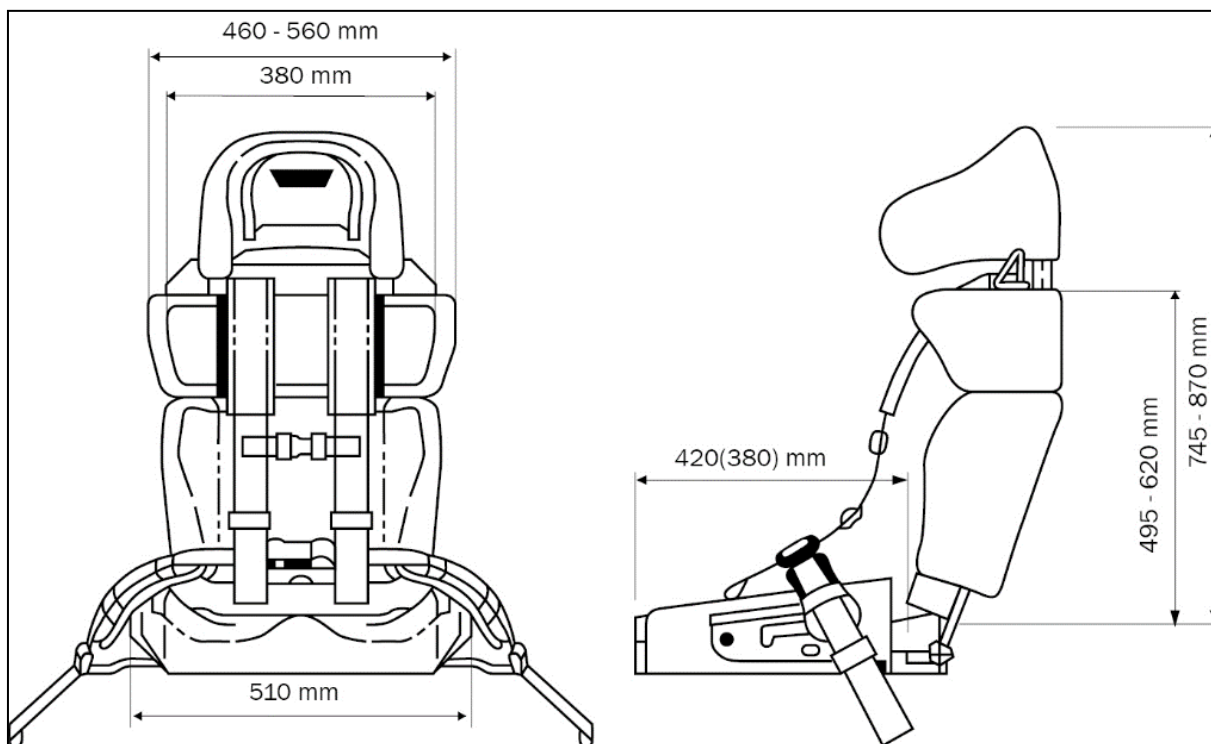

Pleje og vedligeholdelse

Aftagning af betrækket

Forsøg venligst ikke at afmontere eller udskifte betrækket, 4-punktselen eller dele heraf. Kontakt din forhandler, hvis betrækket eller selen skal fjernes eller udskiftes. Ved forkert montering kan sædet ikke yde den nødvendige sikkerhed.

Rengøring og desinfektion Rengøring af betræk og polstring

- Til rengøring af betrækket bruges en svamp, vand på højst 30 °C og en mild sæbe. Tør efter med et håndklæde.
- De grå polstre kan vaskes i hånden i koldt vand med mild sæbe.
- Læg dem fladt ned i vandet for at undgå, at de krymper.
- Brug hverken vaskemaskine, tørretumbler eller strygejern.
- God hygiejne er vigtig, men vask kan slide på stoffet.
- Hvis stoffet bliver beskadiget, bør det udskiftes. Betrækkene bør også udskiftes med jævne mellemrum.
- Hvis der er trængt kropsvæsker ind i betrækket, desinficér området grundigt og med god margen med et almindeligt husholdningsdesinfektionsmiddel (f.eks. Sagrotan eller lignende).

Kliklyd fra seletåsen

Hvis et barn spiser eller drikker, mens barnesikringssystemet bruges, bør seletåsens funktion kontrolleres regelmæssigt. Hvis den tydelige kliklyd ikke kan høres, er det tid til at udskifte seletåsen.

Selestropper og remme

Forsøg ikke at skille selerne ad eller demontere dem. Fjern aldrig låsen og/eller låsetungerne fra selerne eller remmene. Når de først er fjernet, kan de ikke monteres igen. Ved forkert genmontering kan barnesædet muligvis ikke fungere som tilsigtet.

Vedligeholdelse

Foretag venligst en daglig visuel kontrol, og tjek regelmæssigt produktet for revner, brud, manglende dele og funktionsfejl. Kontakt ved en defekt eller funktionsfejl direkte den forhandler, der har leveret produktet.

Brug kun producentens originale tilbehør og originale reservedele, da du ellers kan bringe brugerens sikkerhed i fare, og garantien bortfalder.

Ved bestilling af reservedele bedes du kontakte den forhandler, der har leveret produktet, og oplyse sædeenhedens serienummer. Nødvendige reservedele og tilbehør må kun monteres af uddannet personale.

Produktets levetid og service

Konstruktionen og fremstillingsmetoden for hovedrammen i barnesædet Carrot 3 XL muliggør en produktlevetid på 10 år fra produktionsdatoen. For at sikre brugerens sikkerhed på lang sigt og bevare den lovpligtige reklamationsret for hele sædet med de mange tilbehørsdele, der kan vokse med barnet, kræves service hos en fagforhandler mindst én gang om året. Især dele som polstring og betræk, låsen på brystpudens sele samt andre dele, der udsættes for snavs og trykpåvirkning, skal udskiftes, hvis de bliver beskadiget. Udført service skal dokumenteres fuldt ud i den vedlagte serviceplan.

Med disse regelmæssige og fagligt udførte serviceeftersyn kan sædets anvendelighed forlænges ud over den normale produktlevetid, forudsat at der ikke konstateres sikkerhedsrelevante mangler. Dette forudsætter en sammenhængende servicehistorik, der dokumenterer korrekt vedligeholdelse.

Vigtigt: Uden dokumenteret, regelmæssig service må sædet ikke anvendes videre, når der er gået 10 år fra produktionsdatoen – også selv om der ikke er synlige skader.

Med hensyn til den angivne produktlevetid henviser vi igen til bestemmelserne på side 8 i denne brugsanvisning vedrørende genanvendelse efter en ulykke eller efter den første ibrugtagning.

Bemærk også oplysningerne om fremstillingsdatoen på sædets typeskilt. Vores produktmærkning sidder på bagsiden af autostolen Carrot 3 XL under betrækket i højre side.

Vedligeholdelseskrav

Kontrollér venligst din autostol for:

- Skader på ramme, monterede dele og tilbehør (revner, brud, korrosion, bøjede eller manglende dele)
- Skader på polstring og betræk
- Skader på selesystemet (klemmebeslag, spænder, syninger)
- Samlingernes fasthed (løse skruer eller manglende skruer)
- Funktion af alle justeringsdele (skruer, udløserhåndtag, ryg, nakkestøtte, sidestøtter, fodstøtter og føringer i benområdet)
- Funktion af sikkerhedselementer (ISOFIX-beslag)
- Funktion af selelåsen. Snavs fra mad eller drikke kan påvirke selelåsens funktion. Kontrollér derfor jævnligt, at den virker. Hvis kliklyden fra selelåsen ikke længere kan høres, skal selelåsen udskiftes.
- Typeskiltets læsbarhed

Kontakt venligst din forhandler, hvis du opdager fejl eller mangler ved denne kontrol.

Vedligeholdelsesplan

Producentens vedligeholdelseskrav er udført:

Dato	Forhandler	Navn	Underskrift



Konstaterede mangler eller skader skal udbedres af forhandleren eller producenten, før produktet tages i brug igen.

Garanti

Garantiperiode

Garantien for dette produkt gælder i 24 måneder fra købsdatoen. Gem venligst salgsdokumentationen med dato.

For at gøre brug af garantien bedes du kontakte din forhandler, som vil iværksætte alle nødvendige tiltag for dig.

Begrænsninger i garantien

Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes forsømmelse eller forkert håndtering, herunder hvis denne brugsanvisning ikke er blevet fulgt.

Brug af betræk, der ikke hører til Carrot 3 XL , samt indlæg, legetøj eller tilbehør er ikke omfattet. Sådan brug kan medføre, at Carrot 3 XL ikke lever op til sikkerhedskravene i ECE-regulativ nr. 16, eller at den ved en ulykke ikke opfører sig, som den er konstrueret til. Det vil automatisk medføre bortfald af garantien.

Formular til garantikrav

Produktets modelnummer:	Carrot 3 XL
Efternavn, fornavn:	
Vejnavn og husnummer:	
By:	
Postnr.:	
Telefonnummer:	
E-mail:	
Købsdato:	
Forhandler:	

Lægeerklæring

Lægeerklæring

Erklæring i henhold til den tredje bekendtgørelse* om undtagelser fra færdselsretlige bestemmelser af 05.06.1990 (BGBl. I s. 999)

Efternavn: _____ Fornavn: _____ født den: _____

Vej: _____ Bopæl _____

på grund af den foreliggende helbredstilstand og/eller den eksisterende funktionsnedsættelse ikke kan transporteres i en typegodkendt fastholdelsesanordning i henhold til § 22a, stk. 1, nr. 27 i færdselsgodkendelsesbekendtgørelsen. Ved transport i motorkøretøjer er der behov for et autotransportsæde med udstyr, som er tilpasset funktionsnedsættelsen/sygdommen.

Dato

Lægens stempel og underskrift

Tredje bekendtgørelse om undtagelser fra færdselsretlige bestemmelser af 5. juni 1990 (BGBl. I s. 999), ændret ved artikel 1 i bekendtgørelsen af 22. december 1992 (BGBl. I s. 2480).

Indledende formel

I medfør af § 6, stk. 1, nr. 3, litra b, sammenholdt med stk. 3, i færdselsloven i den konsoliderede udgave offentliggjort i Bundesgesetzblatt del III, systematiknummer 9231-1, nr. 3 senest ændret ved lov af 6. april 1980 (BGBl. I s. 413), stk. 3 indsat ved § 70, stk. 1, nr. 3, i lov af 15. marts 1974 (BGBl. I s. 721) og ændret i henhold til artikel 22, nr. 3, i bekendtgørelsen af 26. november 1986 (BGBl. I s. 2089), fastsætter forbundsministeren for transport efter høring af de kompetente øverste delstatsmyndigheder:

§ 1

Som undtagelse fra § 22a, stk. 1, nr. 27 i køretøjsgodkendelsesbekendtgørelsen behøver særlige fastholdelsesanordninger til børn med handicap i motorkøretøjer ikke at være udført i en officielt typegodkendt konstruktion, hvis

1. konstruktionen svarer til det aktuelle tekniske niveau,
fastholdelsesanordningen ledsages af en monterings- og brugsvejledning, hvor de køretøjer og køretøjstyper, den kan anvendes til, er angivet.

§ 2

Som undtagelse fra § 21, stk. 1a i færdselsloven må børn med handicap medbringes i motorkøretøjer, hvis der anvendes en særlig fastholdelsesanordning som omhandlet i § 1, og hvis det fremgår af en lægeerklæring, der er udstedt i navnet på den handicappede

for et barn, bekræftes det, at der i stedet for en typegodkendt fastholdelsesanordning efter § 22a, stk. 1, nr. 27, i færdselsgodkendelsesbekendtgørelsen kun kan anvendes en særlig fastholdelsesanordning. Den lægelige attest må ikke være ældre end 4 år. Den skal medbringes og på forlangende udleveres til kontrol til de kompetente personer.

§ 3

Denne bekendtgørelse gælder i medfør af § 14 i den tredje overgangslov i forbindelse med artikel 3 i loven om ændring af færdselsloven af 28. december 1982 (BGBl. I s. 2090) også i delstaten Berlin.

§ 4

Denne bekendtgørelse træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen.