

Multiroller – rehabiliteringsklapvogn til børn med gangbesvær

Brugsvejledning

Læs brugsanvisningen grundigt, før du tager Multirolleren i brug.

MULTIROLLER



Kære forældre,

Tak fordi I har valgt Multiroller.

Vi beder jer venligst om at læse følgende brugsanvisning, før I tager Multiroller i brug. Kun på den måde kan I sikre, at jeres barn virkelig kan køre sikkert i Multiroller. Korrekt brug af Multiroller kan gøre hverdagen meget lettere.

Jeres forhandler hjælper gerne med de nødvendige tilpasninger.

Hvis I har flere spørgsmål, står vores team gerne til rådighed når som helst på (06721) 906 0 eller via et videoopkald. Vi modtager også gerne jeres forslag til, hvordan vi kan forbedre produktet, på e-mail til info@rehanorm.de.

God fornøjelse med jeres Multiroller Rehabuggy,

Med venlig
hilsen

Andrea Staus og RehaNorm-teamet

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at produktet overholder de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2017/745 (MDR) af 5. april 2017 om medicinsk udstyr. Produktionen foregår under kontrol af et kvalitetsledelsessystem i henhold til DIN EN ISO 9001:2015 og DIN EN ISO 13485:2016 under hensyntagen til kravene i forordning (EU) 2017/745 (MDR) af 5. april 2017 om medicinsk udstyr.

Du finder vores produktidentifikation på det nederste, bageste tværrør.

Producent:

RehaNorm GmbH & Co. KG,
Am Ockenheimer Graben 50,
55411 Bingen
Tyskland
Telefon +49 67 21/90 60,
Fax +49 67 21/90 66 6,
E-mail: info@rehanorm.de,
www.rehanorm.de



Indholdsfortegnelse

EU-overensstemmelseserklæring	2
Indholdsfortegnelse	3
Advarsler og sikkerhedsanvisninger	6
Det skal du være opmærksom på, før du bruger Multirolleren:	6
Andet, du bør overveje:	7
Gen-brug efter en ulykke	7
Gen-brug efter første ibrugtagning	7
Formål/indikation	8
Risici ved brug/kontraindikationer.....	8
Grundudstyr	9
Montering	10
Bemærk	10
Levering	10
Montering af baghjul	10
Montering af forhjulssæt	11
Fold ud.....	11
Fold sammen	12
Justering af skubbebøjle.....	12
Tilbehør og funktioner	13
Forhjulssæt	13
Buggy-sæt med to drejelige forhjul og stel.....	13
Jogger-sæt med ét forhjul og stel	13
Offroad-sæt med to forhjul og stel	13
Tromlebremse	14
Slynge-sæde.....	14
Integreret sæderamme	15
Justering af ryglænets vinkel.....	15
Justering af sædevinklen.....	15
Justering af fodstøttens vinkel.....	15
Justering af fodstøttens højde.....	16
Fodstøtte 1	16
Sæt til fodstøtte	16
Fodstøtte 2, til integreret sæderamme.....	16

Nakkestøtte, velcro.....	17
Indlægs pude til slanke børn	17
Taske.....	17
Regnslag	18
Sol-/regnkalche.....	18
Regnslag (til ben).....	18
Regnbeskyttelsestæppe med hætte.....	19
Vind-/regnbeskyttelse med afskærmning	19
Væltbeskyttelse.....	19
Andre valgfrie tilbehørsdele.....	19
Rygforlænger (150 mm) til slyngesæde	19
Rygforlænger (150 mm) til integreret sæderamme	19
Betræk til integreret sæderamme.....	20
Overkropsstøtte på plade bagpå	20
Indlægs pude med overkropsstøttepude.....	20
Integreret sædeplade til montering af sædeadapters, ...	20
Adapter til autostol	20
Sele	20
4-punkts sele.....	20
5-punkts sele.....	20
2-punkts hofte sele	20
Skridtrem	20
Skilleklods på plade (abduktionskile).....	20
Sædekile efter mål	20
Fodstøtteremme (par).....	20
Pleje og vedligeholdelse.....	21
Rengøring og desinfektion.....	21
Betræk og polstring.....	21
Stel og hjul	21
Kontrol for skader og funktionalitet	21
Skema til funktionstest	22
Tekniske data.....	23
Garanti	24
Garantiperiode.....	24
Garantibegrænsninger.....	24
Formular til reklamationer	24

Indledende bemærkninger:

Fagforhandlere bedes udlevere denne brugsanvisning til brugeren. Vi gør opmærksom på, at det leverede produkt kan afvige fra det, der er beskrevet her, som følge af individuelle tilpasninger.

Du kan også downloade denne brugsanvisning fra internettet på www.rehanorm.de.

Personer med nedsat syn bør få indholdet læst højt for sig omhyggeligt og om nødvendigt flere gange.

Advarsler og sikkerhedsanvisninger



Advarsel, alvorlige og endda dødelige skader kan opstå, hvis følgende anvisninger ikke overholdes!

Vigtigt at vide før du bruger Multirolleren:

Montering af Multiroller-delene før første brug udføres af den autoriserede forhandler.

Når du pakker din Multiroller ud, skal emballagen holdes væk fra børn. Plastemballage kan medføre kvælningsfare.

Brug venligst kun Multiroller til personer med en vægt på op til 75 kg.

Der må kun være én person i Multiroller.

Det er ikke tilladt at stå på fodstøtten.

Multiroller er testet til hældninger på op til 10 grader. Ved større hældning kan den vælte.

Bemærk oplysningerne om dækkene. Lufttrykket i bagdækkene skal være: 2,0 til 5,0 bar, og i fordækkene: 2,0 til 2,5 bar.

Kontrollér før hver brug, at quick-release-akslerne på baghjulene er korrekt låst.

Der er behov for regelmæssige kontroller, hvis du kører på ujævne stier eller skovveje.

Tasker og lignende, der er fastgjort på Multiroller øger risikoen for at vælte.

Kun ledsagere, der har læst brugsanvisningen til Multiroller og ikke har kognitive udfordringer, må betjene produktet.

Lad aldrig dit barn sidde i Multiroller uden opsyn.

Lås altid bremsen, når du standser med Multiroller, parkerer den, eller når du sætter dit barn i eller løfter det ud.

Sørg altid for at fastspænde dit barn med de relevante seler eller positioneringssystemer, når det sidder i Multiroller. Det forhindrer, at barnet falder ud af Multiroller, især i sving eller på skråninger. Vigtigst af alt: Sørg for, at Multiroller hverken tipper eller triller væk.

Hvis dit barn rækker ud efter genstande foran, ved siden af eller bagved, skal du sikre dig, at barnet ikke læner sig så langt ud, at den Multiroller kan tippe eller vælte.

Vær opmærksom på forhindringer, og kør om muligt udenom dem – eller kør meget langsomt hen over dem.

Ved kantsten og mindre forhindringer: Hold skubbehåndtaget med begge hænder, og vip forsigtigt Multiroller op på baghjulene. Skub derefter Multiroller forsigtigt op over forhindringen.

Når du kører ned ad bakke, sænkes Multirollerforsigtigt.

Af sikkerhedsmæssige årsager bør kun to personer gå på trapper og bære barnet over forhindringer, når der er passager i vognen – ellers er der risiko for, at barnet falder ud.

Vi anbefaler derfor, at du tager barnet ud af Multiroller på forhånd.

Forsøg at holde Multiroller tør. Bliver den alligevel våd, skal den tørres hurtigst muligt. Efter alle justeringer skal tidligere løsne skrueforbindelser efterspændes.

Vi anbefaler, at du ikke selv ændrer på Multiroller . Hvis du alligevel gør det, sker det på eget ansvar. Vi hæfter ikke for skader, der opstår som følge af en forkert ombygning.

Da Multiroller løbende videreudvikles, kan indholdet i denne vejledning ændre sig.



Advarsel: Multiroller er mærket med et symbol, der viser, at klapvognen ikke opfylder WC19 (RESNAWC-4:2012 eller ISO7176-19:2008) og derfor ikke må bruges som bilsæde til transport af brugeren i et køretøj. Barnet skal sidde i en godkendt autostol. Sørg også for, at Multiroller er forsvarligt fastgjort i bilen, og at dette klistermærke, som sidder på stellet nederst bagtil til højre og venstre, også bemærkes af andre.



Derudover skal du være opmærksom på:

Brug ikke Multiroller som legetøj for børn eller som stol til voksne.
Har du spørgsmål til brugen af Multiroller, bedes du kontakte din forhandler.

Bemærk:

Brug ikke Multiroller , hvis den er defekt.
Forsøg ikke at reparere Multiroller selv.
Når Multiroller klappes sammen, skal du passe på ikke at komme i klemme eller skade fingrene.
Den forventede levetid er fem år ved almindelig brug.
Brug aldrig klapvognen på rulletrapper.
Tal med din forhandler om bortskaffelse, da vedkommende kender de lokale forhold.

Hvis dækkene mister luft eller er flade, skal du tage Multiroller med til din forhandler for at få den repareret.
Multiroller skal efterses og vedligeholdes som beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse og pleje.



Advarsel: Kontrollér vognen, før du sætter et barn i den. Tjek, om der er løse dele, skarpe kanter, varme overflader, løse stropper, mekanismer der ikke fungerer korrekt, eller andre risici.

Genbrug efter en ulykke

For at undgå skader fra skjulte skader må produktet ikke bruges efter en ulykke.

Genbrug efter første brug

Multiroller er egnet til genbrug. Før genbrug skal produktet rengøres, desinficeres og godkendes til genbrug af et autoriseret servicecenter. Alle slidte og beskadigede dele samt komponenter, der er uegnede/ikke passende for brugeren, skal udskiftes.

Formål/indikation

Multiroller egner sig til ergonomisk forflytning – både inde og ude – af børn, som ikke kan bevæge sig ved egen kraft på grund af manglende gangfunktion eller en svær gangnedsættelse.

Risici ved brug/kontraindikationer

Risici ved brug kan undgås, hvis produktet anvendes korrekt. Der er ingen kendte kontraindikationer.

Basisudstyr

Basisudstyr:

- **Multiroller stel inkl. ét sæt baghjul (16" eller 20"), 9**
- forsæt (buggy, jogger eller offroad),
- tromlebremse,
- sædeenhed (sædeslynge eller integreret sæderamme).



Montering

Bemærk

Montering af Multiroller-dele før første brug udføres af den autoriserede forhandler. Hvis du efter levering fra forhandleren selv ønsker at udføre følgende monteringsstrin, må det kun ske som beskrevet herunder:

Levering

Kontrollér produktets stand, og om emballagen har taget skade. Fjern forsigtigt transportlåse og emballage. Tag Multiroller og tilbehøret ud af kassen.



I originalemballagen får du normalt den sammenklappelige aluminiumsramme, sædeenhed og tromlebremse, som allerede er monteret fra fabrikken, to baghjul samt ét af de tre forhjulssæt:

- Buggy-sæt med to drejelige forhjul (190x50),
- Jogger-sæt med ét 12" forhjul eller
- Offroad-sæt med to 16" forhjul
- Brugsanvisning



Montering af baghjul

- Hold trykknappen på de medfølgende gennemgående aksler (A) nede, og før akslen ind i baghjulets nav.
- Når akslen er skubbet helt ind i navet, slippes trykknappen.
- Hold hjulet i egerne, og hold trykknappen nede med tommelfingeren (B).
- Skub nu akslen ind i akselholderen på rammen på din Multiroller. Når lynudløserakslen kommer ud på den anden side af akselholderen, og låsekuglerne er synlige, kan du slippe trykknappen igen.

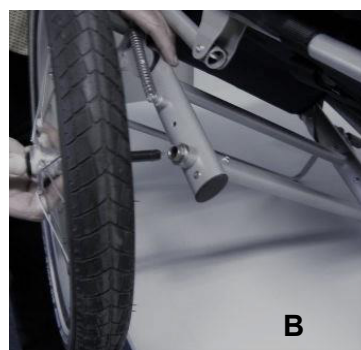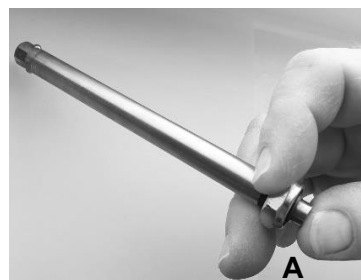

Bemærk: Kontrollér igen ved at trække hjulene frem og tilbage, at de sidder helt fast i rammen. Gør det samme med det andet baghjul.

Bemærk: Sørg for, at dækkene altid har tilstrækkeligt lufttryk: Bagdæk: 2,0 til 5,0 bar, fordæk: 2,0 til 2,5 bar. Overhold det maksimale lufttryk, der er angivet på dækket. Dæktrykket skal være ens i begge sider for at sikre en stabil og sikker kørsel.

Montering af forreste sæt

Forhjulene leveres sammen med det tilhørende forreste sæt (se ovenfor).

- Skub nu sættets rør ind i rammens forreste rør. Det er vigtigt at holde rørene parallelle, så de ikke kommer skævt. Lykkes det ikke i første forsøg, så træk sættet ud igen og prøv på ny – vær især opmærksom på at føre rørene ind parallelt.
- Tryk på de sølvfarvede knapper, så de kan gå helt ind i modtagerørene.
- Skub sættets rør ind i modtagerørene, indtil de sølvfarvede hoveder på fjederlåsen springer ud igen gennem de runde huller i modtagerørene.



Bemærk: Sørg for, at knapperne er sprunget helt ud, og at frontenheden sidder solidt fast i rammen.

Fold ud

Hold Multiroller med den ene hånd på skubbestangen og med den anden hånd på forenden. Fold forsigtigt Multiroller ud, indtil du hører et klik på begge sider af rammen. Så er foldesamlingerne låst.



For at folde Multiroller sammen, gør du sådan her:

- Sikr altid Multiroller ved at aktivere tromlebremsen, før du folder den sammen.
- Stil dig bag Multiroller og træk samtidig i plastgrebene til højre og venstre under skubbehåndtaget. 12
- Fold den øverste del af Multiroller fremad, indtil Multi-roller ligger sammenfoldet på jorden.



Bemærk: Pas på, at du ikke får fingrene – eller en andens – i klemme.

For at opnå den mindst mulige pakkestørrelse anbefales det:

- Afmonter baghjulene fra stellet. Sørg for, at bremsen ikke er trukket.
- Afmonter forhjulssættet fra stellet,
- Vip skubbestangen ned, så den næsten er parallel med skubrørene.

Bemærk: Når du folder, skal du sikre dig, at sædebetrækket ikke kommer ind i foldeleddet mellem for- og bagrammen på Multirol-ler, da det ellers kan blive beskadiget, og sædebetrækket kan gå i stykker.

Bemærk: De første gange, du folder, kan det føles lidt stramt, fordi skruer og samlinger først skal sætte sig.

Justering af skubbehåndtag

- Tilpas vinklen på skubbehåndtaget til din højde ved samtidig at trykke på trykknapperne ved skraldeleddene og føre håndtaget til den ønskede position.

Bemærk: For at undgå skader på skubbehåndtaget skal du sikre, at skubbehåndtaget står oprejst, før du folder Multiroller. Ellers kan justeringsrøret ramme skubbehåndtaget og beskadige det.



Tilbehør og funktioner

Frontsæt

(Ekstraudstyr)

Buggy-sæt med to drejelige forhjul og stel

Buggy-sættet fås i otte varianter:

Buggy-sæt (smalt stel):

- Størrelse 1 forhjul 190 x 51, 16" baghjul, indvendigt beslag (I)
- Størrelse 2 forhjul 190 x 51, 20" baghjul, indvendigt beslag (I)
- Størrelse 1 forhjul 190 x 51, 16" baghjul, udvendigt beslag (A)
- Størrelse 2 forhjul 190 x 51, 20" baghjul, udvendigt beslag (A)

Buggy-sæt (bred ramme):

- Størrelse 1 forhjul 190 x 51, 16" baghjul, indvendigt beslag (I)
- Størrelse 2 forhjul 190 x 51, 20" baghjul, indvendigt beslag (I)
- Størrelse 1 forhjul 190 x 51, 16" baghjul, udvendigt beslag (A)
- Størrelse 2 forhjul 190 x 51, 20" baghjul, udvendigt beslag (A)



Jogger-sæt med ét forhjul og ramme

Jogger-sættet fås i fire varianter:

Jogger-sæt 1:

- Smal ramme, 12" hjul (til 16" baghjul)

Jogger-sæt 2:

- Bred ramme, 12" hjul (til 16" baghjul)
- Bred ramme, 16" hjul (til 20" baghjul)



Offroad-sæt med to forhjul og stel

Offroad-sæt fås i to varianter:

- Smal ramme, 16" forhjul (til 16" eller 20" baghjul)
- Bred ramme, 16" forhjul (til 16" eller 20" baghjul)



Tromlebremse

Tromlebremsen betjenes fra skubbehåndtaget via bremsegrebet.

- For at låse tromlebremsen trækkes bremsegrebet
- ~~fast~~ tryk vipp kontakten ind i en af hakkerne med fingerspidsen, og slip bremsegrebet.
- Trækker du bremsehåndtaget igen, kobler palen fra, og bremsen frigøres.

Når kontramøtrikken på Bowdenkablets føring er løsnet, kan bremsefor-spændingen justeres ved at skrue Bowdenkablets føring ind eller ud.

Bemærk: Når alle justeringer er foretaget, skal de tidligere løsnet skrueforbindelser spændes igen.



Slyngesæde

(Valgfrit tilbehør)

Sædet leveres færdigmonteret ved første bestilling. Tag sædet ud af emballagen (ved genbestilling).

- Åbn velcrolukningerne på langs på sædets højre og venstre side.
- Anbring stofsædet omkring den øverste hovedramme, og luk velcroen igen.
- Før den øverste rem ind i spænde-/strammespændet, og stram til. Remmen skal ligge over den øverste tværstiver.
- Luk de sidevendte velcrolukninger til venstre og højre (små strammespænder på bagstykket).
- Placer Multirolleren på skubbebøjlen og baghjulene, så du har god adgang til de to store strammespænder ved fodsektionen, og stram også disse.



Bemærk: Kontrollér igen, at alle sele-/bæltespænder på hængesædet er spændt, og at overskydende remme er fastgjort.

Integreret sæderamme

(Ekstraudstyr)

Sæderammen leveres færdigsamlet fra fabrikken. Vinklerne på sæde, ryg og fodstøtte kan justeres.



Justering af ryglænets vinkel

- Løsn skruen, der fastholder det bukkede rør,
- Indstil ryglænet til den ønskede vinkel (maks. 40°).
- Spænd skruen igen.



Justering af sædets vinkel

- Løsn spændegrebet under sædet (foran tværrøret)
- Indstil sædet til den ønskede vinkel (maks. 40°).
- Spænd spændegrebet igen.

En trefodsfjeder forhindrer, at justeringsrøret ved et uheld glider ud af føringsrøret. Fjederen kan trykkes ind, så justeringsrøret kan trækkes ud.



Justering af fodstøttens vinkel

- Løsn spændegrebet foran under sædet.
- Indstil den ønskede vinkel på fodstøtten (maks. 40°). En trefodsfjeder begrænser justeringsområdet.
- Spænd spændegrebet igen.



Justering af fodstøttens højde

- Løsn de to skruer bag de sorte lodrette rør bag fodstøtten. 16
- Indstil fodstøtten til den ønskede højde. Den kan justeres op eller ned med 14 cm (valgfrit 20 cm). En fjeder begrænser justeringsområdet.
- Spænd skruerne igen.

Hvis du har brug for hjælp, så kontakt din forhandler.

Fodstøtte 1

(Valgfrit tilbehør)

Pakkens indhold: én fodstøtte, to føringsrør med fastgørelse.

Monter fodstøtten i følgende rækkefølge:

- Afmonter frontenheden.
- Fjern også de to sorte plastbøsninger.
- Skub fodstøtten ind på de to forreste rør, og tryk de to plastbøsninger i igen.
- Monter frontenheden igen som beskrevet ovenfor.
- Indstil den korrekte højde, og spænd derefter skruerne for at fastgøre den.
- Om nødvendigt kan stofbetrækket ved læggen afkortes ved at folde den nederste rem indad.



Bemærk: Sørg for, at ingen står på fodpladen. Den er kun beregnet som støtte til fødderne, mens patienten sidder i Multirol-ler.


Bemærk: Kontrollér med jævne mellemrum, at frontenheden og dens hjul sidder godt fast.

Sæt til fodstøtte

(Ekstraudstyr), Par

Fodstøttesæt til forlængelse af underbenslængden (kun i kombination med fodstøtte 1) fås i to størrelser (meget begrænset til Jogger):

- Størrelse 1 – forlængelse af underbenslængde 100-400 mm
- Størrelse 2 – forlængelse af underbenslængde 100-490 mm

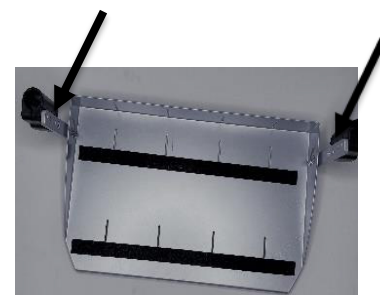


Fodstøtte 2, til integreret sæderamme

(Valgfrit tilbehør)

Fodstøtte 2 fås i to størrelser:

- Til underbenslængde på 20 til 27 cm (med joggersæt: maks. 33 cm) kan den svinges op fra 90° til 30° i forhold til sædet.
- Til underbenslængde på 20 til 34 cm (med joggersæt: maks. 40 cm) kan den svinges op fra 90° til 30° i forhold til sædet.

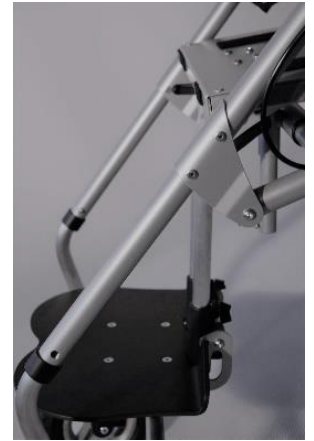

Nakkestøtte, velcro

(Valgfrit tilbehør)

- Åbn slyngesædet øverst, og fastgør nakkestøtten med fleecestropperne



Indlæggspude til slanke børn

(Valgfrit tilbehør)

- Læg indlæggspuden i slyngesædet,
- Åbn slyngesædet øverst, og fastgør indlæggspuden med fleecestropperne.
- Før fastholdelsesstropperne eller positioneringssystemerne gennem de angivne åbninger/slidser.



Taske

(Valgfrit tilbehør)

Tasken gør det muligt at have småting med på gåturen og fastgøres under sædet.

- Fastgør den foran på stellet til venstre og højre med Velcro på begge sider.
- Fastgør den bagpå ved tværrøret i tre punkter med Velcro på begge sider.





Regnslag

Sol-/regnkaleche

(Valgfrit tilbehør)

- Hold solkalechen i yderposition over sædet på Multi roller.
- Montér holderen på begge sider af rammen under justeringsleddet til skubbehåndtaget, og fastgør den med de medfølgende skruer som følger: 18
- Hold afstandsstykket mellem de to flige, og før skruen gennem afstandsstykket og gennem begge flige (A).
- Fastgør derefter skruerne med de medfølgende møtrikker, og spænd dem godt til.
- Når begge sider er spændt godt fast, kan solkalechen nemt sættes på beslagene og tages af igen (B).
- Sørg for, at solkalechens beslag sidder på beslagets inderside.

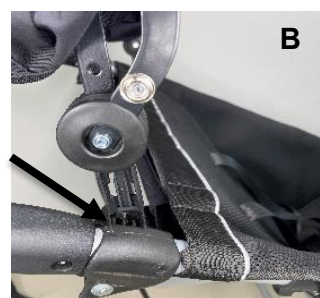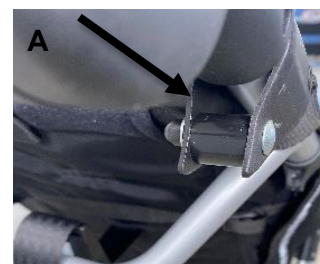

Bemærk: Solkalechen skal tages af, før den foldes sammen.



Vigtigt: Ved fast sæde gælder dette kun, når ryglænet er tilbagelænet

Regnslag (til ben)

(Valgfrit tilbehør)



- Fastgør øverst til venstre og højre i den ønskede højde på hængesædet med velcrobånd på begge sider (A).
- Fastgør nederst til venstre og højre på forstellet med velcrobånd på begge sider (B).

Regnslag til HoogeD

(Ekstraudstyr)

- Fastgøres nederst til venstre og højre på fronten med velcrobånd på begge sider.



Vind-/regnbeskyttelse med afskærmning

(Valgfrit tilbehør), specialudførelse

- Fastgøres til sol-/regncalotten ved hjælp af en lynlås.



Væltesikring

(Ekstraudstyr)

Væltesikringen forhindrer Multiroller i at tippe bagover ved kørsel over forhindringer og på skråninger.



Advarsel: Sørg for, at en monteret væltesikring er aktiveret, før der køres over forhindringer og på skråninger.

Antitip-hjulet må kun justeres af kvalificeret personale.



Andre valgfrie tilbehør

Rygforlænger (150 mm) til stofsæde

Rygforlænger (150 mm) til en integreret sæderamme på grund af en længere rygrem er det ikke nødvendigt at skifte betræk.

Overtræk til integreret sæderamme

Overkropsstøtte på plade bagpå

Indlæggspude med overkropsstøtte-pude

Integreret sædeplade til montering af sædeadapters,
trinløst justerbar, åben sædevinkel; ryggen fastholdes af et trinløst justerbart beslag;
sæde 95° til 135°, ryg 185° til 225°

Adapter til autostol

Sele

4-punktssele

5-punktssele

2-punkts hoftese

Skridtrem

Skille på plade (abduktionskile)

Sædekile efter mål

Fodstøtteremme (par)

Bemærk: Dette tilbehør er specialfremstillede produkter, som først kan produceres efter forudgående aftale med patient/kunde. De må kun monteres og tilpasses af kvalificeret personale.

Pleje og vedligeholdelse

Rengøring og desinfektion

Betræk og polstring

De anvendte tekstiler er flammehæmmende i henhold til DIN EN 1021-1 og -2.

- Rengør betrækket med en svamp, maks. 30 °C lunkent vand og en mild sæbe.
- Brug ikke vaskemaskine, tørretumbler eller strygejern.
- Brug ikke skyllemiddel, og undlad kemisk rensning af tekstildele.
- God hygiejne er vigtig, men vask kan slide på stoffet.
- Hvis stoffet er beskadiget, bør det udskiftes.
- Lad delene tørre liggende på et tørrestativ i et godt ventileret rum.
- Hvis kropsvæsker er trængt ind i betrækket, desinficeres disse områder grundigt med et husholdningsdesinfektionsmiddel (f.eks. Sagrotan eller tilsvarende).

Ramme og hjul

- Brug venligst ikke kraftige slibemidler til at rengøre rammen og hjulene på Multiroller.
- Brug en fugtig, blød klud med fortyndet opvaskemiddel.
- Til desinfektion anvendes et overfladedesinfektionsmiddel. Spray rammen, og tør derefter efter med en blød klud, til den er tør. Brug ikke damprenser til rengøring af understellet.
- Tag med jævne mellemrum baghjulene af rammen, og kontrollér hurtigudløserakslernes tilstand. Hurtigudløserakslerne bør rengøres med en klud og smøres let med kugleleje-fedt for at forebygge korrosion forårsaget af fugt og regn.

Kontrol for skader og funktion

Kontrollér altid, at justerings- og sikkerhedselementerne på Multiroller fungerer korrekt før hver brug:

- Skader på stel, påmonterede dele og tilbehør (revner, brud, korrosion, bøjedede eller manglende dele).
- Skader på polstring og betræk
- Skader på selen (klemmeanordninger, spænder, syninger)
- Forbindelsernes styrke (løse skruer eller manglende skruer)
- Funktion af alle justeringsdele (skruer, udløsergreb, ryglæn, puder, fodstøtte)
- Funktion af sikkerhedselementerne (tromlebremser)
- At typeskiltet er læseligt

Kontakt venligst din fagforhandler, hvis du opdager fejl eller mangler under denne kontrol.

De tests, der er beskrevet i de følgende instruktioner, skal udføres af brugeren med de angivne intervaller. Nødvendigt værktøj – unbrakonøgle (4 og 6 mm).

Skema til funktionstest

Kontrol	Dagligt	Ugentligt	Månedligt
Funktionstest af bremse	X		
Kontrol af velcroforbindelser	X		
Kontrol af skrueforbindelser		X	
Dæktryk (angivet på dæksiden)		X	
Visuel kontrol af sliddele som f.eks. hjul og lejer			X
Snavs på lejer			X

Alt vedligeholdelses- og servicearbejde, der ikke er nævnt her, skal udføres af en autoriseret forhandler.

Værktøj, der kræves til montering og vedligeholdelsesarbejde:

- en flad skruetrækker
- en stjerneskruetrækker
- to 9 mm fastnøgler (til tromlebremser)
- en 10 mm fastnøgle
- en 11 mm fastnøgle
- en 17 mm fastnøgle
- en 19 mm fastnøgle
- en 24 mm fastnøgle
- en 3 mm unbrakonøgle
- to 4 mm unbrakonøgler
- en 5 mm unbrakonøgle
- en 6 mm unbrakonøgle
- en 20 mm Torx-nøgle

Tekniske data

	Smal ramme (mål i cm)		Bred ramme (mål i cm)	
	Str. 1 Drivhjul 16"	Str. 2 Drivhjul 20"	Str. 3 Drivhjul 16"	Str. 4 Drivhjul 20"
Samlet højde	102	107	102	107
Samlet bredde	68	68	73	73
Samlet længde				
- Buggy	116 til 135	116 til 135	116 til 135	116 til 135
- Jogger	136 til 151	155 til 170	136 til 151	155 til 170
- Offroad	128 til 143	120 til 135	128 til 143	120 til 135
Mindste vendecirkel:				
- Buggy	122	122	132	132
- Jogger	142	142	152	152
- Offroad	134	134	154	154
Skubbehåndtagets højde	86 til 116	86 til 120	86 til 116	86 til 120
Fodstøtte 1 B x L	38 x 23	38 x 23	43 x 26	43 x 26
Mål sammenfoldet H x B x L	34 x 56 x 84	34 x 56 x 84	30 x 63 x 88	30 x 63 x 88
Maksimal brugervægt	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Vægt med hængesæde fra	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg
Hængesæde				
- Ryghøjde	58	58	58	58
- Sædedybde	33	33	33	33
- Sædebredde	30 – 38 (foran)	30 – 38 (foran)	35 – 43 (foran)	35 – 43 (foran)
- Ryggens bredde	30 – 40 (øverst)	30 – 40 (øverst)	30 – 45 (øverst)	30 – 45 (øverst)
Integreret sæderamme				
- Ryghøjde	62	62		
- Sædedybde	30 - 35	30 - 35		
- Sædebredde	38	38		
- Ryggens bredde	38	38		
- Rygjustering i grader	185° til 225°	185° til 225°		
- Sædejustering i grader	95° til 135°	95° til 135°		
- Underbenslængde	20 – 30	20 – 30		
- Fodstøtte 2 B x L	30 x 20	30 x 20		
- Justerbarhed for fodstøtte 2 i grader	90° til 30°	90° til 30°		

Garanti

Garantiperiode

Garantien på dette produkt gælder i 24 måneder fra købsdatoen. Gem venligst købskvittering eller andre salgsdokumenter med købsdato.

For at gøre brug af garantien bedes du kontakte din fagforhandler, som sørger for de nødvendige videre tiltag for dig.

Begrænsninger i garantien

Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes uagtsomhed, forkert eller u hensigtsmæssig brug, anvendelse af uoriginale dele eller fejlhåndtering som følge af, at denne brugsanvisning ikke er fulgt. Skader opstået ved uheld er ligeledes undtaget.

Et garantikrav bortfalder også, hvis navn og stempel fra den forhandler, som udleverede Multi-rolleren, ikke fremgår af garantibeviset, eller hvis du ikke kan fremvise garantibeviset.

Formular til garantikrav

Produktets modelnummer:	Multiroller
Efternavn, fornavn:	
Vejnavn og husnummer:	
By:	
Postnummer:	
Telefonnummer:	
E-mailadresse:	
Købsdato:	
Distributør:	

Distributør



Birdhouse

Peder Skrams Vej 1
5220 DK-Odense SØ.
Phone: +45 60139399

support@birdhouse.dk
www.birdhouse.dk