Brugsanvisning



Gulvstol

ergonomisk lænestol til stabiliserende og funktionel positionering

Læs brugsanvisningen grundigt, før du bruger Gulvstolen.



Kære kunde,

hjerteligt tillykke med din **Gulvstol**!

Den er skabt til fremover at gøre hverdagen lettere for dig og give dit barn nye muligheder for at slappe af, blive positioneret og deltage i det sociale liv.

Dit barn skal kunne sidde sikkert og behageligt i den. Derfor beder vi dig/jer på det kraftigste om at læse følgende brugsanvisning, før du/ I tager **Gravity Chair** i brug.

Har du/I spørgsmål, står vores team altid gerne til rådighed på (06721) 906 0 eller via et videoopkald.

Vi tager gerne imod dine/jeres forslag til, hvordan vi kan forbedre produktet – skriv til os på info@rehanorm.de.

Vi ønsker jer mange gode og lykkelige stunder med jeres **Gravity Chair**,

Deres

Andrea Staus og RehaNorm-teamet

EU- Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at produktet opfylder de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2017/745 (MDR) af 5. april 2017 om medicinsk udstyr. Produktionen foregår under kontrol af et kvalitetsledelsessystem i henhold til DIN EN ISO 9001:2015 og DIN EN ISO 13485:2021 med behørig hensyntagen til kravene i forordning (EU) 2017/745 (MDR) af 5. april 2017 om medicinsk udstyr.

Produktmærkningen findes under betrækket, på den side hvor lynlåsen kan åbnes.

Producent:

Seeds Co. LTD

Meshiro-cho 705-16
Isahaya City
854-0007 Nagasaki-præfekturet
Japan

Eneste importør i Europa og bemyndiget repræsentant for

EU-markedet for medicinsk udstyr

RehaNorm GmbH & Co. KG,
Am Ockenheimer Graben 50,
55411 Bingen
Tyskland
Telefon +49 6721 906 0,
Telefax +49 6721 906 66,
E-mail: info@rehanorm.de,
www.rehanorm.de

CE

Indholdsfortegnelse

EU-overensstemmelseserklæring 3
Indholdsfortegnelse 4
Indberetning af alvorlige hændelser 5
Produktbeskrivelse 6
Tilsigtet anvendelse.....7
Indikationer.....8
Anvendelsesområde 9
Genbrug efter første anvendelse.....9
Grundudstyr.....10
Skumkerne med aftørringsvenligt kunstlæderbetræk 10
Nakkestøtte 10
Afstandsstykke til sædedybde.....10
Trekantkile / positionerings- og funktionskile.....10
Bækkenbælte 10
Indlægspolster (inlay) 10
Taske.....11
Rembeslag 11
Risici.....12
Det skal du være opmærksom på, før du bruger Gravity Chair 13
Tilbehør og funktioner (valgfrit) 14
Fyldepolster 14
Polster til regulering af sædedybde / vinkeljustering.....14
Terapeutbord 14
Inkontinensindlæg 14
Abduktionskile 15
Benstøttepolstring.....15
Vugge.....16
Kørestel.....17
Yderligere valgfrit tilbehør / specialtilpasning 17
Anvendelsesmuligheder 18
Pleje og vedligeholdelse 19
Rengøring 19
Kunstlæderbetræk.....19
Indlæg 20
Desinfektion 22
Vedligeholdelse.....22
Produktets levetid 23

Vedligeholdelse.....23
Opbevaring og bortskaffelse.....24
Garanti 25
Garantiperiode 25
Begrænsninger i garantien 25
Formular til garantikrav.....25
Tekniske data 26
Trekantkile som fodstøtte 26

Indledende bemærkninger:

Fagforhandlerne bedes udlevere denne brugsanvisning til brugeren.

Vi gør opmærksom på, at det leverede produkt kan afvige fra det her beskrevne som følge af individuelle tilpasninger.

Bemærkning om tilgængelighed:

Bemærkning om tilgængelighed:

Denne brugsanvisning findes i en tilgængelig digital version, der er egnet til blinde og svagsynede forsikrede, og kan downloades fra www.rehanorm.de .

Indberetning af alvorlige hændelser

I henhold til forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr (MDR) er brugere og operatører forpligtet til straks at indberette enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med dette medicinske udstyr, til producenten samt til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hændelsen er indtruffet.

En alvorlig hændelse er enhver begivenhed, der direkte eller indirekte har ført til

- dødsfald for en patient, bruger eller en anden person,
- en alvorlig forværring af helbredstilstanden eller
- en alvorlig risiko for folkesundheden, har ført til, kunne have ført til eller kan føre til.

Indberet venligst sådanne hændelser til:

RehaNorm GmbH & Co. KG
Am Ockenheimer Graben 50, 55411 Bingen
E-mail: info@rehanorm.de
Telefon: 06721 906 0

Ansvarlig myndighed (Tyskland):
Forbundsinstituttet for lægemidler og medicinsk udstyr (BfArM)
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn
Hjemmeside: https://www.bfarm.de



Produktbeskrivelse

Gulvstol er en ergonomisk siddestøtte, der giver målrettet støtte og positionering og især muliggør opretning af bækkenet samt lateral støtte af bækken og brystkasse. Den bruges til stabil placering af personer med nedsat evne til at sidde og understøtter en fysiologisk hensigtsmæssig og funktionelt stabil siddestilling.

Takket være sin særlige form og det fleksible, tilpasningsdygtige materiale giver **Gulvstolen** en bred og jævnt fordelt støtte til kroppen. Det kan mindske tryk, reducere smerter og forbedre de vitale funktioner. Samtidig stabiliserer den kropsholdningen, så overekstremiteterne kan fungere bedre.

Siddestøtten er især velegnet til personer, som på grund af fysiske begrænsninger eller neurologiske sygdomme ikke kan sidde på almindelige siddemøbler. Den kan hjælpe med at udligne uhensigtsmæssige siddestillinger, modvirke udvikling af deformiteter og bremse deres progression.



Formål

Gulvstolen er en funktionelt støttende siddestøtte til stabiliserende og funktionel positionering af børn og unge med sygdomsbetingede begrænsninger i siddefunktion, kropskontrol, hovedholdning og bevægelseskoordination.

Produktet er udviklet til at støtte en fysiologisk hensigtsmæssig siddestilling i hjemmet, i terapi, i skolen eller i pleje- og omsorgsmiljøer.

Gulvstolen hjælper med at kompensere for funktionsnedsættelser, der påvirker siddestillingen, og muliggør stabile og trygge siddesituationer i hverdagen.

Produktet er især beregnet til brugere med neurologiske, neuromuskulære eller udviklingsrelaterede tilstande, hvor der er behov for en individuelt tilpasset positionering.

Anvendelse må kun ske efter instruktion fra kvalificeret fagpersonale.

Produktet er ikke beregnet til, at brugeren selv anvender det mobilt, eller til brug som bilsæde.



Indikationer

Gulvstolen er en siddestøtte, der hjælper børn med sygdomsbetingede begrænsninger i kropsstammekontrol, hovedholdning og siddestabilitet med at opnå en stabil, funktionel og fysiologisk hensigtsmæssig siddestilling.

Gulvstolen kan især anvendes ved:

- infantil cerebral parese,
- dyskinesier eller spastiske bevægelsesforstyrrelser,
- hypotonisyndromer,
- Downs syndrom,
- Rett syndrom,
- udviklingsneurologiske bevægelses- og koordinationsforstyrrelser,
- centralmotoriske forstyrrelser som følge af for tidlig fødsel,
- ataxier,
- neurologisk betingede begrænsninger i vejrtræknings- og synkekoordination,
- begrænsninger i den funktionelle evne til at sidde.

Hjælpemidlet tilpasses indikation og patient og planlægges ud fra de individuelle funktionelle begrænsninger.

Mål for hjælpemidlet

Gulvstolen understøtter især:

- en stabil og funktionelt hensigtsmæssig siddestilling,
- stabilisering af hoved, overkrop og bækken,
- orientering fremad,
- reduktion af sygdomsrelaterede fejl- og kompensationsbevægelser,
- sikre siddesituationer i hverdagen,
- støtte til indtagelse af mad,
- støtte til en funktionelt hensigtsmæssig koordination af vejrtrækning og synkning,
- kommunikation og hverdagsrelevante aktiviteter.

Kontraindikationer

- Manglende stabilitet i overkroppen uden ekstra fiksering
- Ukontrollerede bevægelser, der forringer sikker brug
- Medicinske kontraindikationer, der udelukker en sådan siddestilling

Anvendelsesområde

Gulvstolen er udviklet til brug i hjemmet samt i terapi-, undervisnings- eller plejemiljøer og egner sig både til hverdagen og til terapeutiske formål. Anvendelsen sker som led i den individuelle hjælpemiddelforsyning og varetages af oplærte pårørende/omsorgspersoner eller fagpersonale.

Genbrug efter første ibrugtagning

Gulvstolen kan anvendes igen. Inden genbrug skal produktet rengøres, desinficeres og godkendes til genbrug af en autoriseret servicepartner.



Grundudstyr

Skumkerne med aftørringsvenligt kunstlæderbetræk

Den brandhæmmende og vandafvisende overfladebehandling gør betrækket nemt at holde rent. Det er også let at skifte.

Nakkestøtte

er fremstillet af ergonomisk formet skum og hjælper med at stabilisere hovedets position. Den sideformede udformning begrænser ukontrollerede hovedbevægelser og mindsker, at hovedet tipper til siden. Højden på nakkestøtten kan justeres individuelt med en velcrolukning.

Afstandsstykke til sædedybde

En sædedybde-indsats, placeret under indlægspuden, gør det muligt at justere sædehøjden. Den kan om nødvendigt tages ud for at give en dybere siddeposition.

Trekantkile / positionerings- og funktionskile

bruges til at tilpasse sædets hældning og understøtter en stabil og funktionel siddeposition. Den kan anvendes til placering af de nedre ekstremiteter samt til at støtte en fysiologisk hensigtsmæssig siddestilling. Som fodstøtte giver den en aflastende positionering af ben og fødder.

Bækkenbælte sikrer siddepositionen og understøtter en stabil bækkenstilling. Det forebygger, at brugeren tipper til siden eller bagud under brug.

Indlægspude (inlay)

Air-Mesh-stof med quiltede puder indvendigt sikrer løbende luftcirkulation og mindsker ophobning af fugt og varme.

Vær særligt opmærksom på brugere med tonus- eller refleksbevægelser, og sørg især for et sikkert greb. Stolen skal stå stabilt for at forhindre, at brugeren glider.

Taske

Den kan fastgøres med velcro og opbevarer denne brugsanvisning samt dine småting.

Remholdere

I gummi-remholderne langs kanten af armlænene kan enderne af bækkenremmen hægtes fast, så det bliver lettere at sætte sig i **Gravity Chair** .

Brug af remholderen

- Løft elastikken op,
- Tag plastik-D-ringen på bækkenbæltet, og før den gennem den elastiske bælteholder.



- Gentag proceduren på den anden side.



- Sørg for, at bækkenbæltet er helt åbent og holdes på plads i bælteholderne på begge sider. Så kan brugeren sætte sig i stolen uden at sidde oven på bæltet.



Dette er ikke legetøj.
Følg alle anvisninger, og brug kun udstyret som beskrevet.
Forkert brug kan medføre alvorlige skader på brugeren.



Risici

Ved terapeutisk korrekt brug er der ikke kendskab til mulige risici. Sædehjælpen, som udelukkende består af skum og et betræk i kunstlæder, minimerer som udgangspunkt risikoen for skader. Følgende anvisninger skal dog stadig overholdes:

Særligt ved brugere med spasmer og pludselige, rykvise bevægelser skal man sikre, at brugeren ikke falder ud af Gravity Chair.

Hos brugere med en sideværts skævhed i kroppen kan trekantkilen forsigtigt lægges ind fra siden for at korrigere siddestillingen. Dette må ikke forringe brugerens stabilitet.

Hvis man sidder i samme stilling i mere end 30 minutter, kan det give smerter. Personer, der ikke selv kan flytte sig, bør kunne få plejehjælp, når Gravity Chair bruges.

Risici



Hvis der ud over Gulvstolen bruges en sædeskål eller lignende, anbefaler vi at finde en god rytme for skift mellem de to siddestillinger og positioneringsmuligheder og at skifte regelmæssigt med passende mellemrum.

Lad ikke brugeren sidde uden opsyn i Gravity Chair. Vedkommende kan miste balancen, vælte og komme til skade.

Forebyg misbrug: Gulvstolen er ikke legetøj og må heller ikke bruges som f.eks. skammel. Det kan medføre personskade.

Løft ikke Gulvstolen i håndtagene, mens brugeren sidder i. Håndtagene er ikke beregnet til den belastning, kan rive sig løs og dermed bringe brugeren i fare. De er udelukkende til at bære det tomme sæde.

Placer ikke Gulvstolen for tæt på en pejs eller en varmeblæser, og undgå åben ild, f.eks. lightere eller cigaretter. Hvis Gulvstolen udsættes for ekstreme temperaturer, f.eks. kulde, stærk sol eller endda sauna, skal det nøje vurderes, om brugeren kan komme til skade. Det gælder især brugere med nedsat eller ingen følesans i huden.

Ved inkontinens anbefales det at bruge en inkontinensindlæg, som fås som tilbehør.

Brug venligst kun Gulvstolen, når den har et betræk på. Ved hård brug uden betræk kan limningerne i skumindlæggene løsne sig.

Kombinér kun Gulvstolen med andre hjælpemidler som f.eks. trykaflastende puder efter lægens anvisning. Der må ikke befinde sig brændbart materiale i Gulvstolen.

Vigtigt at vide, før du bruger Gulvstolen

Hold emballagen væk fra børn, når du pakker din **Gulvstolen** ud.

Plastemballage kan medføre kvælningsfare.

Tilbehør og funktioner (valgfrit)

Fyldpude



Den bruges til individuel tilpasning af sædebredden ved at fastgøres på sædets indvendige side.


Den har en samlet tykkelse på 30 mm og består af tre lag à 10 mm skum. Det gør det muligt at justere sædebredden fleksibelt på hver side i trin på 10-mm.

Pude til regulering af sædedybde / vinkeljustering



Puden til regulering af sædedybden giver mulighed for individuel tilpasning af både sædedybde og sædevinkel efter brugerens kropsbygning og funktionelle behov.

Ved at placere puden under indlægspuden (inlay) kan hældningen mellem ryglæn og sædeflade påvirkes. På den måde kan sædevinklen indstilles individuelt, så man opnår en ergonomisk understøttet siddestilling.

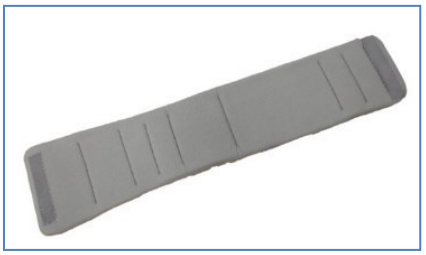

Terapibord



Det giver en stabil underarmsstøtte og understøtter terapeutisk arbejde med armene samt brug af terapi-legetøj. Den dybe udskæring gør det muligt at placere sig tæt på kroppen og fremmer dermed en stabil, ergonomisk siddestilling.

Inkontinensindlæg




Det er fremstillet af et vandtæt materiale og beskytter sædet effektivt mod, at væske og snavs trænger ind. Ved inkontinens skåner det skumkernen for tilsmudsning, bidrager til en hygiejnisk brug af sædet og forlænger produktets levetid.

Tilbehør og funktioner (valgfrit)

Abduktionskile


Den hjælper med at forebygge hofteluksation og forhindrer, at knæene ukontrolleret presses mod hinanden som følge af øget muskelspænding. Den kan nemt tages af, så den ikke generer patienten ved at sætte sig ind og rejse sig.

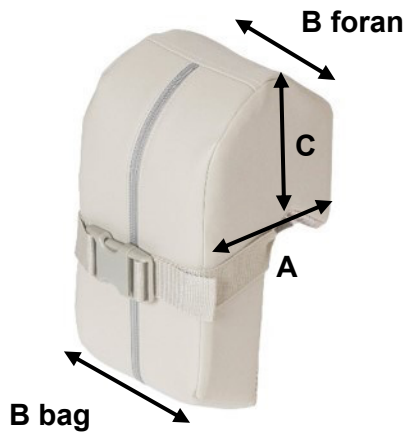

Størrelse		S	M	L	LL	LLW
A	Længde [cm]	18	18	23	23	23
B	Bredde foran/bagpå [cm]	10/12	10/12	11/13	11/13	11/13
C	Højde [cm]	12	12	16	16	16

Benstøttepolster

Det hjælper med at strække benene og bidrager til en mere afslappet, ergonomisk kropsholdning. Samtidig muliggør det en funktionel lejring af knæ, der er kontrakte eller har begrænset bevægelighed.

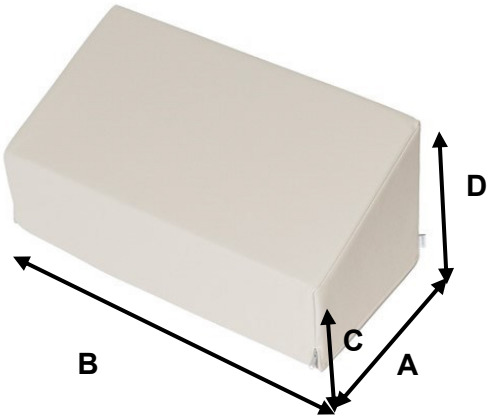

Størrelse		S	M	L	LL	LLW
A	Længde [cm]	22	22	28	28	28
B	Bredde [cm]	46	46	57	57	57
C	Højde foran [cm]	12	12	15	15	15
D	Højde bagtil [cm]	20	20	26	26	26


Gynge

Gyngen udvider produktets funktionelle anvendelsesmuligheder og kan bidrage til at støtte hverdagsrelevante bevægelser samt aktiv interaktion.

Gyngen kan bruges som støtte, især for personer med neurologiske eller udviklingsrelaterede begrænsninger.

Anvendelsen foregår i hjemmet af personer uden sundhedsfaglig uddannelse som led i den individuelle hjælp. Som tilvalg kan gyngen udstyres med hjul (Ø 76 mm) for at gøre fleksibel placering lettere.

Gynge-størrelse		S	M	L	LL	LLW
A	Længde [cm]	72	78	93	100	100
B	Bredde [cm]	49	52	59	64	74
C	Samlet højde [cm]	50	52	57	60	60
D	Højde på sidestykker [cm]	30	32	32	41	41
E	Sædeforhøjelse [cm]	16	16	18	18	20

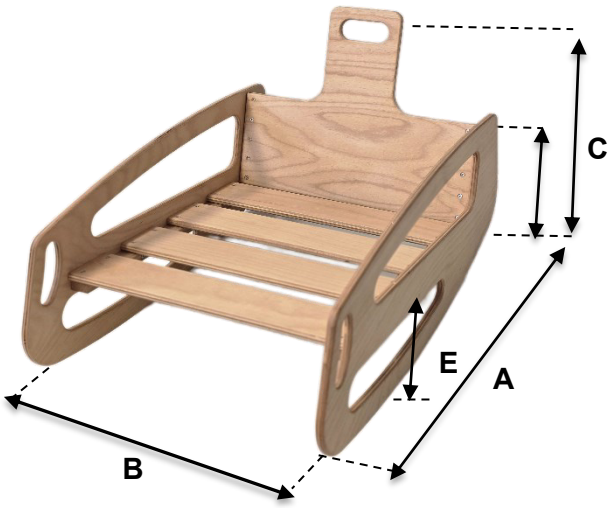


Bemærk: Ved brug af gyngen eller kørestellet skal fodpositionen/fodstøtten tilpasses individuelt efter kropsmål, underbenslængde samt brugerens funktionelle behov.

Understel på hjul

Denmobile siddestøtte må ikke bruges sammen med trekantkilen.
Stolen kan vælte og forårsage personskade.

med fire låsbare hjul (Ø 75 mm) og håndtag til nem manøvrering derhjemme eller i klasselokalet.

Størrelse på hjulunderstel		S	M	L	LL	LLW
A	Længde [cm]	69	80	91	100	100
B	Bredde [cm]	57	60	68	71	81
C	Samlet højde [cm]	51	53	58	61	61
D	Højde på sidedele [cm]	35	37	37	46	46
E	Sædeforhøjelse [cm]	20				

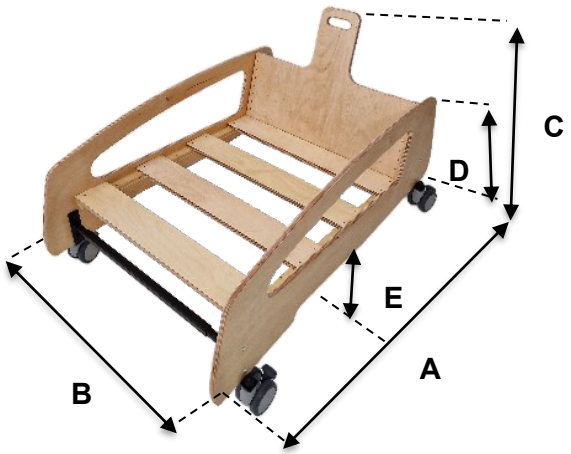

Yderligere valgfrit tilbehør / specialtilpasning

4-punkts bækkenbælte, skulder-/overkropssele.

Ved specialtilpasning kan der laves en række individuelle justeringer – især af sædevinkel, integration samt tilpasning af fodplader/fodstøtter – og ergonomisk afstemning efter underbenets længde.

Kontakt os for flere oplysninger.

Anvendelsesmuligheder

Gulvsstolen er et siddesystem, der er udviklet til børn og unge med svære fysiske og/eller neurologiske funktionsnedsættelser. Det bruges til at skabe en stabil, trykaflastende og funktionelt hensigtsmæssig siddestilling, når kropsstabiliteten i overkroppen mangler eller er nedsat. Siddestillingerne kan tilpasses individuelt, med særlig støtte til en korrigerende bækkenstilling. Den opnåede stabilitet i hoved og overkrop gør det muligt for brugeren aktivt at deltage i det sociale samspil, skabe øjenkontakt og udvikle samt anvende kommunikative færdigheder – især i en oprejst siddestilling. Den fysiologiske opretning understøtter desuden vejrtrækningen, fremmer kommunikative og hverdagsrelevante aktiviteter og gør plejeopgaver lettere i hjemmet eller i en støttet hverdag.

Trekantskilen bruges til at ændre sædeenhedens samlede sædevinkel (sædetilt) samt til at støtte positioneringen af underekstremiteterne.



Kraftig hældning bagud



Mindre kraftig hældning bagud. Trekantskilen bruges som fodstøtte.



Kraftig hældning fremad



Let hældning fremad.



Placér **Gravity Chair** på trekantskilen, så en fejlagtig stilling/holdning af hovedet kan korrigeres.



Uden trekantskile



Pleje og vedligeholdelse

Overmaterialet på den ergonomiske siddehjælp **Gravity Chair** er fremstillet af 100% PU-kunstlæder (betræk, trekantskile, nakkestøtte og lomme). Indlægspuden (inlay) er fremstillet af 100% polyester.

Rengøring

Betræk i kunstlæder

Nødvendige redskaber

- Rensemiddel til kunstlæder / mild sæbeopløsning (maks. 30°)
- Svamp (til let/middel snavs)
- Blød håndbørste (til kraftigt snavs)
- Mikrofiber- eller bomuldsklud
- Rent vand

Fjern synligt snavs med det samme.
Ved almindeligt snavs tørres kunstlæderbetrækket af med en fugtig (ikke våd) klud.



Pleje og vedligeholdelse

Ved kraftig tilsmudsning:

Spray rengøringsmidlet direkte på materialets overflade, og lad det virke i et par sekunder. Arbejd det jævnt ind med svamp/børste med et let tryk.

Tør derefter den våde overflade af med en tør mikrofiberklud/bomuldsklud.

Til sidst fjernes alle rester af rengøringsmidlet omhyggeligt med en ren, fugtig mikrofiberklud/bomuldsklud og rigeligt rent vand. Ved særligt genstridigt snavs kan det være nødvendigt at gentage processen.

Indlæg

- Vask ikke indlægget ved mere end 40°
- Vælg helst et skåneprogram med lav centrifugering
- Brug hverken tørretumbler eller strygejern.
- Undgå skyllemiddel, og lad det ikke renses kemisk

Vi anbefaler, at følgende rengøringsprocedure udføres én gang om ugen i områder med meget trafik.



Pleje og vedligeholdelse

Vær ekstra opmærksom, når du lukker **Gravity Chair**-lynlåsen.

Luk ikke lynlåsen med magt, så kanten på den indvendige skumpude ikke bliver beskadiget, da det i værste fald kan få lynlåsen til at klistre og/eller hoppe af (se figur 1a).



Når du lukker lynlåsen, skal du gøre det meget langsomt og forsigtigt. Tryk skumpudens kant indad med fingrene, så lynlåsen ikke bider sig fast i skumkanten. Vær især opmærksom i hjørnerne (se figur 1b).



Pleje og vedligeholdelse

Desinfektion

Anvend desinfektionsmidlet i overensstemmelse med producentens anvisninger på produktet.

Desinfektionsmidler, der til overfladedesinfektion **anbefales** fx:

- Descosept 22
- Incidin

Desinfektionsmidler, der til overfladedesinfektion **betinget anbefales** er:

- Microbac forte
- Perform

Afprøv disse desinfektionsmidler på et skjult sted, før de anvendes på større flader. Brug om muligt fortyndet, og lad det ikke virke i længere tid.

Desinfektionsmidler, der til overfladedesinfektion **ikke** anbefales:

- Mikrozid sensitive liquid
- Incidin liquid

De angivne anvisninger fritager ikke brugeren for pligten til at udvise omhu ved håndtering af materialer og rengøringsmidler.



En utilstrækkelig eller forkert udført rengøring kan i værste fald medføre uoprettelige skader på overfladen.
Ved brug af almindelige rengøringsmidler skal De altid følge producentens doseringsanvisninger.
Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder olie eller fedt.
Brug hverken vaskemaskine, tørretumbler eller strygejern.
Anvend ikke kemiske blegemidler eller slibende/skurende rengøringsmidler.
Stoffer, der er tørret ind eller har trængt ind over længere tid, kan kun fjernes i begrænset omfang.
Overfladen på kunstlæder tåler ikke opløsningsmidler, klorider, polermidler, vaskepolermidler og aerosolsprays.
Yderligere behandling med plejemidler til læder/kunstlæder er ikke nødvendig.

Vedligeholdelse

For at sikre en tryg og langvarig brug af produktet anbefaler vi et dagligt visuelt eftersyn samt regelmæssig pleje af siddehjælpen i henhold til vedligeholdelsesforskrifterne.

Kontrollér regelmæssigt, at produktet passer korrekt, fungerer som det skal, og at der ikke er fejl eller tegn på slitage. Ved uregelmæssigheder bedes du kontakte den leverende forhandler.

Brug udelukkende producentens originale tilbehør og originale reservedele, da brugerens sikkerhed ellers kan blive kompromitteret, og garantikrav bortfalder.

Reservedele kan bestilles via den leverende forhandler ved oplysning af serienummeret på sædeenheden.



Produktets levetid

Ved regelmæssig og korrekt brug er produktets levetid mindst fem år. Kontakt med inkontinensvæsker kan dog forkorte produktets levetid betydeligt.

Produktionsåret fremgår under betrækket på undersiden af sædet. Gravity Chair's kunstlæderbetræk har en flammehæmmende og vandafvisende overfladebehandling.

Vedligeholdelse

For at sikre brugerens sikkerhed på lang sigt og bevare den lovpligtige garanti på sædet skal der mindst én gang om året udføres vedligeholdelse hos en fagforhandler. Her skal især polstring, betræk, spænde/lås på bækkenbæltet samt andre belastede eller snavsudsatte komponenter kontrolleres og udskiftes ved skader. Al udført vedligeholdelse skal dokumenteres fuldt ud i den vedlagte vedligeholdelsesplan.

Med regelmæssig og korrekt vedligeholdelse kan sædehjælpen i mange tilfælde bruges ud over den normale produktlevetid, forudsat at der ikke er sikkerhedskritiske fejl. Det kræver en fuldstændig vedligeholdelseshistorik, der dokumenterer, at vedligeholdelsen er udført som foreskrevet.

Bemærk også oplysningerne om fremstillingsdatoen på typeskiltet. Produktmærkningen sidder under betrækket på den side, hvor lynlåsen kan åbnes.

Pleje og vedligeholdelse

Vedligeholdelseskrav

Kontrollér venligst siddehjælpen Gulvstolen regelmæssigt for:

- korrekt pasform og tilpasning
- at polstring og betræk er intakte (f.eks. revner, slitage, stabilitet eller materialetræthed) 24
- at selesystemet er i korrekt stand (f.eks. spænder og syninger)
- at alle justeringselementer fungerer fejlfrit (f.eks. sæde- og rygpolstring, nakkestøtte)
- sikkert greb i velcrolukningerne
- tydelig læsbarhed af typeskiltet

Tip: Kontakt straks din forhandler, hvis du opdager fejl eller mangler.

Vedligeholdelsesplan

Producentens vedligeholdelseskrav er udført:

Dato	Forhandler	Navn	Underskrift

Bemærk: Konstaterede mangler eller skader skal udbedres af forhandleren eller producenten, før produktet bruges igen.

Opbevaring og bortskaffelse

Produktet skal opbevares ved stuetemperatur, tørt og beskyttet mod direkte lys.

Den ergonomiske siddehjælp kan bortskaffes via dagrenovationen

- eller som storskrald

.

Garanti

Garantiperiode

Garantien for dette produkt gælder i **24 måneder fra købsdatoen**. Gem venligst salgskvitteringen med dato.

For at gøre brug af garantien bedes du kontakte din forhandler, som vil iværksætte de nødvendige næste skridt for dig.

Begrænsninger i garantien

Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes forsømmelse, forkert eller uhensigtsmæssig brug, anvendelse af uoriginale dele eller fejlhåndtering som følge af, at denne brugsanvisning ikke er blevet fulgt.

Garantikrav bortfalder også, hvis produktet tages i brug igen efter første anvendelse, hvis navn og stempel fra den forhandler, hvor du har modtaget **Gravity Chair** , ikke fremgår af garantiformularen, eller hvis du ikke kan fremvise garantiformularen.




Garantibeviset erstattes ikke.
Opbevar det derfor et sikkert sted.


Formular til garantikrav


Produktets modelnummer:	**Gulvstol**
Efternavn, fornavn:	
Vejnavn og husnummer:	
By:	
Postnr.:	
Telefonnummer:	
E-mailadresse:	
Købsdato:	
Forhandler:	


Hvis der opstår et problem i garantiperioden, bedes du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Du skal fremvise garantibeviset.

Tekniske data

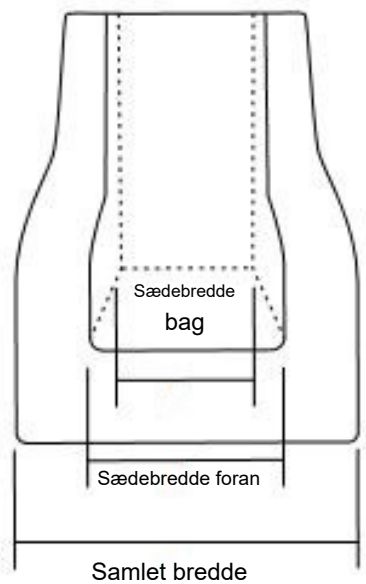

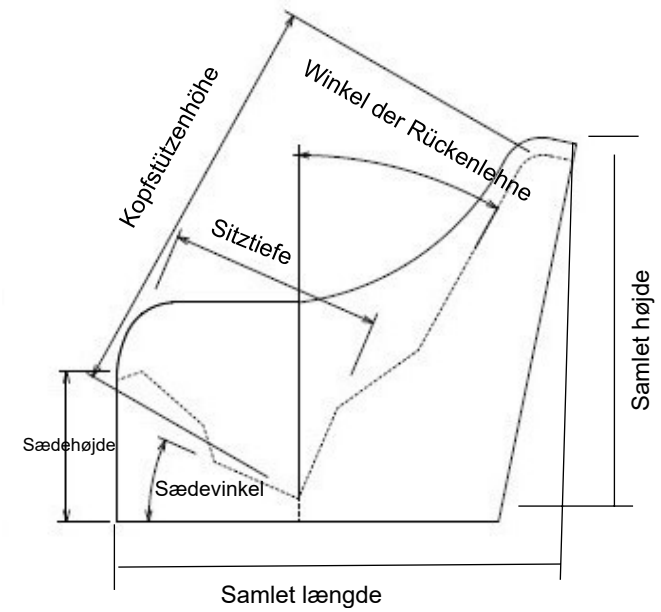

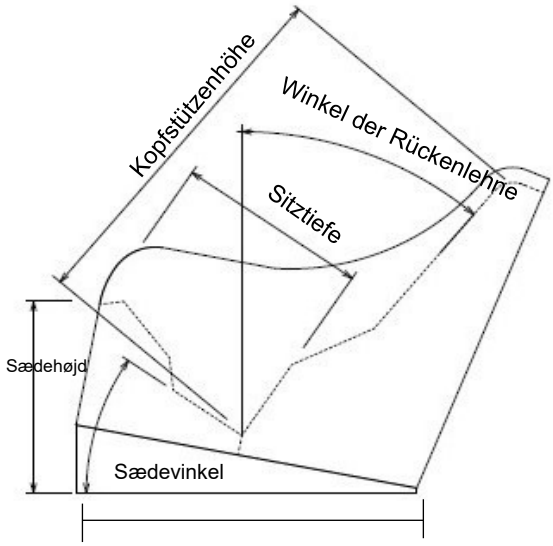

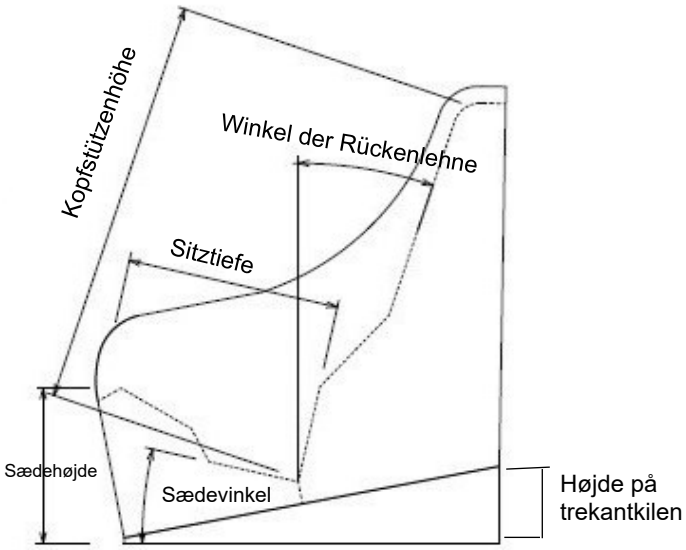

Trekantskile som fodstøtte

Trekantskilen kan bruges som fodstøtte. Den anvendelige fodstøtteflade varierer efter størrelse og er 46–71 cm i bredden og 47–74 cm i dybden. Den fleksible anlægsflade gør det muligt at tilpasse individuelt til fodstilling, underbenslængde, sædehøjde og brugerens funktionelle behov.

Maksimal anvendelig fodstøtteflade

Størrelse	S	M	L	LL	LLW
Brugbar bredde [cm]	46	49	57	60	71
Brugbar dybde [cm]	47	57	67	74	74



Tekniske data

Brugermålene afgør størrelsen på **Gulvstolen**. Ønskes mere støtte, kan man vælge ud fra mål, der er en smule mindre end brugermålene. Er man i tvivl, anbefales en prøvesidning.

Størrelse	**S**	**M**	**L**	**LL**	**LLW**
Kropshøjde [cm]	90 ~ 110	110-130	130-150	150-170	
Samlet længde [cm]	60	71	82	91	
Samlet bredde [cm]	46	49	57	60	71
Samlet højde [cm]	55	61	67	72	
Armlænets højde [cm]	29	35	39	43	
Ryghøjde/nakkestøttehøjde [cm]	60	69	74	81	
- Bredde på nakkestøtten [cm]	22		28	29	
- Højde på nakkestøtten [cm]	17	18	24		
Sædehøjde [cm]	20 ~ 32	23 ~ 37	26 ~ 42	29 ~ 48	
Sædedybde [cm]	22 ~ 24	28 ~ 30	36 ~ 38	41 ~ 43	
Sædebredde foran [cm]	22 ~ 28	24 ~ 30	31 ~ 37	33 ~ 39	44 ~ 50
Sædebredde bagtil [cm]	21	23	27	30	41
Sædevinkel [cm]	21°~ 43°	18°~ 40°	12°~ 34°	11°~ 33°	
Hældningsvinkel for ryglænet [cm]	19°~ 41°		18°~ 40°	20°~ 42°	
Længde på trekantkilen [cm]	47	57	67	74	
Højde på trekantkilen [cm]	10	12	14	17	
Sædevægt [kg]	ca. 4,3	ca. 5,8	ca. 7,9	ca. 9,8	ca. 11,2
Maksimal brugervægt	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg	120 kg

*Den angivne sædehøjde gælder både ved brug uden og med en trekantkile. Ved brug af gyngen skal man – afhængigt af størrelse – regne med en forhøjelse af sædehøjden på 16 til 20 cm. Ved brug af kørestellet skal man regne med en forhøjelse af sædehøjden på 20 cm. Sædehøjden på Gravity Chair justeres udelukkende mekanisk ved manuelt at lægge tilbehørsdele under eller montere dem (trekantkile, gynge eller kørestel).



Distributør

Birdhouse
Peder Skrams Vej 1
5220 DK-Odense SØ.
Phone: +45 60139399

support@birdhouse.dk
www.birdhouse.dk

Version: Rev. 04
Sprog: Tysk
Status: 2026-07